



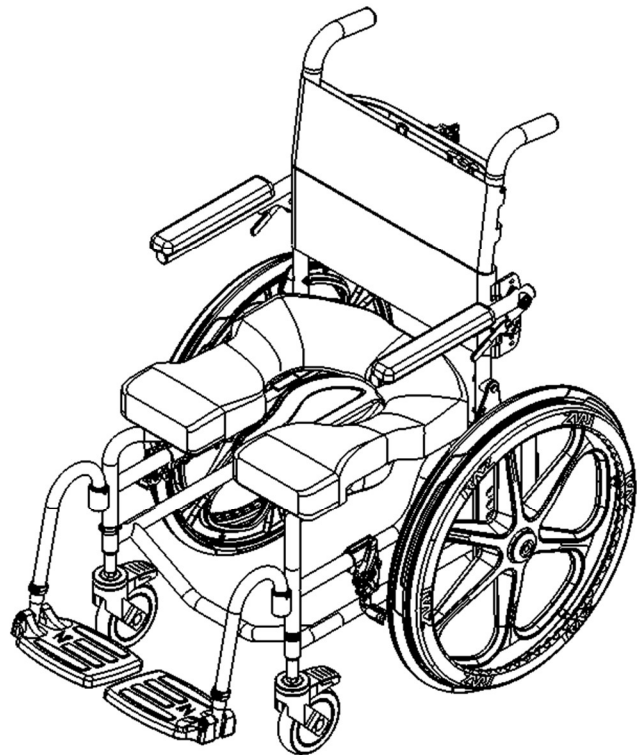

Liikkuvat suihkualusastiatuolit

Raz-AP(Z100)
Raz-SP(Z200)

Käyttäjän ja jälleenmyyjän opas

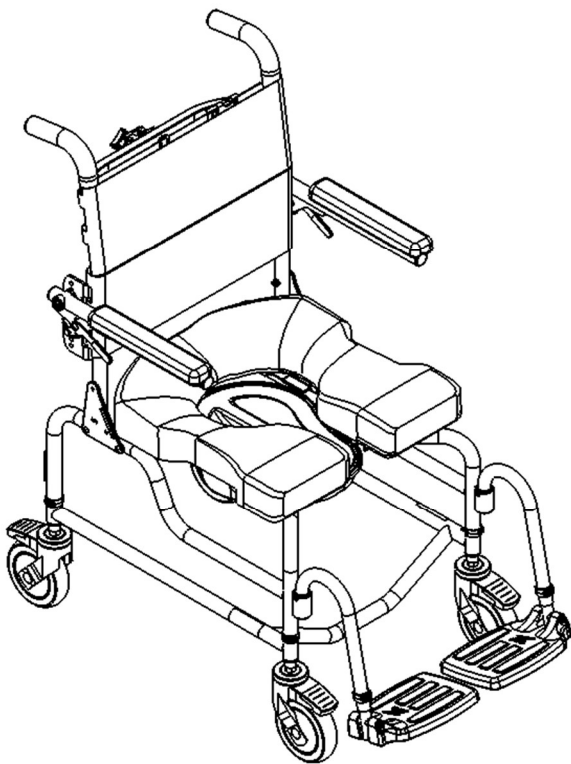

EC REP

Advena Ltd. Tower Business Center
2nd Flr, Tower Street
Swatar, BKR 4013 Malta

UKRP

Advena Ltd. Pure Offices, Plato Close
Warwick, CV34 6WE UK

CH REP

Senectovia Medizinaltechnik AG
In der Luberzen 1,
8902 Urdorf, Switzerland



BASIC UDI-DI: 628758RAZDESIGNINC2004V9

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita!

On tärkeää, että siirrettävä Raz-suihku-alusastiatuoli kootaan oikein ja kaikki säädöt tehdään huolellisesti. Varmista, että käyttäjä(t), jälleenmyyjä(t) ja hoitaja(t) ovat lukeneet tämän ohjeen ja ymmärtäneet perusteellisesti siirrettävän suihku-alusastiatuolin turvallisen käytön. Ajantasaiset käyttöohjeet ovat saatavana verkossa osoitteessa www.razdesigninc.com. Saadaksesi selventäviä tietoja mistä tahansa tämän ohjeen osasta, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai valmistajaan.

Raz-suihku- ja wc-tuolien sekä niiden lisävarusteiden luvaton muokkaaminen/muuttaminen tai väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty. Tällaiset toimet mitätöivät välittömästi kaikki sovellettavat takuut ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja, laitteen toimintahäiriöitä tai säännösten noudattamatta jättämistä. Raz Design ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat luvattoman, muokatun tai muutetun laitteen käytöstä. Käyttäjä ottaa kaiken vastuun siitä, että laitetta käytetään tarkoitetulla sekä virallisessa dokumentaatioissa määritellyllä tavalla.



VALMISTAJA

Raz Design Inc.
135 Railside Rd. Toronto, ON, Canada, M3A 1B7
877.720.5678 / +1.416.751.5678
info@razdesigninc.com



JALLEENMYYJAASI

Suomi
90240 Oulu, Finland
040 705 5886
info@rehaco.fi

TUOLIN LUOKITUS SUURIMMAN KÄYTTÄJÄN PAINON MUKAAN	
AP / SP	185 kg (407 lbs)

TURVALLISUUSVAROITUKSIA HUOMIOITAVAKSI JÄLLEENMYYNTITARKOITUKSESSA

LAITE ON SOPIVA TYYPIN A SUUREN KÄYTTÖKUORMITUKSEEN (esim. LAITOKSIIN), EIKÄ SITÄ KOSKAAN SAA KÄYTTÄÄ MIHINKÄÄN MUUHUN TARKOITUKSEEN, KUIN ALUN PERIN TARKOITETTUUN

Vakaus

Kaikkien mallien pyörät on varustettu kaksoislukoilla. Jalkavipu aktivoi sekä rullauslukon että kääntymislukon. **Parhaan etu-, taka- ja sivusuuntaisen vakauden saavuttamiseksi eteenpäin ja sivusuuntaan on tärkeää, että kaikki suihkut tuolin pyörät ovat ulospäin ennen kuin lukot kiinnitetään.** Avaa valinnainen pyörien



suunnan lukko, jos se kuuluu tuolin varusteisiin, ennen kuin kierrät takapyöriä sisään päin ja kytket pyörien kaksoislukot.

KÄYTTÄJÄ EI SAA nojata eteenpäin istuessaan siirrettävässä Raz-suihku-alusastiatuolissa, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen eteenpäin.

KÄYTTÄJÄ EI SAA ajaa ramppia alaspäin ilman hoitajaa, joka voi pidätellä tuolia laskeutumisen aikana.

PYÖRIEN LUKOT EIVÄT OLE JARRU! Älä koskaan käytä pyörien lukkoja suihkutuolin hidastamiseen, kun laskeudutaan kaltevia pintoja, koska tästä voi aiheutua tuolin kaatuminen liikkeen suuntaan.

Vakaus sivusuunnassa

KÄYTTÄJÄ EI SAA nojata siirrettävän Raz-suihku-alusastiatuolin reunan yli, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.

KÄYTTÄJÄ EI SAA yrittää poimia esineitä lattialta nojaamalla ja kurottamalla – on käytettävä tartuntapihtejä tai pyydettyä apua.

KÄYTTÄJÄ EI SAA asettaa siirrettävää Raz-suihku-alusastiatuolia kaltevalle pinnalle, koska se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.

Vakaus taaksepäin

KÄYTTÄJÄ EI SAA ajaa Raz-SP-mallin tuolilla ylös kaltevaa pintaa ilman, että lisävarusteena saatavat takaosan kaatumisenestolaitteet ovat paikoillaan. Lisävarusteena saatavat kaatumisenestolaitteet on tilattava Raz-SP:n mukana ja asennettava oikein paikoilleen ennen epätasaisilla pinnoilla ajamista.

Kaatumisenestolaitteet - SP-malli



Kaatumisenestolaitteet ovat saatavissa lisävarusteena Raz-SP-suihku-alusastiatuoleihin. Näitä suositellaan aina kun tuolia käytetään epätasaisilla pinnoilla, kuten rampeilla tai kaltevilla lattioilla, kun tuolia käyttää alaraaja-amputoitu käyttäjä, kun takapyöriä on siirretty eteenpäin tehtaan asettamasta kohdasta, tai kaikissa tilanteissa, joissa taaksepäin vakaus vaarantuu.

Rampit ja muut kaltevat pinnat

Rampit ja muut pinnat, jotka eivät ole suoria (kuten kallistukset pyörätuolisuihkuissa) on hoitajan testattava sen varmistamiseksi, että ne eivät vaaranna tuolin vakautta. Tähän prosessiin on pyydettyä pätevän terveydenhuollon ammattilaisen apua.

ÄLÄ vedä tai työnnä Raz-AP:ta ylös tai alas kaltevaa pintaa tai ramppia, joka on jyrkempi kuin 1:12 suhde (5° kallistus).

ÄLÄ anna ketään käyttäjää liikuteltavan (vedettävän tai työnnettävän) Raz-AP-suihkutuolissa muutoin kuin hoitajan toimesta.

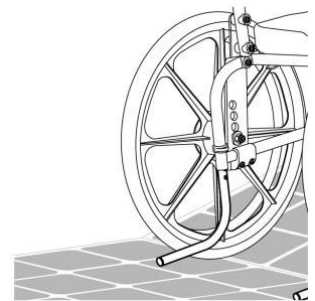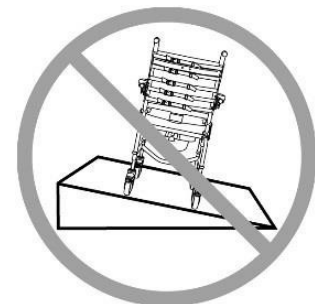

TÄRKEÄÄ!

RAZ-SP:N VAKAUTEEN TAAKSEPÄIN VAIKUTTAVAT TAKAPYÖRIEN ASENNUSPAIKKA, KÄYTTÄJÄN FYYSISET JA KLIINISET OMINAISUUDET JA SELKÄNOJAN KULMA. KAAUTUMISEN ESTOLAITTEIDEN TARVE ON MÄÄRITETTÄVÄ RAZ-SP-TUOLIA MÄÄRÄTTÄESSÄ, OTTAEN HUOMIOON KÄYTTÄJÄN FYYSISET KYVYT JA YMPÄRISTÖN. KAAUTUMISEN ESTOLAITTEET VOIDAAN TILATA JÄLKIASENNUKSENA MILLOIN TAHANSA, JOS HAVAITAAN NIIDEN OLEVAN TARPEELLISIA.

Upottaminen

Siirrettävää Raz-suihku-alusastiatuolia ei ole tarkoitettu käytettäväksi allastuolina. Älä upota suihkutuolia veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen kokonaan tai osittain. Upottaminen voi aiheuttaa suihkutuolin vaurioitumisen.



Kloorille altistuminen

Sopii käytettäväksi märillä alueilla, mutta ei uima-altaissa ja vastaavasti syövyttävissä ympäristöissä.

ÄLÄ säilytä laitetta uima-altaiden läheisyydessä, koska ilmassa oleva kloori voi aiheuttaa ruosteen muodostumista joihinkin tuolin ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin osiin.

Siirtymiset

Vaarallisin vaihe minkä tahansa suihkutuolin käytössä on siirtyminen. Koska jokaisella tuolilla on erilaiset vakausominaisuudet, on tärkeää käydä läpi ja testata siirtymistekniikat huolellisesti, jotta varmistetaan menettelyn turvallisuus. Testisiirrot on suoritettava sellaisen hoitajan toimesta, joka voi estää tuolin kaatumisen tai liikkumisen siirtymisen aikana. Jos tunnet, että siirtymisiä ei voida toistuvasti tehdä turvallisesti, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, joka tuntee siirtymistekniikat ja vaihtoehdot. Henkilöiden, jotka eivät tunne turvallisista siirtymistaitoja, on haettava apua siirtymisien aikana, ja käytettävä mahdollisesti mekaanista nostolaitetta.

Siirtyminen Raz-AP-suihkuoliin

AINA lukitse kaikki neljä pyörää ulospäin (etupyörät eteenpäin/) parhaan tuolin vakauden saavuttamiseksi.

Siirtyminen Raz-SP-suihkuoliin

Lukitse **AINA** molemmat etupyörät ulompaan asentoon (eteenpäin osoittamaan) ja kytke kokonaan molemmat pyörälukot niin, että ne kytkeytyvät tiukasti etupyöriin.



Pyörien lukot on tarkoitettu estämään itsekääntyvien pyörien kiertäminen. Pyörien kaksoislukot on suunniteltu estämään pyörien pyöriminen ja pyörähaarukoiden kiertäminen. Kääntyvien pyörien ja pyörien lukot **EIVÄT ESTÄ eivätkä VOI ESTÄÄ** suihkutuolia liukumasta/siirtymästä, jos lattia on liukas. Lattian liukkautta voi aiheuttaa pöly, vesi, saippua tai mikä tahansa aine, joka estää etu- tai takapyöriä tarttumasta laitaan turvallisesti.



Siirtymistä ei saa koskaan yrittää, jos suihkutuoli on liukkaalla


pinnalla. Suositellaan, että siirrot tehdään puhtailla, kuivilla ja luistamattomilla pinnoilla. Kovat lattiapinnat, kuten laatat, puu tai betoni

eivät ehkä tarjoa riittävää pitoa estämään lukittujen etu- ja/tai takapyörien liukuminen. Kokonaan matolla peitetty pinta on ihanteellinen. Huomaa, että rätti- ja suihkumatot voivat liukua lattioilla ja muodostaa näin vaarallisen pinnan.

ÄLÄ seiso millään osalla Raz-suihkutuolin runkoa.

ÄLÄ KOSKAAN käytä jalkalevyjä apuna siirtymisissä. Se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen. Jalkatuet on käännettävä sivulle tai poistettava kokonaan siirtymisen aikana, jotta suihkutuoliin on esteetön pääsy.

Siirrettävä Raz-suihku-alusastiatuoli **EI OLE** tarkoitettu kuljetuslaitteeksi tai pitkäaikaiseksi istuinjärjestelmäksi.

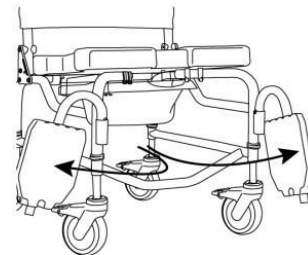

TÄRKEÄÄ!

KÄYTTÄJÄÄ EI SAA KOSKAAN JÄTTÄÄ RAZ-SUIHKUTUOLIIN ILMAN VALVONTAA.


TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ NOSTA RAZ-ALUSASTIASUIHKUTUOLIA JA SEN KÄYTTÄJÄÄ KÄSINOJISTA TAI JALKATUISTA!

TÄRKEÄÄ!

VARMISTA AINA, ETTÄ ISTUIN ON OIKEIN ASENNETTU JA KIINNITETTY ENNEN KUIN KÄYTTÄJÄ SIIRRETÄÄN TUOLIIN. ISTUIMEN TAKAKANNATTIMET ON KIINNITETTÄVÄ KOKONAAN ISTUIMEN TAKATUKIPUTKIEN ALLE. ISTUIMEN ETUKANNATTIMET ON LUKITTAVA TIUKASTI ISTUIMEN ETUTUKIPUTKIEN YMPÄRILLE. SEKÄ ISTUIMEN ETU- ETTÄ TAKAKANNATTIMET ON KIINNITETTÄVÄ PAIKALLEEN KIRISTÄMÄLLÄ 8 RUUVIA ISTUIMEN ALAPUOLELLA.

KÄYTTÄJÄLLE JA/TAI HOITAJILLE ON ANNETTAVA OHJEET ISTUIMEN ASIANMUKAISESTA IRROTTAMISESTA JA ASENTAMISESTA PUHDISTUSTA VARTEN.

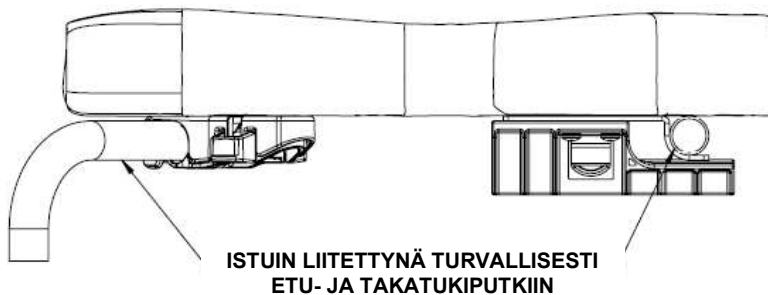

KÄYTTÖTARKOITUSILMOITUS

YKSILÖLLISESTI KONFIGUROITAVA, LIIKKUVA JA KIINTEÄ WC-TUOLI KÄYTETTÄVÄKSI SUIHKUSSA JA WC:SSÄ.

TÄRKEÄÄ!

KONSULTOI TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTA, JOS KÄYTTÄJÄNÄ KOKEET EPÄMUKAVUUTTA, LIIKKUVUUDEN MUUTOKSIA TAI VAIKEUKSIA LAITTEEN KÄYTÖSSÄ.

TÄRKEÄÄ!

RAZ-AP JA RAZ-SP ON TARKOITETTU SEURAAVAAN KÄYTTÖÖN:

- SUIHKUSSA KÄYMISEN/KYLPEMISEN, WC:SSÄ KÄYMISEN JA MUIDEN HENKILÖKOHTAISEN HYGIENIAN HOITOON LIITTYVIEN TOIMINTOJEN APUVÄLINEENÄ;
- KÄYTTÄJÄN KEHON TUKEMISEEN ISTUVASSA TAI KALLISTETUSSA ASENNOSSA;
- HOITAJAN AVUSTAMANA TAI ILMAN;
- TAVALLISEN WC-ISTUIMEN YLÄPUOLELLA TAI ALUSASTIAISTUIMEN ALUSASTIAN KERA;
- AINOASTAAN SISÄKÄYTTÖÖN;
- SEKÄ TYYPIN A KORKEAN KÄYTTÖASTEEN (esim. LAITOKSESSA) YMPÄRISTÖISSÄ ETTÄ KOTIYMPÄRISTÖISSÄ

RAZ-AP JA RAZ-SP EIVÄT SUORITA HOIDOLLISIA TAI DIAGNOSTISIA TOIMINTOJA, EIVÄTKÄ NE OLE TARKOITETTU MIHINKÄÄN HOIDOLLISIIN TAI DIAGNOSTISIIN TARKOITUKSIIN. KAIKKI RAZ-PERHEEN VALMISTAMAT TUOTTEET OVAT EI-STERIILEJÄ, UUDELLEENKÄYTETTÄVIÄ, EI-INVASIIVISIA JA EI-IMPLANTOITAVIA.

RAZ-AP JA RAZ-SP OVAT TARKOITETTU HENKILÖIDEN KÄYTTÖÖN, JOILLA ON LIIKKUMISRAJOITTEITA, JOILLA VOI OLLA VAIKEUKSIA SEISOA TAI SÄILYTTÄÄ TASAPAINO SUORITTAESSAAN TOIMINTOJA, KUTEN SUIHKUSSA KÄYNTI, WC:SSÄ KÄYNTI TAI HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA. TYYPILLISILLÄ KÄYTTÄJILLÄ ON RAJALLINEN KESTÄVYYS JA ASENNONHALLINTA, JA HE SAATTAVAT TARVITA APUA HOITAJALTA TOIMINNOISSA, KUTEN SUIHKUSSA KÄYNTI, WC:SSÄ KÄYNTI TAI HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA. TUOTTEISSA, JOISSA ON KALLISTUSTOIMINTO, KALLISTUSTOIMINNON KÄYTTÖ SAATTAA OLLA VASTA-AIHEINEN, JOS KÄYTTÄJÄ ON HERKKÄ LEIKKAUSVOIMILLE ISTUINPINNOILLA AVATTAESSA ISTUIN TAAKSEPÄIN.


TUOTTEEN MERKINNÄT JA TAI SYMBOLIT

TUOTTEEN NIMIKKEET	RAZ-AP / RAZ- SP
VALMISTAJAN OSOITE	 Raz Design Inc. 135 Railside Road Toronto, ON Canada M3A 1B7
VALTUUTETUN EDUSTAJAN TIETOJA	EC REP UKRP CH REP
TUOTTEEN KUVAUS	SN RAS-XXXXXX
UDI-DI	UDI AP: 628758001003 SP: 628758002000
LÄÄKINNÄLLINEN LAITE	MD
EUROOPPALAINEN VAATIMUSTENMUKAISUUS	
VALMISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ	
KÄYTTÄJÄN ENIMMÄISPAINO	
LUE KÄYTTÖOPAS	

ISTUIMEN ETUKANNAKKEEN ASENNUS (JOS KÄYTÖSSÄ)



TORONTO, KANADA

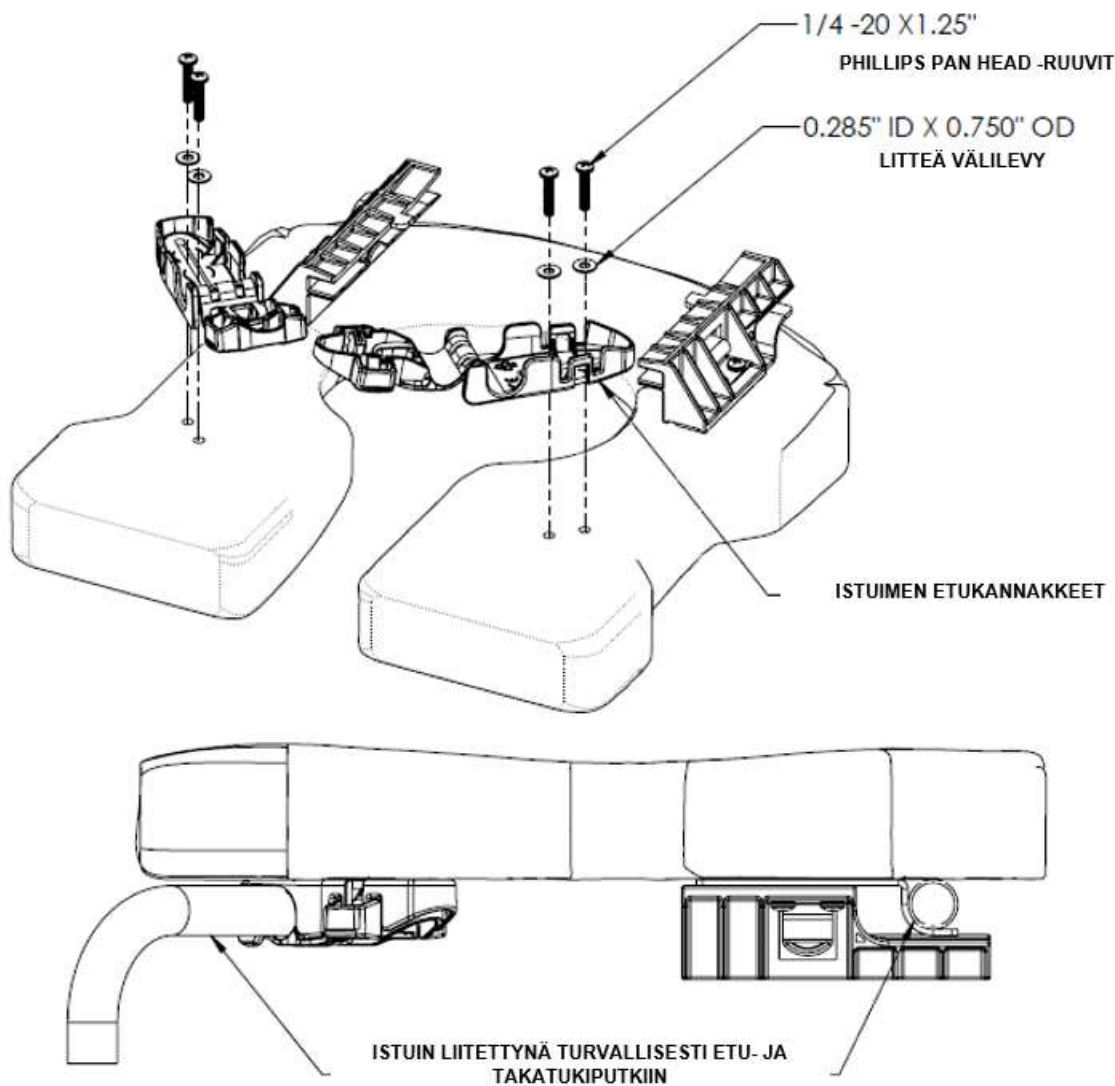

Katso yllä olevasta kuvasta asennusohjeet.

Huom.: Asenna Phillips Pan Head -ruuvit käsin. Sähkötyökalujen käyttö voi aiheuttaa kannakkeiden muodonmuutoksen.

Varmista asennuksen jälkeen, että kannakkeet on kunnolla kiinnitetty istuimeen. Avaa ja sulje kannakkeet tarkistaaksesi niiden toimivuuden.


Varmista aina, että istuin on oikein asennettu ja kiinnitetty. Takakoukkujen on oltava täysin kytkettyjä ja etukannattimien on oltava salvattuja ja lukittuja istuimen etutukiputkien ympärille.

KÄYTTÄJÄN JA JÄLLEENMYYJÄN OHJE SISÄLLYSLUETTELO

1.0 YLEISIÄ TIETOJA	10
1.1 Siirrettävän Raz-AP/SP-suihku-alusastiatuolin yleiskuvaus	10
1.2 Siirrettävän Raz-AP/SP-suihku-alusastiatuolin tekniset tiedot	10
2.0 VALMISTELU: TARKOITETTU VAIN JÄLLEENMYYJÄN KÄYTTÖÖN.....	11
2.1 Selkänojan	11
2.1.1 Selkänojan asennus – SP-malli	11
2.1.2 Selkänojan asennus – AP-malli	12
2.1.3 Selkänojan kulman säätö.....	12
2.1.4 Säädetävän selkäpehmusteen säätö	12
2.2 Pyörien	13
2.2.1 Pyörien asennus	13
2.2.2 Istuimen korkeuden säätö – AP- ja SP-etupyörät.....	13
2.3 Takapyörät – SP-malli.....	14
2.3.1 Pyörien asennus vakiomallisella akselipultilla – SP-malli	14
2.3.2 Istuimen korkeuden säätö – Raz-Sp:n takapyörät.....	14
2.3.3 Takapyörien eteen/taaksesäätö – SP-malli	14
2.4 Pyörien lukkojen säätö – SP-malli	15
2.5 Käsinojen säätö – vain Adjusta-Back-vaihtoehto	15
2.5.1 Käsinojan korkeuden säätö.....	15
2.5.2 Käsinojan kulman säätö.....	15
2.6 Raz-istuimen	16
2.6.1 Raz-istuimen asennus	16
2.6.2 Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) – Säättäminen	16
2.7 Säädetävän jalkatuen	17
2.8 VAIN JÄLLEENMYYJÄN KÄYTTÖÖN - Kiinnikkeen asennus	17
3.0 KÄYTTÖ JA TOIMINTA	18
3.1 Taitettavat Käsituet.....	18
3.2 Säädetävä selkäpehmuste	18
3.3 Raz-Istuimen	18
3.4 Säädetävät jalkatuet.....	19
3.5 Pyörien lukot – Raz-SP	19
3.6 Alusastia.....	20
3.7 Kääntyvät pyörät	20
4.0 PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO.....	21
4.1 Puhdistus jokaisen käytön jälkeen	21
4.1.1 Alusastia.....	21
4.1.2 Istuin.....	21
4.2 Puhdistus tarvittaessa	21
4.2.1 Säädetävä selkäpehmuste	21
4.2.2 Runko, käsinojat, säädetävät jalkatuet ja muut osat	21
4.3 Suositellut puhdistustuotteet.....	21
5.0 VAARATILANTEIDEN ILMOITTAMINEN.....	22
6.0 RAJOITETTU TAKUU	22
7.0 YHTEYSTIEDOT	23

1.0 YLEISIÄ TIETOJA

1.1 Siirrettävän Raz-AP/SP-suihku-alusastiatuolin yleiskuvaus

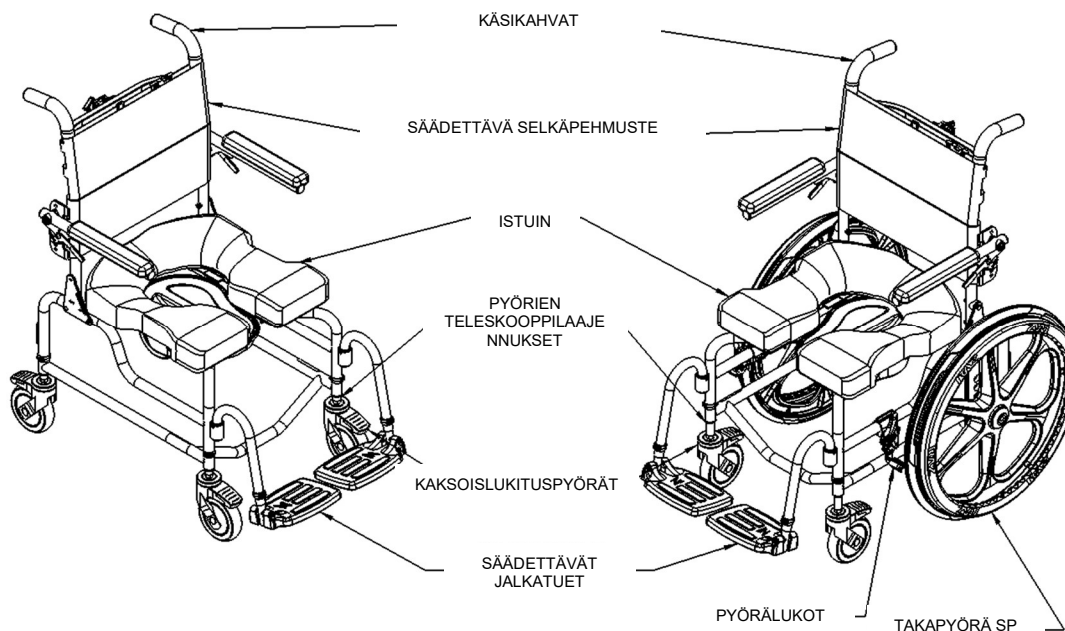

1.2 Siirrettävän Raz-AP/SP-suihku-alusastiatuolin tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT	Raz-AP	Raz-SP (22" pyörät)	Raz-SP (24" pyörät)
PAINOKAPASITEETTI	185 kg (407 lbs)	185 kg (407 lbs)	185 kg (407 lbs)
RUNGON PAINO (istuin ja takarunko)	46 cm (18")	46 cm (18")	46 cm (18")
KOKONAISLEVEYS	58 cm (22,75")	65 cm (25,5")	65 cm (25,5")
KOKONAISPITUUS (sis. jalkatuot)	86 cm (34")	100 cm (39,5")	103 cm (40,5")
ISTUIMEN LEVEYS (alusastia-istuin)	46 cm (18")	46 cm (18")	46 cm (18")
ISTUIMEN SYVYYS (takatolpan edestä istuimen etureunaan)	43 tai 51cm (17" tai 21")	43 tai 51cm (17" tai 21")	43 tai 51cm (17" tai 21")
VAPAA LEVEYS	41 cm (16")	41 cm (16")	41 cm (16")
VAPAA KORKEUS alusastiakannattimilla:	39-49 cm (15,25"-19,25")	39-49 cm (15,25"-19,25")	39-46 cm (15,25"-18,25")
VAPAA KORKEUS ilman alusastiakannattimia:	41-51 cm (16"-20")	41-46, 51 cm (16"-18",20")	41-48 cm (16"-19")
KÄSINOJAN KORKEUS ISTUIMEN ISTUIN (17" Adjusta-Back)	17-24cm 1,25cm:n välein (6,5"-9,5") ½ välein	17-24cm 1,25cm:n välein (6,5"-9,5") ½ välein	17-24cm 1,25cm:n välein (6,5"-9,5") ½ välein
KORKEUS LATTIASTA ISTUIMELLE	51-61cm 2,5cm:n välein (20"-24") 1" välein	51-56, 61 cm (20"-22", 24") 2,5cm (1") :n välein	51-61cm 2,5cm:n välein (20"-24") 1" välein
TUOTTEEN PAINO (sis. jalkatuot)	17 kg (38 lbs)	21 kg (47 lbs)	22 kg (49 lbs)
KEHYKSEN JA RUNKO-OSIEN MATERIAALI	Ruostumaton teräs (Elinikäinen takuu ruostumista vastaan)		
PIENIN KÄÄNTÖYMPYRÄ	93 cm (36,75")	152 cm (60")	152 cm (60")

2.0 VALMISTELU: TARKOITETTU VAIN JÄLLEENMYYJÄN KÄYTTÖÖN

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Jos kierteet eivät ole voideltuja, voi tapahtua kiinnittimien kylmähitsausta.

- Levitä voiteluainetta (nestemäinen pesuaine, saippua, huulirasva, vaha jne.) kierteisiin ennen kiinnittimien kiristämistä sitovuuden vähentämiseksi.
- Älä ylikiristä kiinnittimiä.

TÄRKEÄÄ!

SÄÄTÖJÄ EI SAA KOSKAAN TEHDÄ, KUN KÄYTTÄJÄ ISTUU TUOLISSA.

2.1 Selkänojan

2.1.1 Selkänojan asennus – SP-malli

Tarvittavat työkalut: (x2) 7/16" kiintoavaimet

1. Poista suihkutuoli kuljetuspakkauksesta.
2. Sijoita kansivälilevy molempien selkänojan runkoputkien ulkopuolelle. Kohdista välikappale rungon alaosaan olevaan reikään.
3. Nosta selkänoja pystysuoraan asentoon, jotta kansivälilevyt jäävät selkänojan asennuslevyjen ja selkänojan kehysputkien väliin.

VIHJE: Yhden henkilön kootessa, aseta yksi kansivälilevy selkänojan putkelle juuri selkänojan rungon kääntöpisteen alapuolelle, nosta selkänojaa osittain ylöspäin kiinnittääksesi se paikoilleen, ja aseta sitten toinen kansivälilevy toiselle selkänojan putkelle, ja nosta selkänoja pystyasentoon.


4. Aseta kuusiokantaruuvi läpi yhdestä selkänojalevyn kolmesta reiästä, ja vedä se kansivälilevyn ja runkoputken läpi.

HUOM.: Valitse takimmainen reikä 90° kulmalle, tai etummainen reikä 97° selkänojakulmalle.


VIHJE: Phillips-ruuvitaltta voidaan asettaa yhden levyn ja rungon läpi selkänojan kiinnittämiseksi tilapäisesti pystysuoraan asentoon.

5. Kiinnitä kaareva aluslevy ja lukkomutteri alla esitetyn mukaisesti.
6. Kiristä rakenne kiintoavaimet, kunnes ruuvien pää ulottuu 1–2 kierrettä nailonlukkomutterin ohi.
7. Toista vaiheet 4–6 toiselle kehysputkelle.

HUOM.: Voitele kiinnikkeet uudelleen ennen kiristämistä.

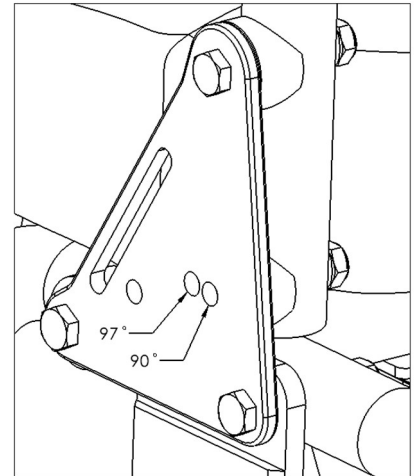

TAKASELKÄNOJAN RAKENNE YLHÄÄLTÄ NÄHTYNÄ

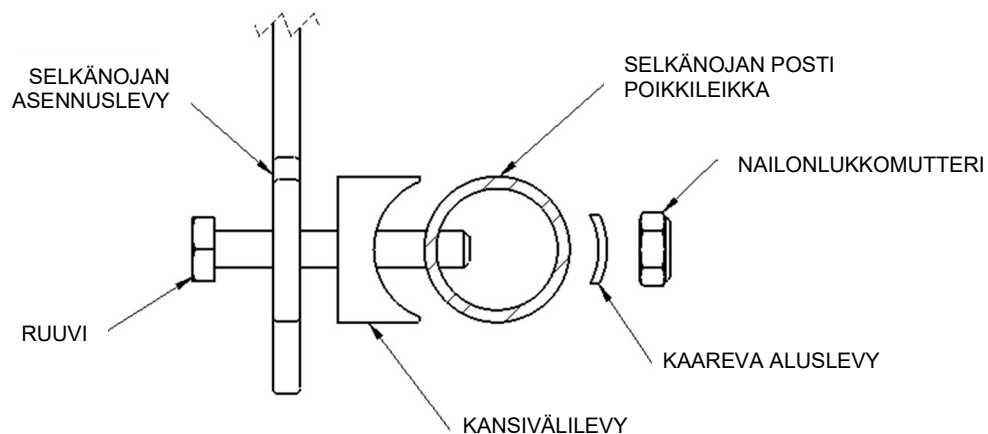

2.1.2 Selkänojan asennus – AP-malli

Tarvittavat työkalut: 5/32" kuusioavain, 7/16" kiintoavain


1. Poista suihkutuoli kuljetuspakkauksesta.
2. Nosta selkänoja pystysuoraan asentoon kohdistaksesi reiät.
3. Aseta nuppipääruuvi läpi yhdestä selkänojalevyn kahdesta reiästä, ja vedä se runkoputken läpi.

HUOM.: Valitse takimmainen reikä 90° kulmalle tai etummainen reikä 97° selkänojakulmalle.


VIHJE: Phillips-ruuvitaltta voidaan asettaa yhden levyn ja rungon läpi selkänojan kiinnittämiseksi tilapäisesti pystysuoraan asentoon.

4. Kiinnitä kaareva aluslevy ja lukkomutteri alla esitetyn mukaisesti.
5. Kiristä rakenne kuusioavaimella ja kiintoavaimella, kunnes ruuvien pää ulottuu 1–2 kierrettä nailonlukkomutterin ohi.
6. Toista vaiheet 3–5 toiselle kehysputkelle.

Huom.: Voitele kiinnikkeet uudelleen ennen kiristämistä.

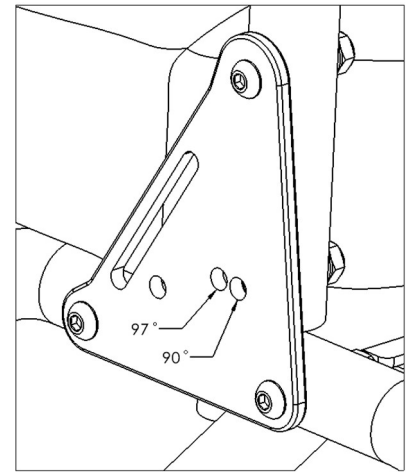

TAKASELKÄNOJAN RAKENNE YLHÄÄLTÄ NÄHTYNÄ

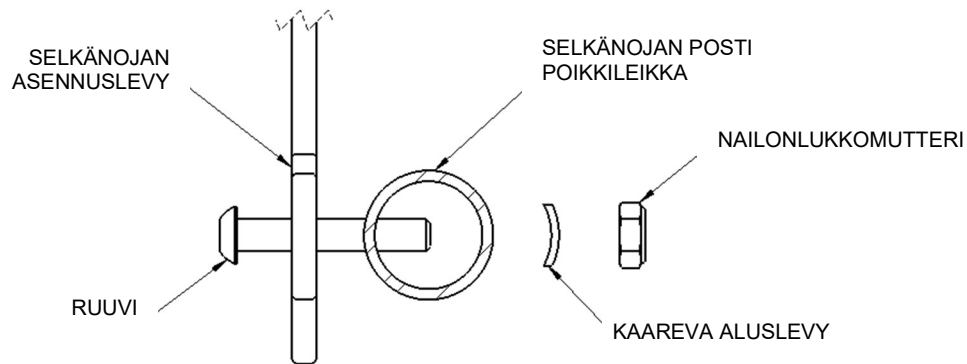


2.1.3 Selkänojan kulman säätö

Tarvittavat työkalut: AP-mallit 5/32" kuusioavain, 7/16" kiintoavain;
SP-mallit (x2) 7/16" kiintoavaimet

1. Löysää (älä irrota) lukkomutterit, välilevyt ja kansivälilevyt (SP-mallit) molemmista selkänojan pystyrunkoputkista.
2. Poista alemmat ruuvit ja välilevyt pystysuorista selkänojan rungon putkista.
3. Jättäen sisemmät kansivälilevyt paikoilleen (SP-mallit) kierrä selkänoja johonkin kahdesta selkänojan asennuslevyjen kohdasta.


HUOM.: Valitse takimmainen reikä 90° kulmalle tai etummainen reikä 97° selkänojakulmalle.

4. Selkänojan ollessa paikoillaan aseta ruuvit takaisin valittujen selkänojan asennuslevyn reikien läpi.
5. Kiinnitä ruuvit kaarevilla aluslevyillä ja lukkomuttereilla.
6. Kiristä kokoonpano työkaluilla.

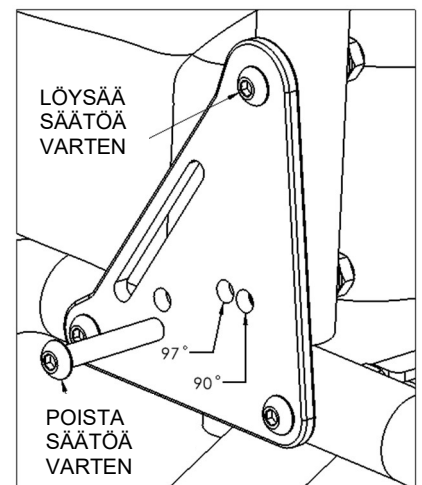

2.1.4 Säädetävän selkäpehmusteen säätö

Selkätuen verhoilun säätämiseksi jokaista hihnaa voidaan kiristää tai löysätä, mikä mahdollistaa monet eri asennot. Esimerkiksi alhaalta lukien toinen ja kolmas hihna voidaan kiristää, jotta syntyy parempi tuki lantion alueelle.

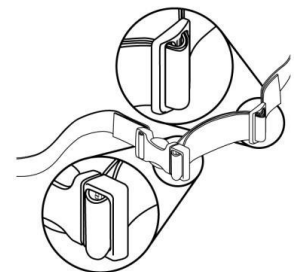

2.2 Pyörien

TÄRKEÄÄ!

KAIKKI PYÖRIEN VARRET ON SÄADETTÄVÄ SAMALLE KORKEUDELLE. ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ MUUTTA RUNGON KULMAA MUUTTAMALLA PYÖRIEN ASENTOA. EPÄTASAISET PYÖRIEN ASENNOT HEIKENTÄVÄT TUOLIN VAKAUTTA, JA VOIVAT JOHTAA KAATUMISEEN.

2.2.1 Pyörien asennus

1. Poista pyörät tarvikelaatikosta.
2. Aseta pyörien laajennusputki alarungon vastaputkeen haluttuun asentoon.
3. Kohdista reikä runkoon ja pyörien laajennusputkeen. Voi olla tarpeen kiertää pyörien laajennusputkea, jotta reiät osuvat kohdakkain.


VIHJE: Tämä on helpompaa, jos lukitset pyörät ensin.

4. Aseta napsautusnasta runkoputken ja pyörien laajennusputken läpi. Varmista, että nastat ovat kokonaan putken läpi, ja että vihreä muovikliipsi napsahtaa tiukasti runkoputkien ulkopuolelle.
5. Toista vaiheet 2–4 kaikille rakenteen pyörille.

HUOM.: Jos AP-tuolin mukana tilattiin pyörien suunnan lukitus, yhdessä neljästä pyörästä on lukko asennettuna pyörän varteen.

Pyörät, joissa on suunnan lukitus, on asennettava eteenpäin suunnattuina johonkin takapyörien kohdista.

HUOM.: Pyörä on asennettava reikiin, jotka vastaavat haluttua istuimen ja pyörän korkeutta niin, että tuolin runko on suorassa.

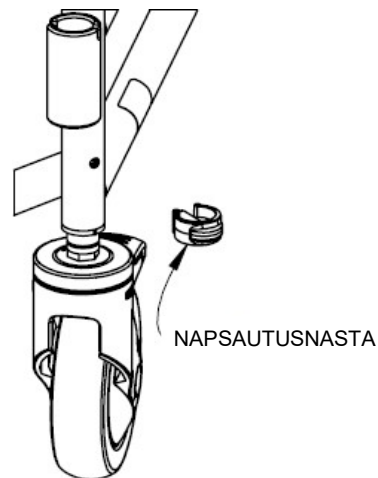

Tehdasasetus - Pyörien laajennusasetus SP-mallille	
22" Takapyörä	Alin reikä pyörien laajennusputkessa
24" Takapyörä	Toiseksi alin reikä pyörien laajennusputkessa

2.2.2 Istuimen korkeuden säätö – AP- ja SP-etupyörät

Raz-AP-mallissa on neljä pyörien teleskooppilaajennusta, jotka mahdollistavat 10 cm (4") korkeussäädön. SP-mallissa on kaksi etupyörien jatketta, jotka mahdollistavat 7,5cm (3") korkeussäätöalueen, kun niitä käytetään 24" takapyörien kanssa, ja 10cm (4") korkeussäätöalueen 22" takapyörillä.

1. Poista pyörän jatketta paikallaan pitävä napsautusnasta tuolin rungosta.
2. Liu'uta pyörärakenne haluttuun kohtaan.
3. Kohdista pyörän jatkoputken reiät rungon reikiin, ja asenna napsautusnastat.

VIHJE: Tämä on helpompaa, jos lukitset pyörät.

4. Varmista, että nastat menevät kokonaan runkoputken läpi, ja että vihreät muovikliipsit napsahtavat tiukasti runkoputkien ympärille.
5. Toista vaiheet 1–4 kaikille muille rakenteen pyörille.

TÄRKEÄÄ!

MITÄ KORKEAMMAKSI TUOLI SÄADETÄÄN, SITÄ AREMPI SE ON KAATUMISELLE. PYÖRIÄ EI KOSKAAN SAA SÄÄTÄÄ ERI KORKEUDELLE. EPÄTASAINEN TUOLI ON ERITTÄIN VAARALLINEN KAIKILLE KÄYTTÄJILLE.


PYÖRÄT ON AINA ASENNETTAVA MAHDOLLISIMMAN MATALAAN ASENTOON, JOKA TÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN TARPEET. KAIKKI TÄMÄN YLÄPUOLISET ASENNOT AIHEUTTAVAT MASSAKESKIPISTEEN SIIRTYMISEN, JOSTA VOI SEURATA LOUKKAANTUMINEN TAI TUOTEVAHINKOJA. SUOSITELLAAN, ETTÄ PÄTEVÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAINEN AUTTAA JA A TARKISTAA TUOLIN TASAPAINON, JOS KORKEUSSÄÄTÖÄ MUUTETAAN.

2.3 Takapyörät – SP-malli

2.3.1 Pyörien asennus vakiomallisella akselipultilla – SP-malli

Tarvittavat työkalut: 3/4" kiintoavain, 3/4" hylsyavain


1. Poista molemmat pyörät pakkausmateriaalista.
2. Poista akselitapit ja nailonlukkomutterit pakkausmateriaalista.
3. Poista pyörän keskiö.
4. Aseta akselitappi pyörän navan läpi ja siitä akselin vastakappaleeseen.
5. Kierrä nailonlukkomutteri akselitappiin, ja kiristä sitä, kunnes pyörärakenne on tiukasti kiinni. *Älä ylikiristä, koska pyörän on pyörittävä vapaasti.*
6. Aseta napa takaisin.
7. Toista vaiheet 3–6 toiselle pyörälle.

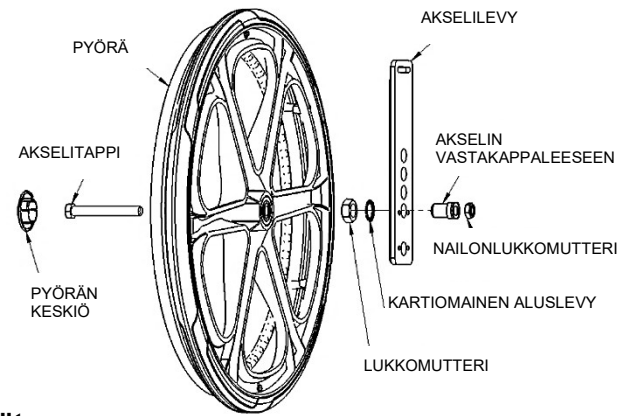

2.3.2 Istuimen korkeuden säätö – Raz-Sp:n takapyörät

Tarvittavat työkalut: 3/4" hylsyavain, 3/4" kiintoavain, 1" kiintoavain, 1 1/8" kiintoavain

1. Poista pyörän keskiö.
 2. Poista akselitappi ja pyörärakenne akselin vastaanottavasta osasta alusastian kehyksessä.
 3. Poista akselin vastaanottava osa akselilevystä.
 4. Aseta akselin vastaanottava osa haluttuun reikään.
- HUOM.: Katso oikealla olevasta kuvasta mahdolliset istuimen etäisyydet lattiasta.**
5. Aseta halkaistu välilevy ja lukkomutteri akselin vastakappaleeseen.
 6. Aseta akseli ja pyörärakenne akselin vastakappaleeseen ja kiristä nailonlukkomutteria, kunnes pyörärakenne on tukevasti kiinni. *Älä ylikiristä, koska pyörän on pyörittävä vapaasti.*
 7. Aseta napa takaisin.
 8. Säädä pyörien lukot.
 9. Toista vaiheet 1–8 toiselle pyörälle. Vedä molempia pyöriä varmistaaksesi, että ne ovat tiukasti paikoillaan.

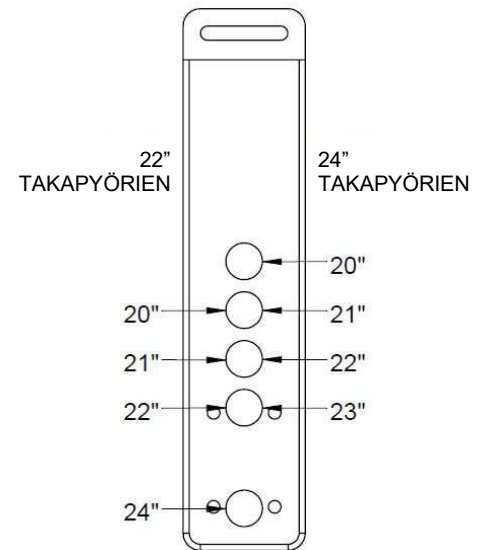

2.3.3 Takapyörien eteen/taaksesäätö – SP-malli


22" Ja 24" pyörillä on 15cm (6") etu/takasäätöalue.

Tarvittavat työkalut: 3/4" hylsyavain, 3/4" kiintoavain, (2) 7/16" kiintoavaimet, 5mm kuusioavain

1. Löysää pyörien lukkoja.
2. Poista yhden pyörän keskiö. Löysää ja poista akselitappi ja lukkomutteri, ja ota pyörärakenne pois.

VIHJE: Tuolin kääntäminen toiselle sivulle helpottaa tätä toimenpidettä.

3. Pyörän ollessa irrotettuna löysää (älä irrota) alempi takapuolen nuppipääruuvi selkänojan asennuslevystä.
4. Löysää (älä irrota) alemman akselilevyn kiinnitysruuveja.
5. Säädä akselilevy huomioiden sen tarkan aseman asettamisen peilikuvaksi toisen pyörän akselilevyyn.
6. Kiristä kiinnitysruuvit akselilevyn alaosaan ja nuppipääruuvi selkänojan asennuslevystä.
7. Aseta takaisin pyörä, akselitappi ja lukkomutteri.
8. Kiristä akselitappia ja lukkomutteria, kunnes ne ovat tiukalla.
9. Aseta napa takaisin.
10. Toista vaiheet 1–9 toiselle pyörälle. Noudata erityistä tarkkuutta kohdistaaksesi pyörät oikein.
11. Säädä pyörän lukot uudelleen.

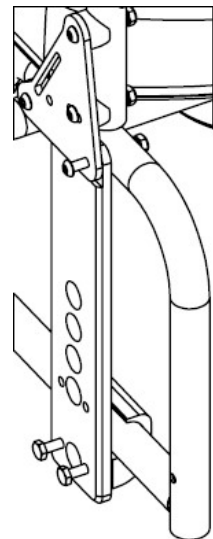

TÄRKEÄÄ!

ISTUIMEN KORKEUDEN KASVATTAMINEN, TAKAPYÖRIEN SIIRTÄMINEN ETEENPÄIN JA SELKÄNOJAN KULMAN SUURENTAMINEN HEIKENTÄVÄT HUOMATTAVASTI VAKAUTTA TAAKSEPÄIN. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VAKAUSTARKISTUS SUORITETAAN, KUN JOKIN NÄISTÄ SÄÄDÖISTÄ ON TEHTY. VAKAUSTARKISTUKSET ON TEHTÄVÄ HOITAJA TUOLIN TAKANA JA KAAATUMISEN ESTOLAITTEET OIKEIN ASENNETTUINA JA SÄÄDETTYINÄ.

2.4 Pyörien lukkojen säätö – SP-malli

Raz-pyöränlukoissa on ainutlaatuinen kääntyvä jarrukenkä, joka painuu renkaaseen yhä syvemmälle pyörän pyörimisvoiman kasvaessa. Tämän ansiosta lukko kytkeytyy pienemmällä voimalla kuin perinteiset pyöränlukot.

Tarvittava työkalu: 5 mm kuusioavain


1. Löysää (älä irrota) kaksi kiinnitysruuvia.
2. Kytke pyöränlukko päälle työntämällä kahva pois päin pyörästä.
3. Liu'uta sitä pyörää kohti, kunnes kenkä koskettaa rengasta.
4. Kytke pyöränlukko pois ja liu'uta sitä 10 mm pyörää kohti.
5. Kiristä kiinnitysruuvit ja testaa pyöränlukko. Säädä tarvittaessa pyöränlukkoa edelleen sen asennon hienosäätöä varten.

Testaa pyöränlukko pyörittämällä pyörää varmistaaksesi, että kenkä

pyörii ja uppoaa renkaaseen riittävällä voimalla estääkseen pyörän pyörimisen.

ÄLÄ säädä niin, että kenkä uppoaa renkaaseen tavanomaisille pyöränlukoille tarpeellisella voimalla.

6. Toista vaiheet 1–5 toiselle puolelle.

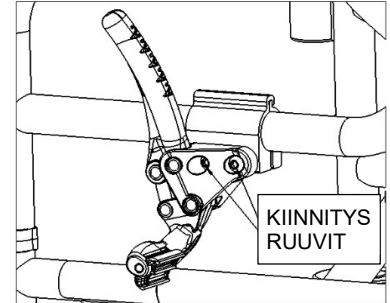

2.5 Käsinojen säätö – vain Adjusta-Back-vaihtoehto

Tarvittavat työkalut vaihtelevat laitteiston mukaan, varmista, että oikeat työkalut on valittu turvallista asennusta varten. Kehys, jossa on tunnistereikä, on metrinen.

- Keisarillinen-laitteistolle: 7/32" kuusioavain, 9/16" kiintoavain;
- Metrinen-laitteistolle: 5 mm kuusioavain, 13 mm kiintoavain.

2.5.1 Käsinojan korkeuden säätö



Käsinojat ovat säädettävissä 7,5cm (3") alueella ½" välein **vain Adjusta-Back-vaihtoehdossa**.

1. Löysää ja irrota alempi lukkomutteri.
2. Löysää ja irrota ylempi lukkomutteri.
3. Pitäen käsinoja ja käsinojen kääntölevyrakennetta yhdessä, siirrä yksikköä ylöspäin tai alaspäin käsinojan tukikiinnityksessä käyttäjän tarpeen mukaisesti.
4. Aseta yläruuvin lukkomutteri paikoilleen.
5. Aseta alaruuvin lukkomutteri paikoilleen.
6. Kiristä ruuvit ja lukkomutterit ylhäältä ja alhaalta.
7. Toista vaiheet 1–6 toiselle käsinojalle.

2.5.2 Käsinojan kulman säätö

Käsinojen kulmaa voidaan säätää 5° ylöspäin tai 5° alaspäin, jos selkänojan kulmaa säädetään 90° tehdasasetuksesta.


1. Löysää ja poista ruuvit, välilevyt ja lukkomutterit käsinojan kääntölevyn alaosaan.
2. Pitäen yläruuvia paikoillaan, kierrä käsinojarakennetta kunnes haluttu asento savutetaan, kohdistuen yksi kolmesta (kolmion muotoon järjestetystä) käsivarren taittolevyn reiästä kohdistettuna käsinojan tukikiinnityksen reikiin.
3. Aseta ruuvi haluttuun käsinojan taittolevyn kohtaan, ja kiinnitä lukkomutteri.
4. Kiristä ruuvi ja lukkomutteri.
5. Toista vaiheet 1–4 toiselle käsinojalle.

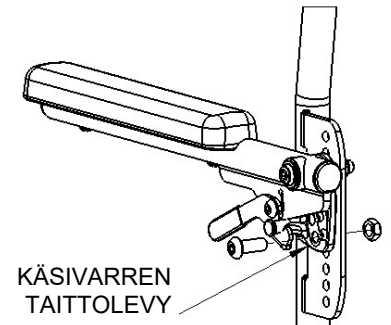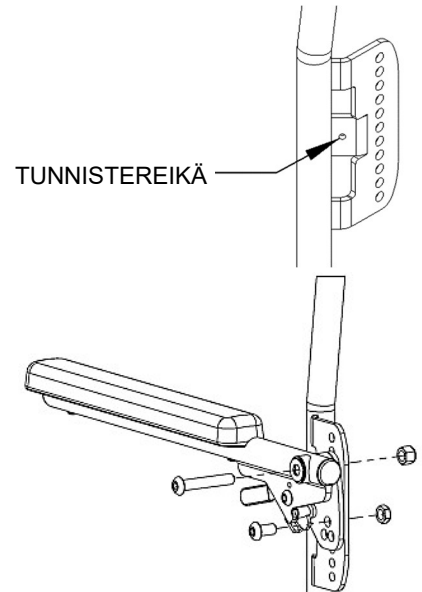

2.6 Raz-istuimen

2.6.1 Raz-istuimen asennus

1. Varmista, että etukannattimet ovat auki-asennossa. Avaa etukannattimet puristamalla kielekkeitä tai kannattimen saranoitua osaa.
2. Liu'uta istuimen takaosa yli takaosan ristiputkien samalla kun istuimen etuosa lasketaan kehykselle. Tarkista varmistaaksesi, että istuimen takaosan kannattimet tarttuvat ristiputkien alapuolelle.
3. Jatka istuimen etuosan laskua, kunnes istuimen etukannattimet asettuvat istuimen etupuolen tukiputkiin.
4. Varmista istuimen kiinnitys sulkemalla istuimen etukannattimet. Sulkeaksesi istuimen etukannattimen napsauta kiinnike sen toiseen puolikkaaseen etupuolen tukiputkien ympärillä.
5. Tee vaiheet 1–4 käänteisessä järjestyksessä irrottaaksesi istuimen rungosta.

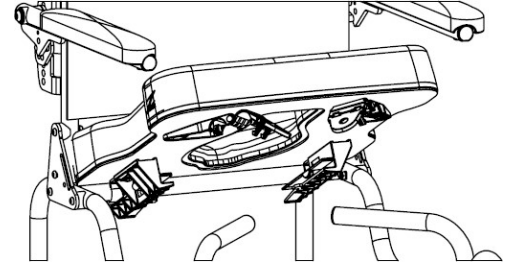

2.6.2 Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) – Säättäminen

Istuimessa on noin 5 cm (2") etu-/takasuuntainen säätövara, joka mahdollistaa istuimen aukon optimaalisen sijoittamisen käyttäjän istuinluiden ympärille.


Tarvittava työkalu: #2 Phillips-ruuvitaltta

1. Vapauta istuin avaamalla istuimen etuosan kannattimet.
2. Nosta istuimen etuosaa, vedä ylöspäin ja sitten eteenpäin irrottaaksesi istuimen tuolista.
3. Löysää (mutta älä irrota) kahdeksan ruuvia, jotka liittävät istuimen etu- ja takakannattimet istuimen alapuoleen.

Huom.: Istuimen takakannattimet on esitetty alla ilman alusastian kannattimia selkeyden vuoksi.

4. Aseta istuin takaisin paikoilleen runkoon ja sulje istuimen etukannattimet etutukiputkien ympärille.
5. Liu'uta/kääntelee istuin haluttuun asentoon.
6. Tarkista, että istuimen takakannattimet ovat tiukasti sijoitettu takatukiputkea vasten.
7. Kiristä kaikki kahdeksan ruuvia, jotka kiinnittävät istuimen etu- ja takakannattimet istuimeen estääksesi istuimen liikkumisen.

Huom.: Varmista, että istuimen etu- ja takakannattimet on tiukasti lukittu istuimen etu- ja takatukiputkien ympärille ennen käyttäjän siirtymistä tuoliin.

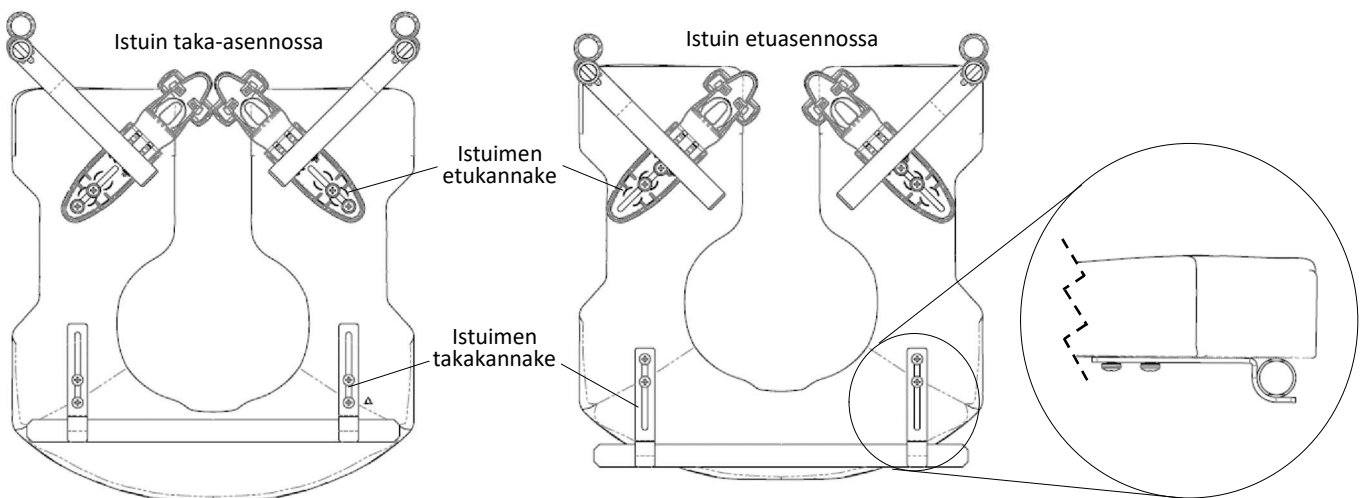


2.7 Säädetävän jalkatuen

2.7.1 Säädetävän jalkatuen asennus

1. Poista jalkatuet pakkauksen sisällä olevasta varustelaatikosta.
2. Aseta jalkatuen ripustusputket vastakappaleisiin, jotka on hitsattu tuolin rungon etuosaan. *Jos tukiputket on suunnattu eteenpäin, putkien tapit osuvat vastakappaleiden uriin ja lukittuvat paikoilleen.*


2.7.2 Säädetävän jalkatuen säätö

1. Poista muovinen napsautusnasta yhdestä jalkatuen ripustusputkesta.
2. Sääda jalkalevyn laajennusputki pystysuoraan sopivaan korkeuteen jalkatuen ripustusputken sisällä.
3. Aseta napsautusnasta jalkatuen ripustusputken ja jatkoputken läpi. Varmista, että napsautusnastat ovat kokonaan putken läpi, ja että vihreä muoviklipsi napsahtaa tiukasti ripustusputkien ulkopuolelle.
4. Toista vaiheet 1–3 toiselle jalkalevylle.

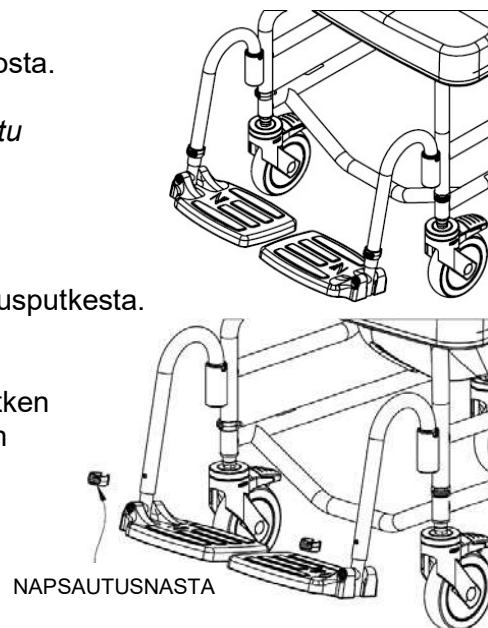

2.8 VAIN JÄLLEENMYYJÄN KÄYTTÖÖN - Kiinnikkeen asennus


Kaikki kiinnitykset on asennettava tiukasti. Lukkomutterit, jotka poistetaan jostain syystä, saattaa olla tarpeen vaihtaa uudelleenkäytön sijaan. Tarkista nailonlukkومutterien toiminta, kun kiinnität ruuvia takaisin paikoilleen. Kiristettäessä on oltava havaittavissa huomattava vastus. Jos sitä ei ole, vaihda nailonlukkومutteri uuteen. Suositellaan tarkistamaan kaikkien kiinnitysten tiukkuus vuosittain.

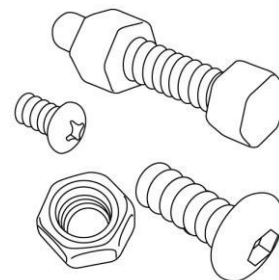

3.0 KÄYTTÖ JA TOIMINTA

3.1 Taitettavat Käsituet

Adjusta-Back-selkänojan kulmaa voidaan säätää ja siinä on käsituet, joiden korkeutta ja kulmaa voidaan säätää. Jos lisävarusteena saatavat käsitukilukot ovat mukana, ne lukittuvat automaattisesti alas käännettäessä.

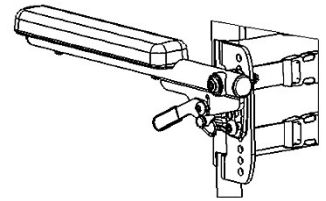


3.2 Säädetty selkäpehmuste

Adjusta-Back-selkätuissa on säädettävä selkäpehmuste, joka tukee vartaloa parhaassa asennossa ja mukavimmalla mahdollisella tavalla. Selkäpehmuste on irrotettava konepesua varten, ja se on saatavana 15" (4 hihnaa), 17" (5 hihnaa), 20" (6 hihnaa) ja 24" (7 hihnaa) pituisina tuolille valitun selkänojan pituuden mukaisesti.


Asentaaksesi säädettävän selkäpehmusteen 17" korkeaan Adjusta-Back-tukeen:

1. Aseta kangas selkätuen tankojen etupuolta vasten varmistaen, että kun se kiedotaan ympäri, hihnojen kiinnikkeet osoittavat kankaasta pois päin ja silmukat osoittavat alaspäin.
2. Ylin hihna (1) on poikkituen yläpuolella.
3. Toinen (2) ja kolmas (3) hihna on sijoitettu ristitankojen ja selkänojan kiinnityslevyjen väliin. 15" korkeassa selkätuessa on vain yksi hihna tässä kohdassa.
4. Neljäs (4) ja viides (5) hihna asetetaan käsinojen asennuslevyjen aukkojen läpi.
5. 20" (51cm) Pitkässä selkätuessa on kuudes hihna, joka sijaitsee käsitukien asennuslevyjen alapuolella.
6. Säädä kaikki hihnät käyttäjän tarpeen mukaisesti.

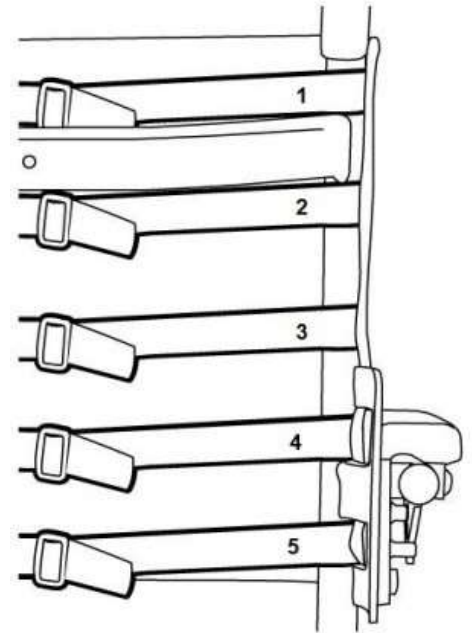

HUOM.: 24" (61cm) Adjusta-Back -tuessa kaksi ylintä hihnaa on oltava selkätuen poikkituen yläpuolella. Muut viisi hihnaa ovat samalla korkeudella kuin 20" (51cm) Adjusta-Back-tuessa.

Selkätuen verhoilun säätämiseksi jokaista hihnaa voidaan kiristää tai löysätä, mikä mahdollistaa monet eri asennot. Esimerkiksi alhaalta lukien toinen ja kolmas hihna voidaan kiristää, jotta syntyy parempi tuki lantion alueelle.

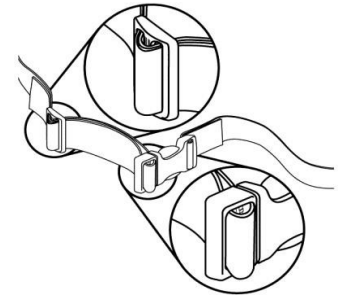


Säädettävän selkäpehmusteen irrottamiseksi avaa hihnojen soljet.

3.3 Raz-Istuimen

Asentaaksesi Raz-istuin:

1. Varmista, että etukannattimet ovat auki-asennossa. Avataksesi etukannattimet, purista ne auki.
2. Liu'uta istuimen takaosa yli takaosan ristiputkien samalla kun istuimen etuosa lasketaan kehykselle. Tarkista varmistaaksesi, että istuimen takaosan kannattimet tarttuvat ristiputkien alapuolelle.
3. Jatka istuimen etuosan laskua, kunnes istuimen etukannattimet asettuvat istuimen etupuolen tukiputkiin.
4. Varmista istuimen kiinnitys sulkemalla istuimen etukannattimet. Sulkeaksesi istuimen etukannattimen napsauta kiinnike sen toiseen puolikkaaseen etupuolen tukiputkien ympärillä.
5. Tee vaiheet 1–4 käänteisessä järjestyksessä irrottaaksesi istuimen rungosta.

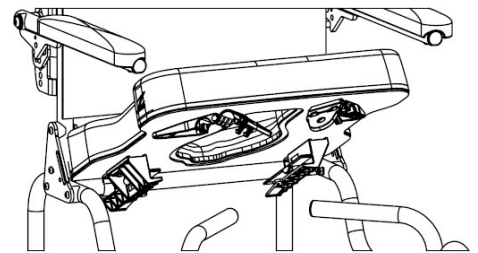

TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ MUUTTA ISTUIMEN KORKEUTTA ILMAN VALTUUTETUN JÄLLEENMYyjÄN APUA. KORKEAMMAT ISTUIMEN ASENNOT HEIKENTÄVÄT TUOLIN VAKAUTTA, JA VOIVAT JOHTAA KAATUMISEEN JA LOUKKAANTUMISEEN.

TÄRKEÄÄ!

RUNGON JA ISTUIMEN SÄÄDÖN SAA TEHDÄ VAIN RAZ-JÄLLEENMYyjÄN VALTUUTETTU ASENTAJA. ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ MUUTTA RUNGON KULMAA KÄÄNTÄMÄLLÄ PYÖRIEN ASENTOA. RUNGON ON AINA OLTAVA SUORASSA. VIRHEELLINEN PYÖRIEN ASEMA VOI HEIKENTÄÄ TUOLIN VAKAUTTA JA AIHEUTTAA KAATUMISEN. TÄMÄ VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA KÄYTTÄJÄLLE JA/TAI VAURIOITTA TUOLIA.

3.4 Säädetävät jalkatuet


Säädetävät jalkatuet ovat vakiovaruste kaikissa siirrettävissä Raz-suihku-alusastiatuoleissa. Kuljetusta varten jalkatuet voidaan taistaa ylös, kiertää sivulle tai poistaa kokonaan. Säädetäviä jalkatukia voidaan laajentaa pitempijalkaisille käyttäjille lisävarusteena saatavilla jalkatuen laajennusputkilla, 5cm (2") pitimmillä putkilla, joita voidaan tilata kaikkiin Raz-suihkutuoleihin.

Asettaaksesi säädetävät jalkatuet:

1. Aseta jalkatukien ripustusputket jalkatukien vastakappaleisiin.
2. Jos ripustusputket on kohdistettu eteenpäin, putkien tapit osuvat vastakappaleiden uriin ja lukittuvat paikoilleen.

Säätääksesi säädetävien jalkatukien pituutta:

1. Poista napsautusnasta yhdestä jalkatuen ripustusputkesta.
2. Sijoita jalkalevy uudelleen käyttäjälle sopivaan pituuteen.
3. Aseta napsautusnasta jalkatuen ripustusputken ja sisäputken läpi.

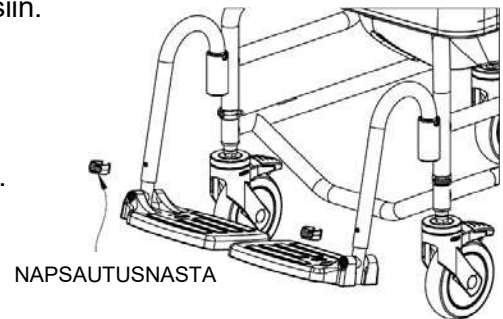


Kiertääksesi säädetäviä jalkatukia:

1. Nosta jalkatukien ripustusputkia irrottaaksesi tapit.
2. Kierrä jalkatukia ulospäin tai sisään.

Poistaaksesi säädetävät jalkatuet nosta jalkatuet pois rungon vastaholkeista.

3.5 Pyörien lukot – Raz-SP


Siirrettävän Raz-SP-suihku-alusastiatuolin pyörälukot voidaan kytkeä työntämällä kahvoja eteenpäin. Tämä estää etupyöriä pyörimästä. *Parhaan vakauden saavuttamiseksi **MOLEMPIEN** pyörälukkojen **ON OLTAVA** kytkettyinä.* Irrottaaksesi pyörälukot, vedä kahvoja taaksepäin.

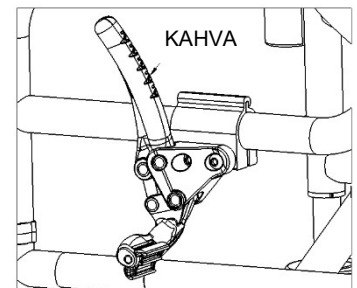

3.6 Alusastia

Raz-alusastia on suunniteltu taaksepäin roiskeita vähentävään, pitkänomaiseen muotoon, joka sopii suoraan istuimen alle. Astian keskellä on uniikki, loiskumista vähentävä harjanne. Kiiltävä pinta helpottaa puhdistusta ja huuhtelua, ja kaatonokka ja kahva helpottavat tyhjennystä. Alusastia poistetaan liu'uttamalla sitä taaksepäin.

HUOM.: Asettaessasi astiaa takaisin varmista, että astia ohjautuu vihreisiin muovikiinnikkeisiin, ja työnnä sitä eteenpäin, kunnes se osuu pysäyttimiin.

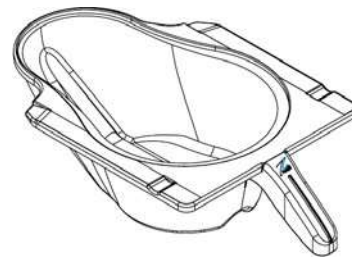

3.7 Kääntyvät pyörät

Jokainen siirrettävän Raz-suihku-alusastiatuolin pyörä on varustettu kaksoislukitusominaisuudella, joka samanaikaisesti estää pyörää kääntymästä ja pyörimästä. Kytkeäksesi kaksoislukon, paina jalalla kaksoislukon vivun päätä, kunnes se asettuu "päällä"-asentoon. Avataksesi kaksoislukon, paina jalalla vivun koholla olevaa päätä, kunnes se vapautuu.



TÄRKEÄÄ!

VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA ON OTETTAVA YHTEYTTÄ VALTUUTETTUUN RAZ-JÄLLEENMYYJÄÄN KAIKKIEN KIINNITYSTEN, PYÖRIEN JA PYÖRÄLUKKOJEN, LAITTEISTON JA KAIKKIEN MUIDEN LIIKKUVIEN OSIEN TARKASTAMISTA VARTEN.

4.0 PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

4.1 Puhdistus jokaisen käytön jälkeen

4.1.1 Alusastia

1. Poista alusastia ja tyhjennä sen sisältö.
2. Pese astia monikäyttöisellä, desinfioivalla puhdistusnesteellä. Käytä tarvittaessa pehmeää harjaa.
3. Huuhtelee hyvin ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä.

HUOM.: Kuuma saippuavesi ja sen jälkeen desinfiointiainesuihke voivat korvata monikäyttöisen desinfiointiaine-puhdistusliuoksen.

4.1.2 Istuin

1. Suihkuta monikäyttöisellä desinfiointiaineella ja hankaa pehmeällä harjalla tarpeen mukaan.
2. Huuhtelee vesisuihkulla ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä.

ÄLÄ UPOTA istuinta veteen tai puhdistusnesteeseen.

3. Perusteellisempaa puhdistusta varten poista istuin suihkutuolista, jotta sen alapuoleen ja istuimen aukon ympärykseen pääsee käsiksi paremmin.

4.2 Puhdistus tarvittaessa

4.2.1 Säädetty selkäpehmuste

1. Poista muovisalvat ja kolmiliu'ut selkäpehmusteen hihnoista, kiinnittäen poiston aikana huomiota siihen, miten hihnat kulkevat kunkin osan läpi.
2. Poista selkäpehmuste selkänöjan rungosta ja konepese se miedolla pesuaineella lämpimässä vedessä, normaalilla tai hellävaraisella ohjelmalla. Asenna myös muut hihnojen tarvikkeet, kuten H-hihna, sekä lantio- ja rintatukihihnat.

3. Asenna selkäpehmuste ja muut kohdistustarvikkeet tuoliin ja anna niiden kuivua.

ÄLÄ kuivaa selkäpehmustetta vaatteiden kuivauslaitteessa, tai se voi vaurioitua.

4. Kokoa kaikki muovisoljet ja kolmiliu'ut hihnoin.

5. Sääda hihnat haluttuun kireyteen.

4.2.2 Runko, käsinojat, säädettyt jalkatuet ja muut osat

1. Suihkuta runko monikäyttöisellä, desinfioivalla puhdistusaineella, hankaa pehmeällä harjalla, ja huuhtelee vedellä.

2. Tarvittaessa suihkuta runko ja osat laimennetulla (10 osaa vettä 1 osaan liuosta) kalkin/kattilakiven poistoaineella (kuten CLR), harjaa pehmeällä harjalla, ja huuhtelee perusteellisesti vedellä.

ÄLÄ sekoita kalkin/kattilakiven poistoliuosta mihinkään muuhun nesteeseen, tai voi muodostua myrkyllisiä höyryjä.

ÄLÄ käytä klooria sisältäviä tuotteita millekään Raz-osille.

Käyttäjälle suositellaan yhteydenottoa valtuutettuun Raz-jälleenmyyjään kaikkien kiinnitysten ja alirakenteiden säännöllistä tarkastamista varten, tai jos suihkutuolin toiminnassa havaitaan mahdollisia ongelmia.

Suihkutuoli ja sen osat on useita kertoja vuodessa pyyhittävä laimennetulla kalkin/kattilakiven poistoliuoksella, jotta vähennetään kuumavesihuuhtelun aiheuttamia kerrostumia.

Homeen muodostumisen riskin vähentämiseksi koko suihkutuoli on pyyhittävä kuivalla, pehmeällä liinalla viimeisen huuhtelun jälkeen ja ennen varastointia tai käyttöä.

4.3 Suositellut puhdistustuotteet

Tehtävä	Suosittelut tuotteet
Yleispuhdistus	Antibakteerinen puhdistusaine
Desinfioiva pintapuhdistusaine Keskitason desinfiointiaine	Oxiver TB (Virox Technologies Inc.) SepteFX 7D-11 (Titan Worldwide Inc.)
Kalkki- ja kattilakivisuojaus	CLR

TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ KÄYTÄ HANKAUSJAUHEITA TAI HANKAUSTYYNYJÄ RAZ-ALUSASTIASUIHKUTUOLIN PUHDISTUKSESSA.

ÄLÄ UPOTA SIIRRETTÄVÄÄ RAZ-SUIHKU-ALUSASTIATUOLIA VETEEN.

HUUHTELE HUOLELLISESTI PUHDISTUKSEN JÄLKEEN, JOTTA VARMISTETAAN, ETTÄ KAIKKI SAIPPUA- TAI PUHDISTUSAINELAJÄÄMÄT POISTUVAT.

ÄLÄ KÄYTÄ PUHDISTUSTUOTTEITA TUTUSTUMATTA TUOTTEEN OHJEISIIN JA RYHTYMÄTÄ TARVITTAVIIN VAROTOIMIIN LIITTYEN IHMISTEN ALTISTUMISELLE KEMIKAALEILLE.

5.0 VAARATILANTEIDEN ILMOITTAMINEN

TÄRKEÄÄ!

Jos tähän laitteeseen liittyen tapahtuu vakava tapahtuma, joka on johtanut tai voi johtaa kuolemaan, vakavaan loukkaantumiseen tai vakavaan terveydentilan heikkenemiseen, siitä on ilmoitettava viipymättä:

- valmistajalle (yhteystiedot on annettu tässä käyttöohjeessa) ja
- käyttäjän tai potilaan asuinmaan toimivaltaiselle viranomaiselle tai asianmukaiselle sääntelyviranomaiselle.

6.0 RAJOITETTU TAKUU

Tämä takuu on voimassa vain alkuperäiselle siirrettävälle Raz-suihku-alusastiatuolin ostajalle/käyttäjälle, joka on ostanut sen valtuutetulta Raz-jälleenmyyjältä.

Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä, lainmukaisia oikeuksia, mutta alueestasi ja maastasi riippuen sinulla saattaa olla myös muita lainmukaisia oikeuksia.

Tätä takuuta laajennetaan noudattamaan valtion/alueen lakeja ja vaatimuksia.

Liittyen vain alkuperäiseen ostajaan/käyttäjään, Raz Design takaa kahden (2) vuoden ajan valmistuspäivästä lukien tuotteen jalustan ja selkärungon osien olevan vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä. Kaikilla muilla siirrettävä Raz-suihku-alusastiatuolin osilla on yhden (1) vuoden takuu huomioiden normaalin kulumisen poissulkemisen. Jos tämän takuuajan kuluessa minkään näistä tuotteista havaitaan olevan viallinen, osa korjataan tai vaihdetaan Raz Designin harkinnan mukaisesti. Tämä takuu ei kata mitään työ- tai toimituskustannuksia, jotka liittyvät osien vaihtoon, asennukseen tai korjaukseen missään sellaisessa tuotteessa.

Takuuhuoltoa varten ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit siirrettävän Raz-suihku-alusastiatuolisi. Jos et saa tyydyttävää takuupalvelua, ota yhteyttä suoraan Raz Designiin käyttäen tämän ohjeen joko alussa tai lopussa annettuja yhteystietoja. Anna yhteydenotossasi jälleenmyyjäsi nimi ja osoite, tuotteen tyyppi, ostopäivä, tuolin sarjanumero (harmaassa merkinnässä tuolin rungossa) sekä kuvaus tuoteongelman luonteesta. Älä palauta tuotteita valmistajalle ilman ennakkoon saatua lupaa.

Rajoituksia ja poissulkemisia:

Tämä takuu ei ole voimassa sarjanumeroiduille tuotteille, joista sarjanumero on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi, eikä tuotteille, joita on käsitelty väärin, tai jotka ovat joutuneet onnettomuuteen. Virheellinen käyttö, huolto tai varastointi voi mitätöidä siirrettävän Raz-suihku-alusastiatuolin takuun.

Takuu ei kata tuotteita, joita on muutettu ilman Raz Designin erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Näihin sisältyvät rajoittumatta valtuuttamattomien osien tai lisälaitteiden käyttö, tuotteet, joiden vaurioituminen johtuu mihinkään osaan tehdyistä korjauksista, jotka on tehnyt henkilö tai henkilöt, jotka eivät ole valtuutetun Raz-jälleenmyyjän palveluksessa, tai jos tuote on vaurioitunut olosuhteissa, jotka eivät ole Raz Designin kontrolloitavissa. Vain Raz Designilla on valtuus määritellä, oikeuttavatko olosuhteet takuun voimassaoloon. Takuu ei koske ongelmia, jotka johtuvat tavallisesta kulumisesta tai tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Edellä mainittu takuu on yksinomainen ja sitä sovelletaan kaikkien muiden takuiden sijaan, joko ilmaistujen

tai epäsuorien, mukaan lukien epäsuorat takuut, jotka kuvaavat myyntikelpoisuutta tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikkien takuuta koskevien rikkomusten korjaaminen rajoitetaan vain viallisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tämän asiakirjan ehtojen mukaisesti.

Minkä tahansa epäsuoran takuun soveltaminen ei saa laajentua tässä annetun nimenomaisen takuun kestoja pitemmäksi. Raz Design ei ole vastuussa mistään välillisistä tai satunnaisista vahingoista, jotka liittyvät osin tai kokonaan siirrettävään Raz-suihku-alusastiatuoliin.

Raz Design Inc. runko- ja rakennemateriaalit ovat ruostumatonta terästä, jolle annamme elinikäisen ruostumattomuustakuun. Huomaa, että tämä elinikäinen takuu on voimassa vain alkuperäiselle siirrettävän Raz-suihku-alusastiatuolin ostajalle/käyttäjälle, joka on ostanut sen valtuutetulta Raz-jälleenmyyjältä. Asianmukaisten puhdistusohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa rungon ruostumista ja mitätöidä tämän takuun. Lisäksi kaikki ruostumista koskevat vaatimukset katselmoidaan ja niihin voi liittyä pyyntö palauttaa tuote tarkempaan tutkimukseen ennen kuin vaihtotuotteen tilaus voidaan käsitellä.

7.0 YHTEYSTIEDOT

On tärkeää, että siirrettävä Raz-suihku-alusastiatuoli kootaan oikein ja kaikki säädöt tehdään huolellisesti. Uusimmat käyttöohjeet voidaan ladata osoitteesta www.razdesigninc.com. Saadaksesi selventäviä tietoja mistä tahansa tämän ohjeen osasta, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai valmistajaan.

JÄLLEENMYYJAASI

Suomi
90240 Oulu, Finland
040 705 5886
info@rehaco.fi

VALMISTAJA

Raz Design Inc.
135 Railside Rd. Toronto, ON, Canada, M3A 1B7
877.720.5678 / +1.416.751.5678
info@razdesigninc.com



TÄRKEÄÄ!

TUOTTEET, JOITA EI ENÄÄ VOIDA KÄYTTÄÄ, ON HÄVITETTÄVÄ ERILLÄÄN KOTITALOUSJÄTTEESTÄ. SE ON TEHTÄVÄ PAIKALLISTEN JA KANSALLISTEN YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAAKA-AINEIDEN KIERRÄTYSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. KATSO LISÄTIETOJA PAIKALLISTEN VIRANOMAISTEN VERKKOSIVUILTA LIITTYEN OIKEAAN HÄVITTÄMISEEN.

OTA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI, JOS MISSÄÄN VAIHEESSA TUNTUU, ETTÄ JOKIN RAZ-SUIHKUTUOLIN OSA TARVITSEE HUOLTOA. KAIKKI ONGELMAT, JOTKA VOIVAT VAIKUTTA TUOLIN TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN, ON RATKAISTAVA VÄLITTÖMÄSTI. ON OTETTAVA YHTEYTTÄ SUIHKUTUOLIN TOIMITTANEeseen JÄLLEENMYYJÄÄN, JOTTA KORJAUKSET VOIDAAN SUORITTA ENNEN TUOLIN KÄYTÖN JATKAMSTA. JÄLLEENMYYJÄLLE ON ILMOITETTAVA SELKEÄSTI, ETTÄ SUIHKUTUOLI ON KORJAUKSEN TARPEESSA, EIKÄ SITÄ VOIDA KÄYTTÄÄ ENNEN KUIN KORJAUKSET ON SUORITETTU JA KAIKKI ONGELMAT RATKAISTU.

JOS JÄLLEENMYYJÄSI EI JOSTAIN SYYSTÄ VASTAA TYYDYTTÄVÄLLÄ TAVALLA, OLE HYVÄ JA OTA YHTEYTTÄ RAZ DESIGNIIN:

SÄHKÖPOSTITSE info@razdesigninc.com
PUHELIMITSE: 877.720.5678 (Pohjois-Amerikka)
+1.416.751.5678 (Muu maailma)