



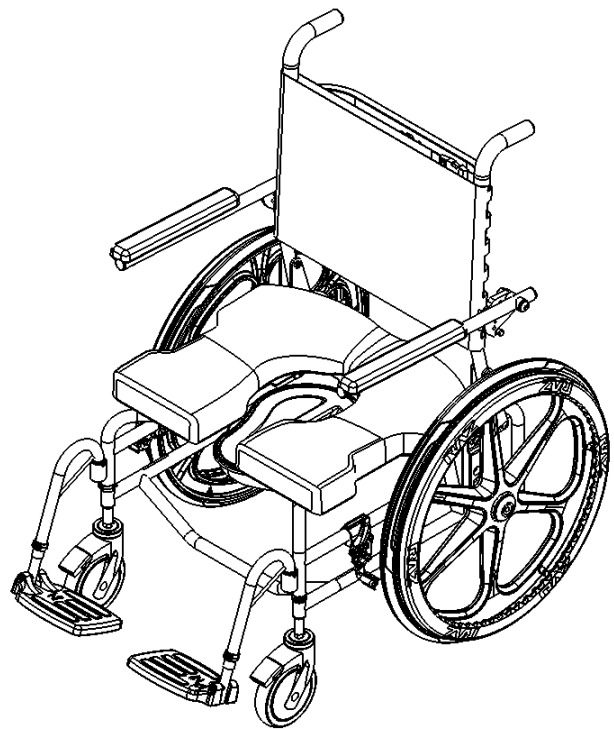

Mobile Dusch- und Toilettenstühle

Raz- AP600(Z160)
Raz- SP600(Z260)

Benutzer- und Händlerhandbuch

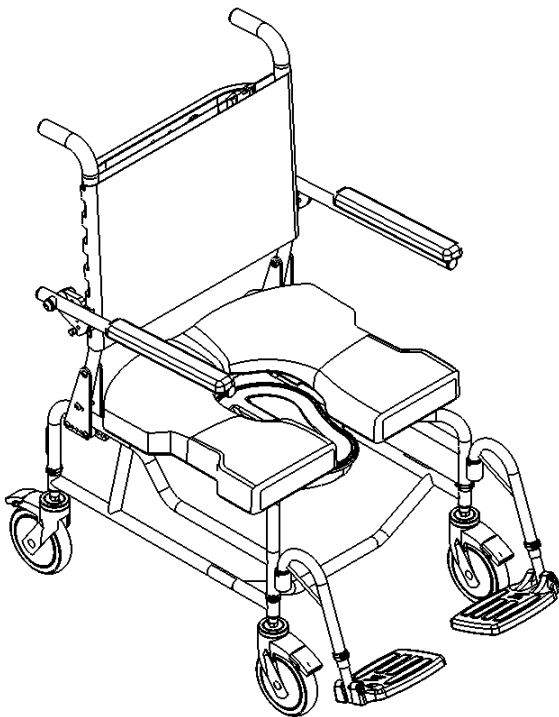

EC REP

Advena Ltd. Tower Business Center
2nd Flr, Tower Street
Swatar, BKR 4013 Malta

UKRP

Advena Ltd. Pure Offices, Plato Close
Warwick, CV34 6WE UK

CH REP

Senectovia Medizinaltechnik AG
In der Luberzen 1,
8902 Urdorf, Switzerland



BASIC UDI-DI: 628758RAZDESIGNINC2004V9

RTD033DEr08 Revisionsdatum:2026-02-26

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

Es ist wichtig, dass der Raz Mobiler-Duschstuhl richtig montiert ist und dass alle Einstellungen sorgfältig vorgenommen werden. Bitte stellen Sie sicher, dass der/die Benutzer, der/die Händler und die Begleitperson(en) dieses Handbuch gelesen und die sichere Bedienung des Raz Mobiler-Duschstuhl gründlich verstanden haben. Aktuelle Handbücher sind online verfügbar unter www.razdesigninc.com. Zur Klärung eines Abschnitts dieses Handbuchs wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Hersteller.

Jegliche/r unerlaubte/r nicht genehmigte Änderung/Umbau oder missbräuchliche Verwendung von Raz-Duschstühlen und Zubehör ist streng untersagt. Derartige Handlungsweisen, die schwere Verletzungen und Funktionsstörungen verursachen können, stellen Verstöße gegen die Regelwerke dar und machen eine etwaige Garantie unverzüglich zunichte. Raz Design übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Verluste oder Kosten, die aufgrund der Verwendung eines unerlaubt geänderten/umgebauten Geräts entstehen. Der Benutzer ist allein verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass das Gerät bestimmungsgemäß und in Übereinstimmung mit den Angaben in der offiziellen Dokumentation verwendet wird.



HERSTELLER

Raz Design Inc.
135 Railside Rd. Toronto, ON, Canada, M3A 1B7
877.720.5678 / +1.416.751.5678
info@razdesigninc.com



VERTEILER

Wolturnus GmbH
Urfseeestr. 1
53937 Schleiden-Gemünd
Deutschland
+49 (0) 32221/85313-5
info@wolturnus.dk

VERTEILER

Senectovia Medizinaltechnik AG
In der Luberzen 1
8902 Urdorf
Switzerland
044 735 35 45
info@senectovia.ch

STUHLKLASSIFIZIERUNG BASIEREND AUF DEM MAXIMALEN BENUTZERGEWICHT

AP600 / SP600	275 kg (605 lbs)
---------------	------------------

SICHERHEITSHINWEISE, DIE FÜR BENUTZERZWECKE ZU BEACHTEN SIND

DIESES GERÄT IST GEEIGNET FÜR TYP A: (z. B. EINRICHTUNGEN) UND DARF KEINESFALLS ANDERS ALS BESTIMMUNGSGEMÄSS VERWENDET WERDEN

Stabilität

Die Rollen aller Modelle sind mit Doppelsperren ausgestattet. Der Tritthebel aktiviert sowohl die Rollsperrung als auch die Lenksperrung. **Es ist wichtig, dass sich alle Rollen des Duschstuhls in einer nach außen gerichteten Position befinden, bevor die Sperren für eine optimale Vorwärts-, Rückwärts- und Seitenstabilität eingerastet werden.** Wenn dies der Fall ist, lösen Sie die optionale Lenkrollensperre, bevor Sie die hintere Rolle in die Rückwärtsposition drehen und die Doppelsperren der Rolle anwenden.



BENUTZER DÜRFEN sich beim Sitzen im Raz Duschstuhl **NICHT** nach vorne lehnen, da dies dazu führen kann, dass der Stuhl nach vorne kippt.

BENUTZER DÜRFEN NICHT eine Rampe hinunterfahren, ohne eine Begleitperson, die den Stuhl während des Abstiegs festhalten kann.

ROLLENSPERREN SIND KEINE BREMSEN! Verwenden Sie niemals Rollensperren, um den Duschstuhl beim Herunterfahren von Steigungen zu bremsen, da dies dazu führen kann, dass der Stuhl in Fahrtrichtung kippt.

Seitenstabilität

BENUTZER DÜRFEN sich **NICHT** über die Kante eines Raz Duschstuhls lehnen, da dies dazu führen kann, dass der Stuhl kippt.

BENUTZER DÜRFEN NICHT versuchen, Gegenstände vom Boden aufzunehmen, indem sie sich nach vorne lehnen und greifen – benutzen Sie einen Greifer oder bitten Sie eine Begleitperson um Hilfe.

BENUTZER DÜRFEN NICHT den Raz Duschstuhl auf einer Seitenneigung platzieren, da er sonst kippen könnte.

Rückwärtsstabilität

BENUTZER DÜRFEN NICHT eine Steigung nach oben bei einem SP600 fahren, ohne sicherzustellen, dass die optionalen hinteren Kippschutzvorrichtungen vorhanden sind. Die optionalen Kippschutzvorrichtungen müssen zusammen mit dem Raz-SP600 bestellt und ordnungsgemäß installiert werden, bevor Sie auf unebenen Oberflächen fahren.

Kippschutzvorrichtungen – SP600



Kippschutzvorrichtungen sind eine Option für die Raz-SP600 Duschstühle. Sie werden immer dann empfohlen, wenn die Stühle auf unebenen Flächen wie Rampen oder schrägen Böden verwendet werden sollen, wenn sie von an der unteren Extremität Amputierten verwendet werden, wenn die Hinterräder aus der werkseitig eingestellten Position vorwärts bewegt werden oder wenn die Rückwärtsstabilität beeinträchtigt ist.

Rampen und sonstige Steigungen

Rampen und andere unebene Oberflächen (z. B. Steigungen in die Einrollduschen) müssen mit einer Begleitperson getestet werden, um sicherzustellen, dass diese die Stabilität des Stuhls nicht beeinträchtigen. Bei diesem Prozess sollte eine qualifizierte medizinische Fachperson hinzugezogen werden.

Schieben oder ziehen Sie den Raz-AP600 NICHT an einer Steigung oder Rampe nach oben oder unten, die eine Steigung von 1:12 (5 ° Neigung) überschreitet.

Lassen Sie **NICHT** zu, dass ein Benutzer in einem Raz-AP600 Duschstuhl auf andere Weise als von einer Begleitperson bewegt (geschoben oder gezogen) wird.

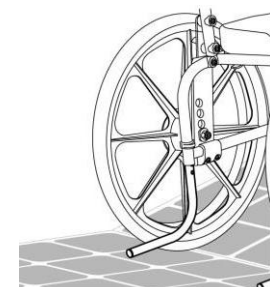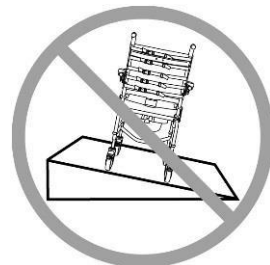

WICHTIG!

DIE RÜCKWÄRTSSTABILITÄT DES RAZ-SP600 WIRD DURCH DIE MONTAGEPOSITION DER HINTERRÄDER, DEN KÖRPERLICHEN UND KLINISCHEN MERKMALEN DES BENUTZERS UND DEN WINKEL DER RÜCKENLEHNE BEEINFLUSST. DER BEDARF AN KIPPSCHUTZVORRICHTUNGEN SOLLTE ZUM ZEITPUNKT DER VERSCHREIBUNG DES RAZ-SP600 UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER KÖRPERLICHEN EIGENSCHAFTEN UND DER UMGEBUNG DES BENUTZERS ERMITTELT WORDEN SEIN. KIPPSCHUTZVORRICHTUNGEN KÖNNEN JEDERZEIT ZUM NACHRÜSTEN GEORDERT WERDEN, WENN FESTGESTELLT WIRD, DASS SIE ERFORDERLICH SIND.

Eintauchen

Der Raz mobile Duschstuhl ist nicht für die Verwendung im Schwimmbecken konzipiert. Tauchen Sie den Duschstuhl nicht ganz oder teilweise in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Durch Eintauchen kann der Duschstuhl Schaden erleiden.

Chlorexposition

Geeignet zur Verwendung in Nassbereichen, jedoch nicht im Schwimmbecken und dergleichen korrosiven Umgebungen.

Das Gerät **NICHT** in der Umgebung von Schwimmbecken lagern. Das in der Luft enthaltene Chlor kann Rostbildung an einigen Edelstahlbauteilen des Stuhls verursachen.



Transfer

Der gefährlichste Teil der Verwendung eines Duschstuhls ist der Transfer. Da jeder Stuhl unterschiedliche Stabilitätseigenschaften aufweist, ist es unerlässlich, die Transfermethode sorgfältig zu überprüfen und zu testen, um zu gewährleisten, dass die Methode sicher ist. Der Probetransfer sollte mit einer betreuenden Person durchgeführt werden, die verhindern kann, dass der Stuhl während des Transfers kippt oder wegrutscht. Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Transfer nicht wiederholt sicher durchgeführt werden kann, wenden Sie sich an medizinisches Fachpersonal, das mit den Transfermethoden und -optionen vertraut ist. Personen, die keine sicheren Verlagerungsmethoden erlernt haben, müssen während der Verlagerung Hilfe suchen und ggf. die Verwendung eines mechanischen Hebbers in Anspruch nehmen.

Auf einen Raz-AP600 Duschstuhl transferieren

Alle vier Rollen sind **IMMER** in einer äußeren Position (vordere Rollen in der vorderen Position) für maximale Stabilität des Stuhls arretiert.

Auf einen Raz-SP600 Duschstuhl transferieren

Arretieren Sie **IMMER** beide Vorderräder in ihrer äußeren Position (nach vorne gerichtet) und legen Sie beide Radsperren vollständig an, so dass sie sicher in die Hinterräder eingreifen.



Die Radsperren sind so konzipiert, dass eine Drehung der freidrehenden Räder verhindert wird. Die Doppelsperren an den Rollen sind so konzipiert, dass eine Drehung der Rollen und ein Schwenken der Rollengabeln verhindert wird. Rollen- und Radsperren **DÜRFEN und KÖNNEN NICHT** verhindern, dass der Duschstuhl bei rutschigem Boden rutscht oder sich bewegt. Ein rutschiger Boden kann durch Staub, Wasser, Seife oder andere Substanzen verursacht werden, die es den Rollen/Hinterrädern nicht ermöglichen, sicher auf dem Boden zu bleiben.

Verlagerungen sollten auf keinen Fall durchgeführt werden, wenn der Duschstuhl auf rutschigen Oberflächen steht. Es wird empfohlen, den Transfer auf sauberen, trockenen und rutschfesten Flächen durchzuführen. Hartböden wie Fliesen, Holz oder Beton bieten möglicherweise nicht genügend Halt, um ein Verrutschen der feststehenden Rollen und/oder Hinterräder zu verhindern. Eine Teppichbodenfläche ist optimal. Beachten Sie, dass Teppiche und Duschmatten auf Böden verrutschen können und dadurch eine gefährliche Fläche entstehen kann.




Stellen Sie sich **NICHT** auf irgendein Teil des Rahmens des mobilen Raz Dusch- und Toilettenstuhls.

Verwenden Sie die Fußstützen NIEMALS, um den Transfer zu vereinfachen.

Dies kann dazu führen, dass der Stuhl umkippt. Die Fußstützen sollten während der Verlagerung zur Seite geschwenkt oder ganz entfernt werden, um einen ungehinderten Zugang zum Duschstuhl zu ermöglichen.

Der mobile Raz Dusch- und Toilettenstuhl **ist NICHT** zum Einsatz als Transportgerät oder Langzeit-Sitzsystem vorgesehen.

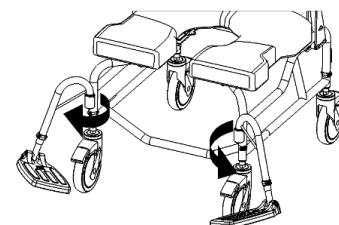

WICHTIG!

DER BENUTZER SOLLTE AUF DEM MOBILEN RAZ DUSCH- UND TOILETTENSTUHL NIEMALS UNBEAUF SICHTIGT BLEIBEN.


WICHTIG!

HEBEN SIE EINEN MOBILEN RAZ DUSCH- UND TOILETTENSTUHL UND DIE DARAUF SITZENDE PERSON NICHT AN DEN ARMLEHNEN ODER FUSSTÜTZEN AN!

WICHTIG!

STELLEN SIE IMMER SICHER, DASS DER SITZ RICHTIG MONTIERT UND VERRIEGELT IST, BEVOR EIN BENUTZER AUF DEN STUHL TRANSFERIERT WIRD. DIE HINTEREN SITZHALTERUNGEN MÜSSEN VOLLSTÄNDIG UNTER DEN HINTEREN SITZSTÜTZROHREN EINGEHAKT SEIN. DIE VORDEREN SITZHALTERUNGEN MÜSSEN DIE VORDEREN SITZSTÜTZROHRE SICHER UMSCHLIESSEN. SOWOHL DIE VORDEREN ALS AUCH DIE HINTEREN SITZHALTERUNGEN MÜSSEN DURCH FESTZIEHEN DER 8 SCHRAUBEN AN DER SITZUNTERSEITE GESICHERT SEIN.

DIE ANLEITUNGEN ZUM ORDNUNGSGEMÄSSEN ABBAUEN UND INSTALLIEREN DES SITZES FÜR DIE REINIGUNG MÜSSEN DEM BENUTZER UND / ODER DER BETREUENDEN PERSON ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN.

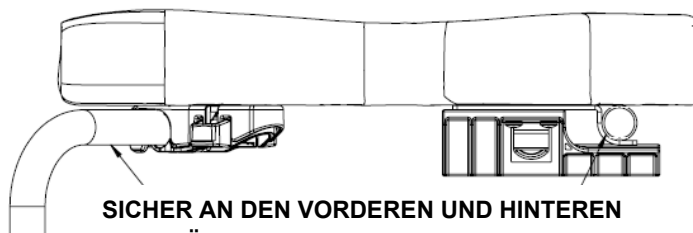

ERKLÄRUNG ZUR BESTIMMUNGSGEMÄSSEN VERWENDUNG

INDIVIDUELL KONFIGURIERTER, BEWEGLICHER ODER FEST EINGEBAUTER TOILETTENSTUHL ZUR VERWENDUNG BEIM DUSCHEN UND FÜR DEN TOILETTENGANG.

WICHTIG!

DER RAZ-AP600 UND DER RAZ-SP600 SIND FÜR DIE FOLGENDEN VERWENDUNGSZWECKE BESTIMMT:

- **ALS HILFE BEIM DUSCHEN/BADEN, BEIM GANG ZUR TOILETTE UND FÜR ANDERE AKTIVITÄTEN IN VERBINDUNG MIT INTIMPFLEGE UND -HYGIENE,**
- **ALS AUFLAGE FÜR DEN KÖRPER DES BENUTZERS IN SITZENDER ODER ZURÜCKGELEHNTER POSITION,**
- **MIT ODER OHNE DIE HILFE EINER PFLEGEPERSON,**
- **ÜBER EINER STANDARDTOILETTE ODER ALS TOILETTENSTUHL MIT DER TOILETTENPFANNE,**
- **NUR IN INNENRÄUMEN,**
- **SOWOHL IM UMFELD TYP A FÜR HOHE BEANSPRUCHUNG (z. B. EINRICHTUNGEN) ALS AUCH FÜR DEN GEBRAUCH IN HÄUSLICHER UMGEBUNG,**

DER RAZ-AP600 UND DER RAZ-SP600 HABEN KEINERLEI THERAPEUTISCHE ODER DIAGNOSTISCHE FUNKTION UND SIND NICHT FÜR THERAPEUTISCHE ODER DIAGNOSTISCHE ZWECKE VORGESEHEN. ALLE PRODUKTE DER RAZ FAMILIE SIND NICHTSTERIL, WIEDERVERWENDBAR, NICHTINVASIV UND NICHTIMPLANTIERBAR.

DER RAZ-AP600 UND DER RAZ-SP600 SIND ZUR VERWENDUNG DURCH PERSONEN MIT MOBILITÄTSDEFIZITEN BESTIMMT, DIE MÖGLICHERWEISE SCHWIERIGKEITEN BEIM STEHEN ODER GLEICHGEWICHTHALTEN WÄHREND DES DUSCHENS, BEIM TOILETTENGANG ODER DER INTIMPFLEGE HABEN. DER TYPISCHE BENUTZER VERFÜGT ÜBER BEGRENZTE AUSDAUER SOWIE HALTUNGSKONTROLLE UND BENÖTIGT U. U. DIE HILFE EINER PFLEGEKRAFT BEI TÄTIGKEITEN WIE DUSCHEN, TOILETTENGANG ODER INTIMPFLEGE. BEI PRODUKTEN MIT ZURÜCKLEHNFUNKTION KANN DIE VERWENDUNG DER ZURÜCKLEHNFUNKTION KONTRAINDIZIERT SEIN, WENN DER BENUTZER AUF SITZFLÄCHEN BEIM ÖFFNEN DES SITZ-RÜCKEN-WINKELS SCHERKÄFTEN AUSGESETZT IST.

WICHTIG!

LASSEN SIE SICH VON EINEM ARZT BERATEN, WENN SIE ALS BENUTZER BESCHWERDEN, VERÄNDERUNGEN DER MOBILITÄT ODER SCHWIERIGKEITEN BEI DER VERWENDUNG DES GERÄTS HABEN SOLLTEN.

AUFKLEBER ODER SYMBOLE AM PRODUKT


PRODUKTBEZEICHNUNG	RAZ-AP600 / RAZ-SP600
HERSTELLERADRESSE	 Raz Design Inc. 135 Railside Road Toronto, ON Canada M3A 1B7
ANGABEN ZUR ERMÄCHTIGTEN VERTRETUNG	EC REP UKRP CH REP
PRODUKTKENNZEICHNUNG (PI)	SN SC-XXXXXX
UDI-DI	UDI AP600: 628758001607 SP600: 628758002604
MEDIZINGERÄT	MD
EINHALTUNG DER EUROPÄISCHEN VORSCHRIFTEN	
HERSTELLUNGSDATUM	
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT	
BENUTZERHANDBUCH LESEN	

BENUTZER- UND HÄNDLERHANDBUCH – INHALTSVERZEICHNIS

1.0 ALLGEMEINE INFORMATIONEN	9
1.1 Raz-AP600/SP600 mobile Dusch- und Toilettenstühle – Übersicht.....	9
1.2 Raz-AP600/SP600 mobile Dusch- und Toilettenstühle – Technische Daten	9
2.0 EINRICHTUNG: NUR FÜR DEN HÄNDLER BESTIMMT	10
2.1 Rückenlehne	10
2.1.1 Montage der Rückenlehne	10
2.1.2 Einstellung des Rückenlehnenwinkels	10
2.1.3 Einstellung der Rückenlehnentiefe	11
2.1.4 Einstellung der Rückenpolsterung mit einstellbarer Spannkraft	11
2.2 Rollen.....	12
2.2.1 Montage der Rollen	12
2.2.2 Sitzhöhe einstellen – Rollen.....	12
2.3 Räder – Modell SP600	13
2.3.1 Montage der Räder mit Standard-Achsschraube – Modell SP600	13
2.3.2 Sitzhöhe einstellen – Hinterräder – Modell SP600	13
2.3.3 Vorder-/Nachverstellung der Hinterräder – Modell SP600.....	13
2.4 Radsperren einrichten – Modell SP600	14
2.5 Raz Sitzes.....	14
2.5.1 Montage des Raz Sitzes	14
2.5.2 Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) – einstellen	14
2.6 Einstellbaren Fußstütze.....	15
2.6.1 Installieren der einstellbaren Fußstütze	15
2.6.2 Einstellung der einstellbaren Fußstütze	15
2.7 NUR FÜR HÄNDLER - Halterungen installieren.....	15
3.0 GEBRAUCH UND BETRIEB	16
3.1 Hochklappbare Armlehnen.....	16
3.2 Rückenpolsterung mit einstellbarer Spannkraft	16
3.3 Raz Sitzes.....	16
3.4 Einstellbare Fußstützen.....	17
3.5 Radsperren – SP600.....	17
3.6 Toilettenschüssel	17
3.7 Rollen.....	18
4.0 REINIGUNG UND PFLEGE.....	19
4.1 Reinigung nach jedem Gebrauch	19
4.1.1 Toilettenpfanne	19
4.1.2 Sitz	19
4.2 Reinigung nach Bedarf.....	19
4.2.1 Rückenpolsterung mit einstellbarer Spannkraft.....	19
4.2.2 Rahmen, Armlehnen, einstellbare Fußstützen und andere Bauteile.....	19
4.2 Empfohlene Reinigungsprodukte	19
5.0 MELDUNG UNERWÜNSCHTER EREIGNISSE	20
6.0 BESCHRÄNKTE GARANTIE.....	20
7.0 KONTAKTE	22

1.0 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 Raz-AP600/SP600 mobile Dusch- und Toilettenstühle – Übersicht

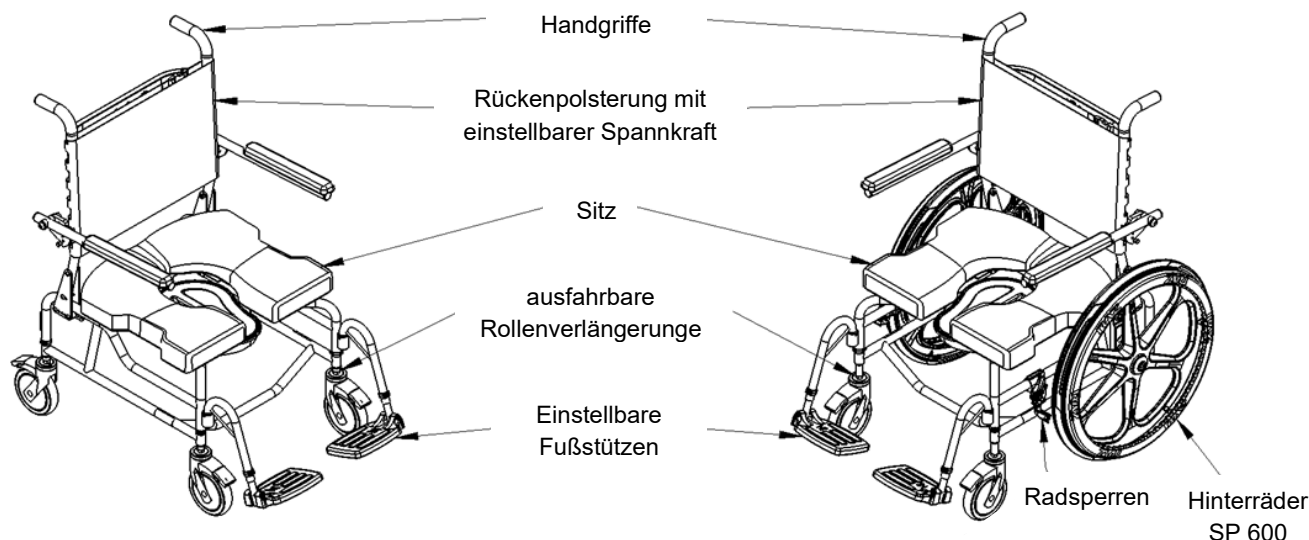

1.2 Raz-AP600/SP600 mobile Dusch- und Toilettenstühle – Technische Daten

TECHNISCHE DATEN	Raz-AP600	Raz-SP600
TRAGFÄHIGKEIT	275 kg (605 lbs)	275 kg (605 lbs)
RAHMENBREITE (Sitz- und Rückenrahmen)	56 cm (22")	56 cm (22")
GESAMTBREITE	68 cm (26,75")	75 cm (29,5")
GESAMTLÄNGE (mit Fußstützen)	95 cm (37,25")	109 cm (43")
SITZBREITE (Toilettensitz)	58 cm (23")	58 cm (23")
SITZTIEFE (Vorderseite der Rückenlehne bis Vorderseite des Sitzes)	43-48 cm (17"-19")	43-48 cm (17"-19")
DURCHFAHRTSBREITE	41 cm (16")	41 cm (16")
DURCHFAHRTHÖHE mit Schwenkbügel	5" rollen: 37-47 cm (14,5"-18,5") 6" rollen: 39-49 cm (15,5"-19,5")	5" rollen: 37-42 cm (14,5"-16,5") 6" rollen: 39-42 cm, 49 cm (15,5"-16,5", 19,5")
DURCHFAHRTHÖHE ohne Schwenkbügel	5" rollen: 39-49 cm (15,25"-19,25") 6" rollen: 41-51 cm (16,25"-20,25")	5" rollen: 39-44 cm (15,25"-17,25") 6" rollen: 41-44 cm, 51 cm (16,25"-17,25", 20,25")
ARMLEHNENHÖHE ÜBER DEM SITZ	24 cm (9,5")	24 cm (9,5")
SITZ-ZU-BODEN-HÖHE	5" rollen: 48-58 cm (19"-23") 6" rollen: 51-61 cm (20"-24") in Schritten zu je 2,5 cm (1")	5" rollen: 48-53 cm (19"-21") 6" rollen: 51-53 cm, 61 cm (20"-21", 24") in Schritten zu je 2,5 cm (1")
PRODUKTGEWICHT (mit Fußstützen)	5" rollen: 25 kg (54,5 lbs) 6" rollen: 26,7 kg (58,5 lbs)	5" rollen: 30,9 kg (68 lbs) 6" rollen: 31,3 kg (69 lbs)
RAHMEN- UND BESCHLAGSMATERIAL	Edelstahl (Lebenslange Garantie gegen Korrosion)	
MINDESTWENDEKREIS	105 cm (41,5")	163 cm (64")

2.0 EINRICHTUNG: NUR FÜR DEN HÄNDLER BESTIMMT

WICHTIGER HINWEIS: Um Kaltschweißen der Halterungen zu vermeiden, empfehlen wir, keine Elektroschrauber zu verwenden.

- Um Festfressen zu reduzieren, sollten Sie vor dem Anziehen der Halterungen Schmiermittel (Flüssigreiniger, Seife, Lippenbalsam, Wachs usw.) auf die Gewinde auftragen.
- Halterungen nicht übermäßig festziehen.

WICHTIG!

NIEMALS VERSTELLUNGEN VORNEHMEN, WENN DER BENUTZER AUF DEM STUHL SITZT.

2.1 Rückenlehne

2.1.1 Montage der Rückenlehne

Benötigtes Werkzeug: 3/16" Inbusschlüssel, 1/2" Schraubenschlüssel


1. Nehmen Sie den Duschstuhl aus dem Versandkarton.
2. Stellen Sie die Rückenlehne in eine aufrechte Position.
3. Stecken Sie die Zylinderschraube durch eine der beiden Bohrungen in der Mitte der äußeren Rückenlehnenplatte.

HINWEIS: Wählen Sie die hintere Bohrung für einen 93°-Winkel der Rückenlehne oder die vordere Bohrung für einen 100°-Winkel.


TIPP: Ein Kreuzschlitzschraubendreher kann durch eine Platte und den Rahmen gesteckt werden, um die Rückenlehne vorübergehend in aufrechter Position zu sichern.

4. Befestigen Sie das andere Ende der Schraube mit einer Stoppmutter.
5. Ziehen Sie die Einheit mit dem Inbusschlüssel und dem Schraubenschlüssel an, bis das Ende der Schraube 1 oder 2 Gewinde über die Stoppmutter hinausragt.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für ein anderes Rahmenrohr.

HINWEIS: Halterungen vor dem Festziehen nachschmieren.

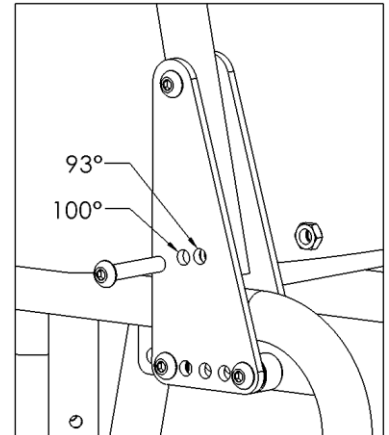

DRAUFSICHT DER RÜCKENLEHNENEINHEIT

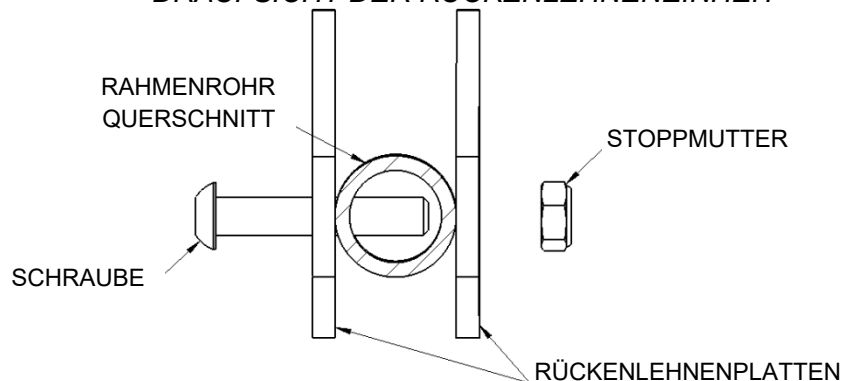


2.1.2 Einstellung des Rückenlehnenwinkels

Benötigtes Werkzeug: 3/16" Inbusschlüssel, 1/2" Schraubenschlüssel

1. Lösen und entfernen Sie die Kontermuttern an den beiden vertikalen Rahmenrohren der Rückenlehne.
2. Entfernen Sie die Schrauben von den vertikalen Rahmenrohren der Rückenlehne.
3. Drehen Sie die Rückenlehne in eine von 2 Positionen auf den Montageplatten der Rückenlehne.

HINWEIS: Wählen Sie die vordere Bohrung für einen Winkel der Rückenlehne von 100° oder die hintere Bohrung für einen Winkel der Rückenlehne von 93°.


4. Wenn die Rückenlehne aufgesetzt ist, stecken Sie die Schrauben wieder durch die ausgewählten Bohrungen auf den Montageplatten der Rückenlehne.
5. Befestigen Sie die Schrauben mit Kontermuttern.
6. Ziehen Sie die Einheit mit einem Inbusschlüssel und dem Schraubenschlüssel an.

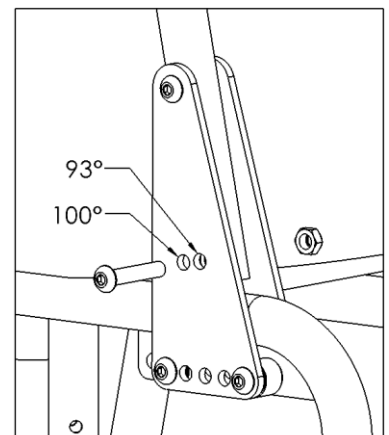


2.1.3 Einstellung der Rückenlehnentiefe

Benötigtes Werkzeug: 3/16" Inbusschlüssel, 1/2" Schraubenschlüssel

1. Lösen und entfernen Sie die Kontermuttern auf beiden Innenseiten des Sitzrahmens.
2. Entfernen Sie die beiden Schrauben von der Rückenlehnenplatte.
3. Richten Sie die Bohrungen der Rückenlehnenplatte auf die Bohrungen des Sitzrahmens für die gewünschte Sitztiefe aus.
4. Wenn die Rückenlehne aufgesetzt ist, stecken Sie die Schrauben in die Bohrungen der durchdrückten Rückenlehnenplatte.
5. Befestigen Sie das andere Ende der Schrauben mit Kontermuttern.
6. Ziehen Sie die Einheit fest.

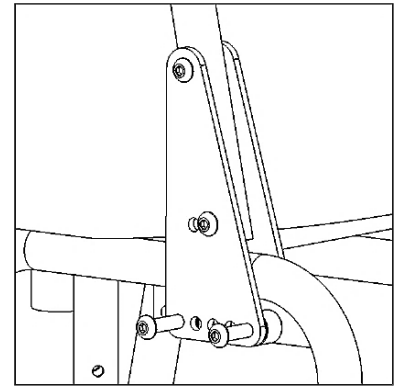


DRAUFSICHT DER RÜCKENLEHNENEINHEIT

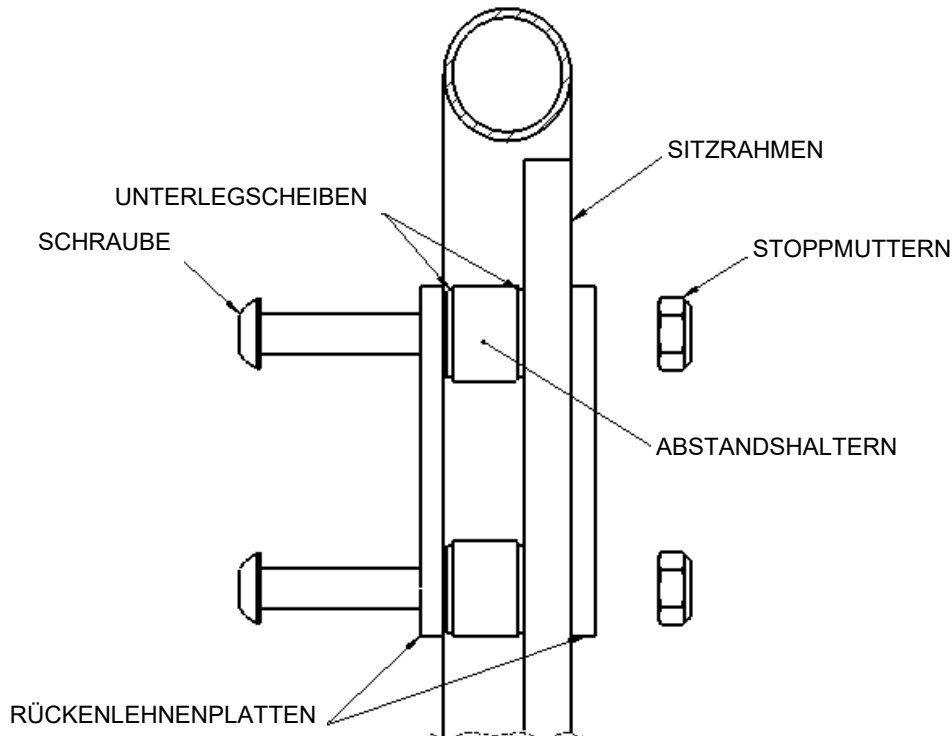

2.1.4 Einstellung der Rückenpolsterung mit einstellbarer Spannkraft

Um die Rückenpolsterung der Rückenlehne einzustellen, kann jeder Gurt angezogen oder gelöst werden, um eine Vielzahl von Positionen zu erreichen. So können beispielsweise die zweiten und dritten Gurte von unten angezogen werden, um eine stärkere Unterstützung im Lendenwirbelbereich des Rückens zu erreichen.

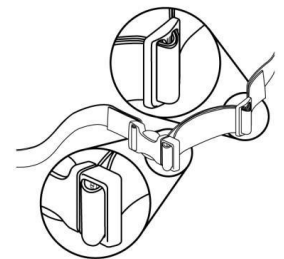

WICHTIG!

EINE ERHÖHUNG DER SITZHÖHE, EINE VERSTELLUNG DER HINTERRÄDER NACH VORNE UND EINE ERHÖHUNG DES RÜCKENLEHNENWINKELS VERRINGERT DIE RÜCKWÄRTSSTABILITÄT ERHEBLICH. ES IST UNERLÄSSLICH, DASS NACH JEDER DIESER EINSTELLUNGEN EINE STABILITÄTSPRÜFUNG DURCHGEFÜHRT WIRD. STABILITÄTSPRÜFUNGEN SOLLTEN MIT EINER BEGLEITPERSON HINTER DEM STUHL UND MIT RICHTIG INSTALLIERTEN UND EINGESTELLTEN KIPPSCHUTZVORRICHTUNGEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

2.2 Rollen

WICHTIG!

ALLE ROLLSCHAFTEN MÜSSEN AUF DIE GLEICHE HÖHE EINGESTELLT WERDEN. VERSUCHEN SIE NIEMALS, DEN RAHMENWINKEL DURCH ÄNDERN DER ROLLPOSITION ZU VERÄNDERN. UNGLEICHE ROLLENPOSITIONEN VERRINGERN DIE STABILITÄT DES STUHL UND KÖNNEN ZUM KIPPEN FÜHREN.

2.2.1 Montage der Rollen

Für SP600, Das Rad muss in Bohrungen montiert werden, die der gewünschten Sitz- und Rollenhöhe entsprechen, so dass der Stuhlrahmen eben ist.


Werkseinstellung – Einstellung der Rollenverlängerung für das Modell SP600	
5"-Rollen	Drittunterste Bohrung am Verlängerungsrohr der Rolle
6"-Rollen	Zweitniedrigste Bohrung am Verlängerungsrohr der Rolle

1. Nehmen Sie die Rollen aus dem Zubehörkarton.
2. Setzen Sie das Verlängerungsrohr der Rolle an der gewünschten Position in das untere Rahmenaufnahmerohr ein.
3. Richten Sie die Bohrung am Rahmen und am Verlängerungsrohr der Rolle aus. Möglicherweise müssen Sie das Verlängerungsrohr der Rolle drehen, um die Bohrungen auszurichten.

TIPP: Das Sperren der Rolle zuerst, macht es einfacher.

4. Stecken Sie den Raststift durch das Rahmenrohr und das Verlängerungsrohr der Rolle. Achten Sie darauf, dass der Stift vollständig durch das Rohr eingeführt wird und der grüne Kunststoffclip sicher um die Außenseite des Rahmenrohres eingerastet ist.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für alle Rollen in der Einheit.

HINWEIS: Wenn die Option der Lenkrollensperre mit dem AP600-Stuhl bestellt wurde, ist die Sperre auf einer der vier Rollen am Rollenschaft montiert. Die Rolle mit der Lenksperre muss in einer der hinteren Rollenpositionen nach vorne gerichtet montiert werden.

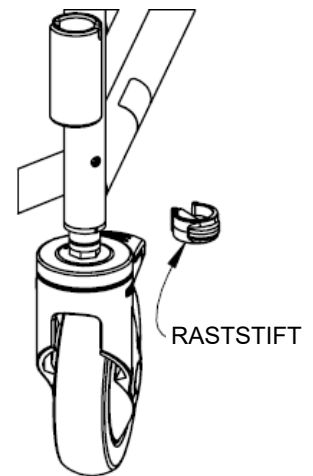

2.2.2 Sitzhöhe einstellen – Rollen

Das Modell AP600 verfügt über vier ausfahrbare Rollenverlängerungen, die einen Höhenverstellbereich von 4" ermöglichen. Das Modell SP600 verfügt über zwei vordere Rollenverlängerungen, die bei Verwendung von 24" Hinterrädern und 6" Rollen einen Höhenverstellbereich von 4" ermöglichen.

1. Entfernen Sie den Raststift, mit dem das Verlängerungsrohr der Rolle am Stuhlrahmen befestigt ist.
2. Schieben Sie die Rolleneinheit in die gewünschte Position.
3. Richten Sie die Bohrungen im Verlängerungsrohr der Rolle auf die Rahmenbohrungen aus und setzen Sie die Raststifte ein. *TIPP: Das Sperren der Rolle macht es einfacher.*
4. Achten Sie darauf, dass die Stifte vollständig durch das Rahmenrohr hindurchgehen und die grünen Kunststoffclips sicher um die Rahmenrohre eingerastet sind.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für alle anderen Rollen am Stuhl.

WICHTIG!


JE HÖHER DER STUHL EINGESTELLT IST, DESTO ANFÄLLIGER IST ER ZUM KIPPEN. ROLLEN DÜRFEN NIEMALS AUF UNTERSCHIEDLICHE HÖHEN EINGESTELLT WERDEN. EIN UNEBENER STUHL IST FÜR JEDEN BENUTZER EXTREM GEFÄHRLICH. ROLLEN SOLLTEN IMMER IN DER NIEDRIGSTMÖGLICHEN POSITION INSTALLIERT WERDEN, UM DEN BEDÜRFNISSEN DES BENUTZERS GERECHT ZU WERDEN. JEDE POSITION DARÜBER FÜHRT ZU EINER ÄNDERUNG DES MASSENSCHWERPUNKTS, DIE ZU VERLETZUNGEN ODER PRODUKTSCHÄDEN FÜHREN KANN. ES WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DASS EINE QUALIFIZIERTE MEDIZINISCHE FACHPERSON BEI EINER STABILITÄTSPRÜFUNG DES STUHL IN JEDER GEÄNDERTEN HÖHENKONFIGURATION MITWIRKT.

2.3 Räder – Modell SP600

2.3.1 Montage der Räder mit Standard-Achsschraube – Modell SP600

Benötigtes Werkzeug: 3/4" Schraubenschlüssel, 3/4" Steckschlüssel

1. Nehmen Sie beide Räder aus dem Versandkarton.
2. Nehmen Sie die Achsschrauben und Stoppmuttern aus dem Kartonteiler.
3. Nehmen Sie die Radkappe von einem Rad ab.
4. Setzen Sie die Achsschraube durch die Radnabe, den Achsaufnahme und in die Achsplatte ein.
5. Schrauben Sie die Stoppmutter auf die Achsschraube und ziehen Sie diese fest, bis die Radeinheit fest sitzt. *Nicht zu fest anziehen, da sich das Rad frei drehen muss.*
6. Setzen Sie die Radkappe wieder ein, indem sie in die Radnabe drücken, bis sie mit einem Klicken einrastet.
7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für das andere Rad.

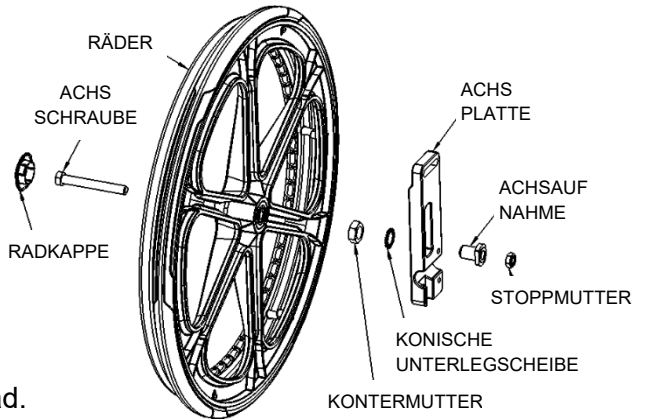


2.3.2 Sitzhöhe einstellen – Hinterräder – Modell SP600

Benötigtes Werkzeug: 3/4"-Steckschlüssel, 3/4"-Schraubenschlüssel, 1 1/8"-Schraubenschlüssel.

1. Nehmen Sie die schwarze Radkappe vom ersten Rad ab.
2. Nehmen Sie die Achsschraube, den Achsschraubenabstandshalter und die Radeinheit von der Achsplatte ab.
3. Stecken Sie die Achsschraube durch die Radeinheit und den Achsabstandshalter und dann in die gewünschte Bohrung.

HINWEIS: Die verfügbare Sitz-Boden-Höhe entnehmen Sie bitte der Abbildung auf der rechten Seite.


4. Ziehen Sie die Stoppmutter an, bis die Radeinheit fest sitzt. *Nicht zu fest anziehen, da sich das Rad frei drehen muss.*
5. Setzen Sie die Radkappe wieder ein, indem sie in die Radnabe drücken, bis sie mit einem Klicken einrastet.
6. Stellen Sie die Radsperren ein.
7. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 für das andere Rad. Ziehen Sie an beiden Rädern, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.

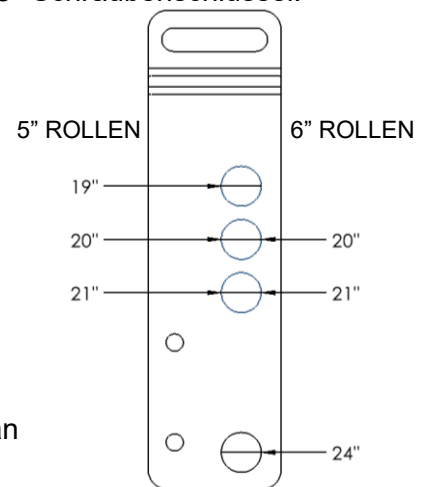

2.3.3 Vorder-/Nachverstellung der Hinterräder – Modell SP600

Benötigtes Werkzeug: 3/16" Inbusschlüssel, (X2) 1/2" Schraubenschlüssel, 3/4" Steckschlüssel, 3/4" Schraubenschlüssel

1. Lösen Sie die Radsperren.
2. Nehmen Sie die Radkappe von einem Rad ab. Lösen und entfernen Sie die Achsschraube und Kontermutter und legen Sie die Radeinheit beiseite. *TIPP: Das Ablegen des Stuhls auf einer Seite erleichtert diesen Prozess.*
3. Wenn das Rad gelöst ist, lösen (*nicht entfernen*) Sie die Halbrundschaube des unteren Rückenteils auf der Montageplatte der Rückenlehne.
4. Lösen (*nicht entfernen*) Sie die Klemmschrauben der unteren Achsplatte.
5. Stellen Sie die Achsplatte ein und merken Sie sich die genaue Position zum Spiegeln mit der Achsplatte für das andere Rad.
6. Ziehen Sie die Klemmschrauben an der Unterseite der Achsplatte und die Halbrundschaube an der Montageplatte der Rückenlehne an.
7. Setzen Sie Rad, Achsschraube und Kontermutter wieder ein.
8. Ziehen Sie die Achsschraube und die Kontermutter fest an, bis sie fest sitzen.
9. Setzen Sie die Radkappe wieder ein, indem sie in die Radnabe drücken, bis sie mit einem Klicken einrastet.
10. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 9 für das andere Rad. Achten Sie besonders darauf, dass die Räder richtig ausgerichtet sind.
11. Stellen Sie die Radsperren erneut ein.

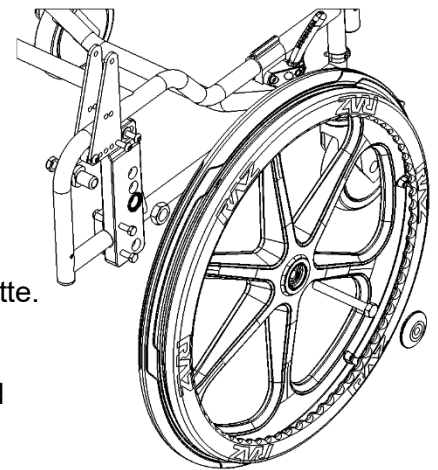

2.4 Radsperrn einrichten – Modell SP600


Die Radsperrn sind mit einer einzigartigen Schwenkbremsbacke ausgestattet, die auf den Reifen drückt. Dies ermöglicht das Eingreifen der Sperre bei geringerer Kraft als bei herkömmlichen Radsperrn der Fall.
Benötigtes Werkzeug: 5mm-Inbusschlüssel

1. Die beiden Klemmschrauben lösen (nicht entfernen).
2. Aktivieren Sie die Radsperrre, indem Sie den Griff vom Rad wegdrücken.
3. Zum Rad hinschieben, bis die Backe den Reifen berührt.
4. Die Radsperrre deaktivieren und 10mm zum Rad hinschieben.
5. Klemmschrauben festziehen und die Radsperrre testen. Falls erforderlich, Radsperrre weiter justieren, um ihre Position fein abzustimmen.

NICHT so einstellen, dass die Backe mit der bei herkömmlichen Radsperrn erforderlichen Kraft auf den Reifen drückt.

Zum Testen der Radsperrre das Rad drehen, um zu bestätigen, dass die Backe sich dreht, mit ausreichender Kraft auf den Reifen drückt und das Rad blockiert wird.


6. Wiederholen Sie die Schritte 1-5 auf der anderen Seite.

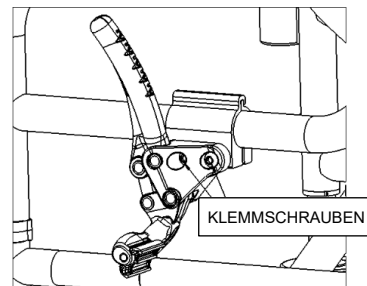

2.5 Raz Sitzes

2.5.1 Montage des Raz Sitzes

1. Achten Sie darauf, dass die vorderen Halterungen in der geöffneten Position befinden. Um die vorderen Halterungen zu öffnen, die Laschen am drehbaren Abschnitt der Halterung zusammendrücken.
2. Schieben Sie die Rückseite des Sitzes über die hinteren Querrohre, während die Vorderseite des Sitzes auf den Rahmen abgesenkt wird. Vergewissern Sie sich, dass die Rücksitzhalterungen unter den Querrohren einrasten.
3. Senken Sie den vorderen Teil des Sitzes weiter ab, bis sich die vorderen Sitzhalterungen an die vorderen Sitzstützrohre schmiegen.
4. Befestigen Sie den Sitz an seinem Platz, indem Sie die vorderen Sitzhalterungen schließen. Um die Sitzhalterung zu schließen, drücken Sie den Clip zusammen und schließen Sie die Halterung um die vorderen Stützrohre.
5. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 in umgekehrter Reihenfolge aus, um den Sitz vom Rahmen zu entfernen.

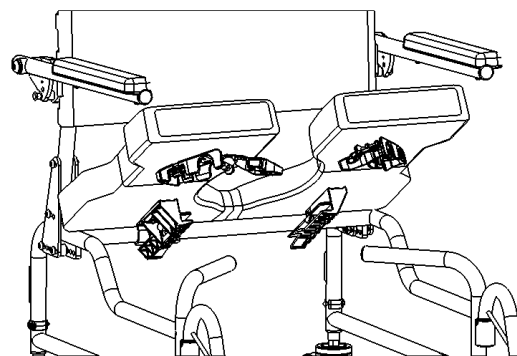


2.5.2 Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) – einstellen

Der Sitz ist um ca. 5 cm (2") nach vorne/hinten verstellbar. Dies ermöglicht das optimale Positionieren der Sitzöffnung um die Sitzhöcker des Benutzers.

Benötigtes Werkzeug: Nr. 2 Kreuzschlitzschraubendreher

1. Lösen Sie den Sitz, indem Sie die vorderen Sitzhalterungen öffnen.
2. Den Sitz auf der Vorderseite zuerst nach oben und dann nach vorn ziehen, um den Sitz vom Stuhl zu lösen.
3. Lösen Sie die acht Schrauben (*aber nicht entfernen*), mit denen die vorderen Sitzhalterungen und die hinteren Sitzhalterungen an der Sitzunterseite befestigt sind.

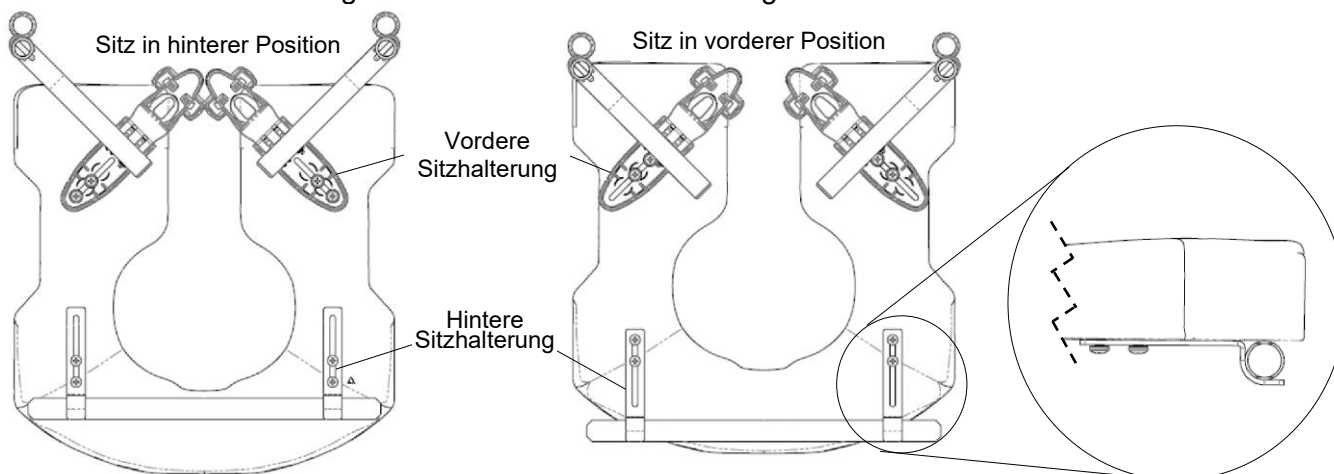


Hinweis: Die Abbildung zeigt die hinteren Sitzhalterungen, zum besseren Verständnis ohne die Halterungen der Toilettenpfanne dargestellt.

4. Sitz wieder auf den Rahmen aufsetzen und die vorderen Sitzhalterungen um die vorderen Sitzstützrohre herum schließen.
5. Schieben/bewegen Sie den Sitz in die gewünschte Position.
6. Stellen Sie sicher, dass die hinteren Sitzhalterungen fest an den hinteren Sitzstützrohren anliegen.
7. Ziehen Sie alle acht Schrauben an, mit denen die vorderen und hinteren Sitzhalterungen am Sitz befestigt sind, um weitere Bewegungen des Sitzes zu verhindern. *Hinweis: Achten Sie darauf, dass die vordere und die hintere Sitzhalterung das vordere und das hintere Sitzstützrohr fest umschließen, bevor Sie den Transfer des Benutzers in den Stuhl zulassen.*

2.6 Einstellbaren Fußstütze


2.6.1 Installieren der einstellbaren Fußstütze

1. Nehmen Sie die Fußstützen aus dem Zubehörkarton.
2. Setzen Sie die Bügelrohre der Fußstütze in die Aufnahmevorrichtungen ein, die an der Vorderseite des Stuhlrahmens verschweißt sind. *Wenn die Stützrohre nach vorne gerichtet sind, greifen die Stifte an den Rohren in Nuten in den Aufnahmevorrichtungen ein und rasten ein.*

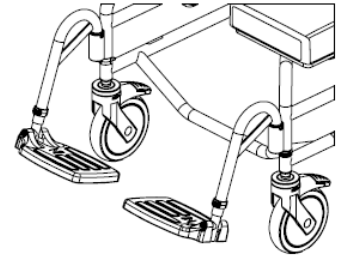


2.6.2 Einstellung der einstellbaren Fußstütze

1. Ziehen Sie einen Kunststoff-Raststift aus einem Bügelrohr der Fußstütze heraus.
2. Stellen Sie das Verlängerungsrohr der Fußplatte senkrecht ein, um die gewünschte Höhe im Bügelrohr der Fußstütze einzustellen.
3. Stecken Sie den Raststift durch das Bügelrohr der Fußstütze und das Verlängerungsrohr. Achten Sie darauf, dass der Raststift vollständig durch das Rohr eingeführt wird und der grüne Kunststoffclip sicher um die Außenseite des Bügelrohres eingerastet ist.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für die andere Fußplatte.

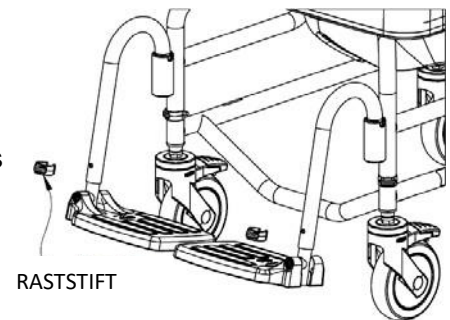

2.7 NUR FÜR HÄNDLER - Halterungen installieren


Alle Befestigungselemente sollten sicher montiert werden. Kontermuttern, die aus irgendeinem Grund entfernt werden, müssen möglicherweise ersetzt und dürfen nicht wiederverwendet werden. Überprüfen Sie die Funktion der Stoppmuttern, wenn Sie diese erneut an der Schraube befestigen. Beim Festziehen sollte ein deutlicher nachweisbarer Widerstand vorhanden sein. Wenn nicht, ersetzen Sie die Stoppmutter durch eine neue. Es wird empfohlen, jährlich zu überprüfen, ob alle Befestigungselemente sicher befestigt sind.

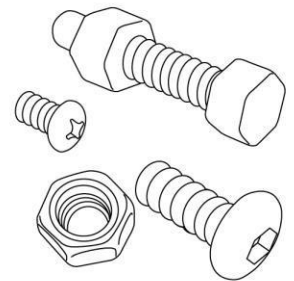

3.0 GEBRAUCH UND BETRIEB

3.1 Hochklappbare Armlehnen

Die Armlehnen können hochgeklappt werden, um das Transferieren zu erleichtern, und rasten beim Herunterklappen automatisch ein (wenn eine optionale Sperre vorgesehen ist).

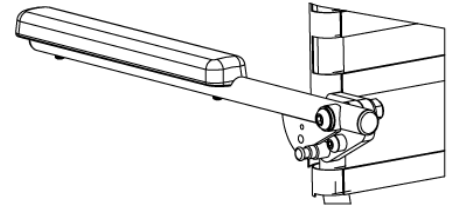


3.2 Rückenpolsterung mit einstellbarer Spannkraft


Die Multi-Position-Rückenlehne wird mit einer Rückenpolsterung mit verstellbarer Spannkraft geliefert, das für optimale Positionierung und Komfort sorgt. Die Polsterung ist abnehmbar und kann in der Waschmaschine gewaschen werden.

Montage der Rückenpolsterung mit einstellbarer Spannkraft:

1. Legen Sie den Stoff gegen die Vorderseite der Rückenlehnenrohre und achten Sie darauf, dass die Klammern an den Gurten, wenn sie umwickelt sind, vom Stoff weg zeigen und die Schlaufen nach unten zeigen.
2. Die ersten (1) und zweiten (2) Gurte befinden sich oberhalb der Querstange.
3. Die dritten (3), vierten (4) und fünften (5) Gurte werden zwischen der Querstange und den Montageplatten der Armlehne positioniert.
4. Der sechste (6) Gurt ist unterhalb der Montageplatten der Armlehne positioniert.
5. Stellen Sie alle Gurte an die Bedürfnisse des Benutzers ein.

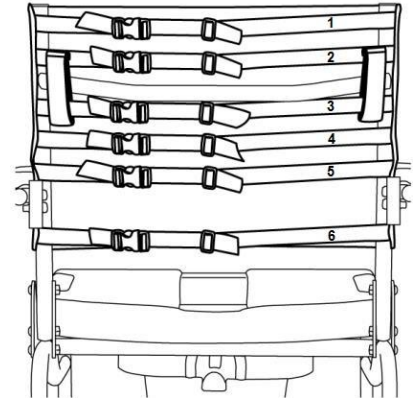

Um die Rückenpolsterung einzustellen, kann jeder Gurt in den Schnallen festgezogen oder gelöst werden, um eine Vielzahl von Positionen zu erreichen. So können beispielsweise die zweiten und dritten Gurte von unten angezogen werden, um eine stärkere Unterstützung im Lendenwirbelbereich des Rückens zu erreichen.

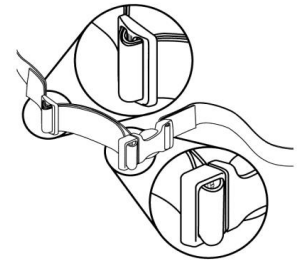


Um die Rückenpolsterung mit verstellbarer Spannkraft zu entfernen, lösen Sie die Schnallen an den Gurten.

3.3 Raz Sitzes

Montage des Raz Sitzes:

1. Achten Sie darauf, dass die vorderen Halterungen in der geöffneten Position befinden. Um die vorderen Halterungen zu öffnen, drücken Sie zum Entriegeln.
2. Schieben Sie die Rückseite des Sitzes über die hinteren Querrohre, während die Vorderseite des Sitzes auf den Rahmen abgesenkt wird. Vergewissern Sie sich, dass die Rücksitzhalterungen unter den Querrohren einrasten.
3. Senken Sie den vorderen Teil des Sitzes weiter ab, bis sich die vorderen Sitzhalterungen an die vorderen Sitzstützrohre schmiegen.
4. Befestigen Sie den Sitz an seinem Platz, indem Sie die vorderen Sitzhalterungen schließen. Um die Sitzhalterung zu schließen, drücken Sie den Clip zusammen und schließen Sie die Halterung um die vorderen Stützrohre.
5. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 in umgekehrter Reihenfolge aus, um den Sitz vom Rahmen zu entfernen.

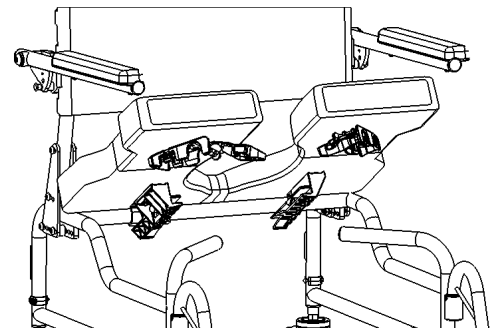

WICHTIG!

VERSUCHEN SIE NIEMALS, DIE SITZHÖHE OHNE HILFE EINES QUALIFIZIERTEN HÄNDLERS ZU ÄNDERN. HÖHERE SITZPOSITIONEN VERRINGERN DIE STABILITÄT DES STUHLS UND KÖNNEN ZUM KIPPEN UND VERLETZUNGEN FÜHREN.

WICHTIG!

RAHMEN- UND SITZEINSTELLUNGEN DÜRFEN NUR VON TECHNIKERN EINES QUALIFIZIERTEN RAZ-HÄNDLERS VORGENOMMEN WERDEN. VERSUCHEN SIE NIEMALS, DEN RAHMENWINKEL DURCH ÄNDERN DER ROLLPOSITION ZU VERSTELLEN. DER RAHMEN SOLLTE IMMER EBEN SEIN. UNSACHGEMÄßE ROLLPOSITIONEN KÖNNEN DIE STABILITÄT DES STUHLS VERRINGERN UND ZUM KIPPEN FÜHREN. DIES KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜR DEN BENUTZER UND/ODER ZU SCHÄDEN AM STUHL FÜHREN.

3.4 Einstellbare Fußstützen

Verstellbare Fußstützen sind bei allen Raz mobilen Dusch- und Toilettenstühlen per Standard enthalten. Bei Verlagerungen lassen sich die Fußstützen hochklappen, wegdrehen oder ganz entfernen.


Einstellbare Fußstützen können für Benutzer mit längeren Beinen mit dem optionalen Verlängerungsrohr der Fußstütze verlängert werden, einem 2 Zoll längeren Rohr, das für jeden Raz Duschstuhl bestellt werden kann.

Einsetzen der verstellbaren Fußstützen:

1. Setzen Sie die Bügelrohre der Fußstütze in die Aufnahmevorrichtungen der Fußstütze ein.
2. Wenn die Bügelrohre nach vorne ausgerichtet sind, greifen die Stifte an den Rohren in Nuten in den Aufnahmevorrichtungen ein und rasten ein.

Einstellen der Länge der verstellbaren Fußstützen:

1. Ziehen Sie den Raststift aus einem Bügelrohr der Fußstütze heraus.
2. Stellen Sie die Fußplatte wieder auf eine für den Benutzer geeignete Länge ein.
3. Stecken Sie den Raststift durch das Bügelrohr der Fußstütze und durch das Innenrohr.

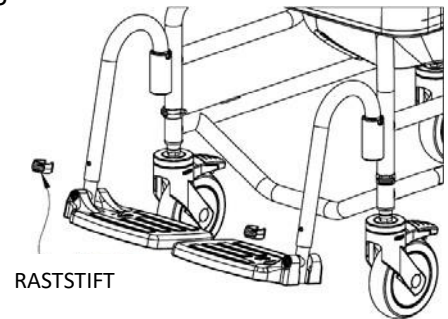


Drehen der verstellbaren Fußstützen:

1. Heben Sie die Bügelrohre der Fußstütze an, um die Stifte zu entriegeln.
2. Drehen Sie die Fußstützen nach außen oder innen.

Um die verstellbaren Fußstützen zu entfernen, heben Sie die Fußstützen aus den Aufnahmhülsen am Rahmen heraus.


3.5 Radsperren – SP600

Die Radsperren am Raz-SP600 können durch Drücken der Griffe nach vorne eingerastet werden. Dadurch wird verhindert, dass sich die Hinterräder drehen. *Für maximale Stabilität **MÜSSEN BEIDE** Radsperren eingerastet sein.* Um die Radsperren zu lösen, ziehen Sie die Griffe nach hinten.

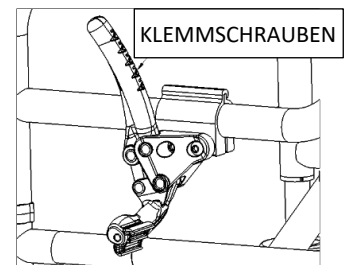

3.6 Toilettenschüssel

Die Raz Toilettenschüssel ist mit einer länglichen Form konzipiert, die direkt unter den Sitz passt, um Rückenspritzer zu minimieren. In der Mitte der Schüssel befindet sich ein einzigartiger Spritzschutzrand. Die hochglänzende Oberfläche erleichtert das Reinigen und Spülen, während der Ausgießer und der Griff Komfort beim Entleeren bieten. Das Entfernen der Toilettenpfanne wird durch Verschieben der Pfanne nach hinten erzielt. *HINWEIS: Achten Sie beim Wiedereinsetzen der Schüssel darauf, dass die Schüssel in die grünen Kunststoffhalterungen geführt und bis zum Anschlag nach vorne geschoben wird.*

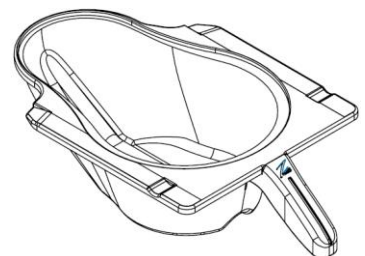

3.7 Rollen

Jede Rolle am Raz mobilen Dusch- und Toilettenstuhl ist mit einem doppelten Sperrmechanismus ausgestattet. Dieser verhindert, dass die Rolle gleichzeitig schwenkt und rollt. Um die Doppelsperre zu aktivieren, treten Sie auf das Ende des Rollenbremshebels, bis er in der Position „on“ einrastet. Um die Doppelsperre zu deaktivieren, treten Sie auf das erhöhte Ende des Hebels, bis sie freigegeben wird.



WICHTIG!

EIN QUALIFIZIERTER RAZ HÄNDLER SOLLTE KONTAKTIERT WERDEN, UM ALLE BEFESTIGUNGSELEMENTE, ROLLEN- UND RADSPERREN, BESCHLÄGE UND ALLE ANDEREN BEWEGLICHEN BAUTEILE MINDESTENS EINMAL PRO JAHR ZU ÜBERPRÜFEN.

4.0 REINIGUNG UND PFLEGE

4.1 Reinigung nach jedem Gebrauch

4.1.1 Toilettentpfanne

1. Entfernen Sie die Toilettentpfanne und leeren Sie den Inhalt.
2. Waschen Sie die Pfanne mit einer Mehrzweck-Desinfektionsreinigungslösung aus. Verwenden Sie ggf. eine weiche Bürste.
3. Vor der Lagerung oder Wiederverwendung gründlich abspülen.

HINWEIS: Eine Reinigung mit heißem Seifenwasser und anschließendem Desinfektionsspray kann die Mehrzweck-Desinfektionsreinigungslösung ersetzen.

4.1.2 Sitz

1. Mit einem Mehrzweck-Desinfektionsreiniger besprühen und bei Bedarf mit einer weichen Bürste abreiben.
2. Vor der Lagerung oder Wiederverwendung mit einem Wasserspray spülen.
Den Sitz **NICHT** in Wasser oder Reinigungslösungen **EINTAUCHEN**.
3. Für eine gründlichere Reinigung entfernen Sie den Sitz vom Mobiler-Duschstuhl, um einen besseren Zugang zur Unterseite des Sitzes und um die Öffnung des Sitzes herum zu ermöglichen.

4.2 Reinigung nach Bedarf

4.2.1 Rückenpolsterung mit einstellbarer Spannkraft

1. Entfernen Sie die Kunststoffschnallen und Dreigleiter von den Gurten der Rückenpolsterung und achten Sie darauf, wie die Gurte beim Entfernen durch die einzelnen Bauteile gewickelt werden.
2. Entfernen Sie die Rückenpolsterung vom Rückenrahmen und waschen Sie diese in der Waschmaschine mit einem Feinwaschmittel in warmem Wasser bei einem normalen oder schonenden Waschgang. Fügen Sie weiteres Riemenzubehör wie den H-Gurt, den Becken- und Brustpositionierungsgurt hinzu.
3. Montieren Sie die Rückenpolsterung und andere Positionierungszubehöerteile auf dem Stuhl und lassen Sie diese trocknen.
Trocknen Sie die Rückenpolsterung **NICHT** in einem Wäschetrockner, da sonst Schäden an der Polsterung auftreten können.
4. Montieren Sie alle Kunststoffschnallen und Dreigleiter auf die Gurte.
5. Stellen Sie die Gurte auf die gewünschte Spannkraft ein.

4.2.2 Rahmen, Armlehnen, einstellbare Fußstützen und andere Bauteile

1. Den Rahmen und die Bauteile mit einem Mehrzweck-Desinfektionsreiniger einsprühen, mit einer weichen Bürste reinigen und mit Wasser abspülen.
2. Sprühen Sie bei Bedarf den Rahmen und die Bauteile mit einem verdünnten (10 Teile Wasser zu 1 Teil Lösung) Kalzium/Kalk-Entferner (z. B. CLR), schrubben Sie mit einer weichen Bürste und spülen Sie ihn gründlich mit Wasser ab.
Mischen Sie **NICHT** eine Kalzium/Kalk-Entfernungslösung mit anderen Flüssigkeiten, da sonst giftige Dämpfe entstehen können.
Verwenden Sie an den Raz-Bauteilen **KEINE** chlorhaltigen Bleichmittel.

Dem Benutzer wird empfohlen, dass ein qualifizierter Raz-Händler alle Befestigungselemente und Untereinheiten ständig überprüft oder wenn Grund zur Sorge um die Funktion des Stuhls besteht.

Mehrmals im Jahr sollten der Stuhl und seine Bauteile mit einer verdünnten Kalzium/Kalk-Entfernungslösung abgewischt werden, um Ablagerungen zu reduzieren, gefolgt von einem Spülgang mit heißem Wasser.

Um das Risiko von Schimmelbildung zu verringern, sollte der gesamte Stuhl nach der letzten Spülung und vor der Lagerung oder Verwendung mit einem weichen, trockenen Tuch abgewischt werden.

4.2 Empfohlene Reinigungsprodukte

Aufgabe	Empfohlene Produkte
Allgemeine Reinigung	Antibakterielles Reinigungsmittel
Oberflächen-Desinfektionsmittel Mittelstarkes Desinfektionsmittel	Oxiver TB (Virox Technologies Inc.) SepteFX 7D-11 (Titan Worldwide Inc.)
Kalzium/Kalk-Entferner	CLR

WICHTIG!

VERWENDEN SIE KEINE ABRASIVEN SCHEUERPULVER ODER SCHEUERPADS AUF DEM RAZ DUSCH- UND TOILETTESTUHL.

TAUCHEN SIE DEN RAZ MOBILEN DUSCH- UND TOILETTESTUHL NICHT INS WASSER EIN.

NACH DER REINIGUNG GRÜNDLICH ABSPÜLEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS ALLE SEIFEN- ODER REINIGUNGSMITTELRESTE ENTFERNT WURDEN.

VERWENDEN SIE KEINE REINIGUNGSMITTEL, OHNE DIE ANWEISUNGEN DES PRODUKTS ZU BEFOLGEN UND GEEIGNETE VORSICHTSMASSNAHMEN GEGEN DIE EXPOSITION DES MENSCHEN GEGENÜBER CHEMIKALIEN ZU TREFFEN.

5.0 MELDUNG UNERWÜNSCHTER EREIGNISSE

WICHTIG!

Etwaige schwer wiegende Zwischenfälle in Verbindung mit diesem Gerät mit Todesfolge, möglicher Todesfolge, schweren Verletzungen oder schwerer gesundheitlicher Beeinträchtigung sind unverzüglich zu melden an:

- **Der Hersteller (Kontaktangaben siehe das vorliegende Handbuch) und**
- **Die zuständige Behörde oder die entsprechende Aufsichtsbehörde des Landes, in dem der Benutzer oder der Patient seinen Wohnsitz hat.**

6.0 BESCHRÄNKTE GARANTIE

Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer/Benutzer von Raz mobilen Dusch- und Toilettenstühlen, die bei einem qualifizierten Raz-Händler gekauft wurden.

Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechtsansprüche, aber Sie können je nach Region und Land zusätzliche Rechtsansprüche haben.

Diese Garantie wird verlängert, um den Gesetzen und Anforderungen der Länder/Provinzen zu entsprechen.

Nur gegenüber dem Erstkäufer/Benutzer garantiert Raz Design für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum, dass seine Grundrahmen- und Rückenrahmenbauteile frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Alle anderen Bauteile des Raz Mobiler-Duschstuhls sind für einen Zeitraum von einem (1) Jahr abgedeckt und unterliegen dem normalen Verschleißschutz. Wenn innerhalb dieser Garantiezeit ein solches Produkt nachweislich defekt ist, wird das Teil nach Ermessen von Raz Design repariert oder ersetzt. Diese Garantie umfasst keine Arbeits- oder Versandkosten, die beim Austausch, der Installation von Teilen oder der Reparatur eines solchen Produkts anfallen.

Für Garantieleistungen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihren Raz mobilen Dusch- und Toilettenstuhl gekauft haben. Für den Fall, dass Sie keine befriedigende Garantieleistung erhalten, wenden Sie sich bitte direkt an Raz Design, indem Sie die Kontaktinformationen am Anfang oder am Ende dieses Handbuchs verwenden. Bitte geben Sie in Ihrer Korrespondenz den Namen und die Adresse Ihres Händlers, den Produkttyp, das Kaufdatum, die Seriennummer des Stuhls (auf einem grauen Etikett am Stuhlrahmen zu finden) sowie die Art des Problems mit dem Produkt an. Senden Sie die Produkte nicht ohne vorherige Genehmigung an den Hersteller zurück.

Einschränkungen und Ausschlüsse:

Die vorstehende Garantie gilt nicht für Produkte mit Seriennummer, wenn die Seriennummer entfernt oder entstellt wurde, sowie für Produkte, die fahrlässig oder durch einen Unfall beschädigt wurden. Bei unsachgemäßer Bedienung, Wartung oder Lagerung kann der Garantieanspruch auf den Raz mobilen Dusch- und Toilettenstuhl nichtig sein.

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Raz Design modifiziert wurden. Dazu gehören unter anderem Modifikationen durch die Verwendung von nicht autorisierten Teilen oder Zubehörteilen, Produkte, die durch Reparaturen an Bauteilen durch eine Person oder Personen, die nicht bei einem qualifizierten Raz-Händler angestellt sind, beschädigt wurden, oder ein Produkt, das durch Umstände beschädigt wurde, die außerhalb der Kontrolle von Raz Design liegen. Nur Raz Design hat die Befugnis zu bestimmen, ob die Umstände für eine Garantie in Betracht kommen oder nicht. Die Garantie gilt nicht für Probleme, die auf normalen Verschleiß oder die Nichteinhaltung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen zurückzuführen sind.

Die vorstehende Garantie ist ausschließlich und ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder impliziten Garantien, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Das einzige Rechtsmittel bei Verstößen gegen irgendeine Gewährleistung beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch des defekten Produkts in Übereinstimmung mit den in diesem Dokument enthaltenen Bedingungen.

Die Anwendung einer impliziten Garantie erstreckt sich nicht über die Dauer der hierin vorgesehenen ausdrücklichen Garantie. Raz Design haftet nicht für Folge- oder Begleitschäden an einem Teil des oder dem ganzen Raz mobilen Dusch- und Toilettenstuhl.

Der Rahmen und das Beschlagmaterial von Raz Design Inc. sind aus Edelstahl gefertigt, für den wir eine lebenslange Garantie gegen Korrosion gewähren. Bitte beachten Sie, dass diese lebenslange Garantie nur auf den Erstkäufer/Benutzer von Raz Duschstühlen gewährt wird, die bei einem qualifizierten Raz-Händler gekauft wurden. Die Nichteinhaltung der ordnungsgemäßen Reinigungshinweise kann zu Korrosion am Rahmen führen, wodurch diese Garantie erlischt. Darüber hinaus unterliegen alle Korrosionsansprüche einer Überprüfung und es kann die Rückgabe des betreffenden Gerätes zur gründlichen Prüfung verlangt werden, bevor eine Ersatzbestellung bearbeitet werden kann.

7.0 KONTAKTE

Es ist wichtig, dass der Raz mobile Dusch- und Toilettenstuhl richtig montiert ist und alle Einstellungen sorgfältig durchgeführt werden. Aktuelle Handbücher können unter www.razdesigninc.com heruntergeladen werden. Zur Klärung eines Abschnitts dieses Handbuchs wenden Sie sich bitte an den kanadischen Händler oder Hersteller.



HERSTELLER

Raz Design Inc.
135 Rainside Rd. Toronto, ON, Canada, M3A 1B7
877.720.5678 / +1.416.751.5678
info@razdesigninc.com



VERTEILER

Wolturnus GmbH
Urftseestr. 1
53937 Schleiden-Gemünd
Deutschland
+49 (0) 32221/85313-5
info@wolturnus.dk

VERTEILER

Senectovia Medizinaltechnik AG
In der Luberzen 1
8902 Urdorf
Switzerland
044 735 35 45
info@senectovia.ch

WICHTIG!

PRODUKTE, DIE NICHT MEHR GEBRAUCHT WERDEN KÖNNEN, SIND GETRENNT VOM HAUSMÜLL ZU ENTSORGEN. DIES MUSS GEMÄß DEN LOKALEN UND NATIONALEN VORSCHRIFTEN FÜR UMWELTSCHUTZ UND ROHSTOFFRECYCLING ERFOLGEN. WEITERE INFORMATIONEN ZUR KORREKTEN ENTSORGUNG FINDEN SIE AUF DER WEBSITE IHRER ÖRTLICHEN BEHÖRDE.

WENN SIE JEMALS DAS GEFÜHL HABEN, DASS EIN TEIL DES RAZ DUSCHSTUHLS WARTUNGSPFLICHTIG IST, WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER. JEGLICHE PROBLEME, DIE DEN SICHEREN GEBRAUCH DES STUHLs BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTEN, MÜSSEN UNVERZÜGLICH BEHOBEN WERDEN. DER HÄNDLER, DER DEN DUSCHSTUHL GELIEFERT HAT, MUSS KONTAKTIERT WERDEN, DAMIT REPARATUREN VOR DER BENUTZUNG DES STUHLs DURCHGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN. DEM HÄNDLER MUSS KLARGEMACHT WERDEN, DASS DER DUSCHSTUHL WARTUNGSBEDÜRFTIG UND BIS ZUR REPARATUR UND BEHEBUNG ALLER PROBLEME NICHT EINSATZBEREIT IST.

WENN IHR HÄNDLER AUS IRGEND EINEM GRUND NICHT AUF IHRE ZUFRIEDENHEIT REAGIERT, KONTAKTIEREN SIE BITTE RAZ DESIGN:

PER E-MAIL	info@razdesigninc.com
PER TELEFON	877.720.5678 (Nordamerika)
	+1.416.751.5678 (übrige Länder)