




Siirrettävät suihku WC-tuolit

Raz-CAT (Z303)

Käyttäjän ja jälleenmyyjän opas

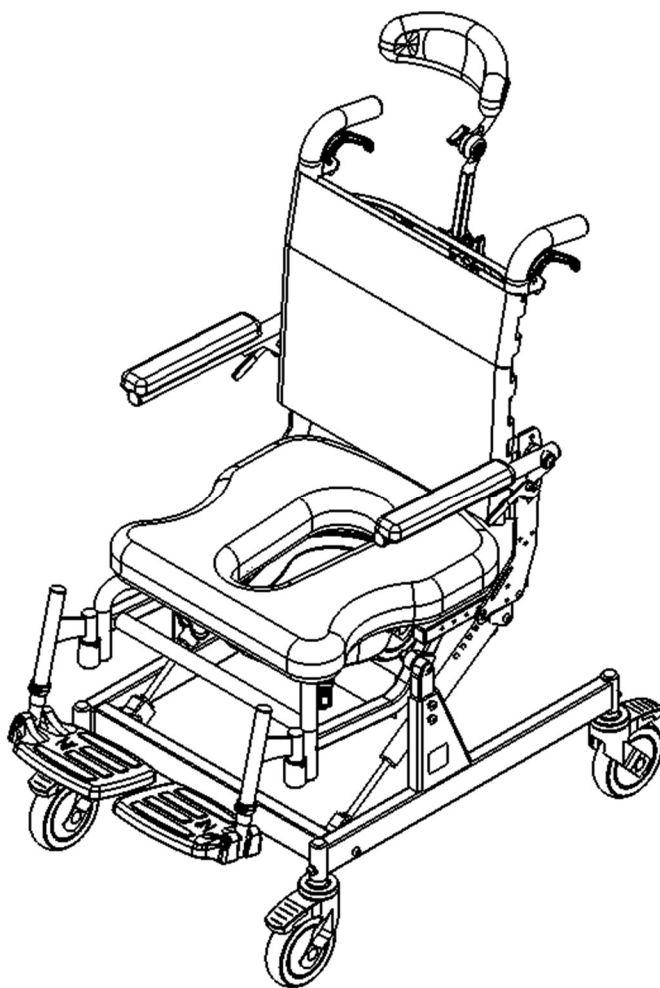

EC REP

Advena Ltd. Tower Business Center
2nd Flr, Tower Street
Swatar, BKR 4013 Malta

UKRP

Advena Ltd. Pure Offices, Plato Close
Warwick, CV34 6WE UK

CH REP

Senectovia Medizinaltechnik AG
In der Luberzen 1,
8902 Urdorf, Switzerland



BASIC UDI-DI: 628758RAZDESIGNINC2004V9

RTD034Flr06 Tarkistuspäivä: 2026-02-26

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita!

On tärkeää, että siirrettävä Raz-suihku-alusastiatuoli kootaan oikein ja kaikki säädöt tehdään huolellisesti. Varmista, että käyttäjä(t), jälleenmyyjä(t) ja hoitaja(t) ovat lukeneet tämän ohjeen ja ymmärtäneet perusteellisesti siirrettävän suihku-alusastiatuolin turvallisen käytön. Ajantasaiset käyttöohjeet ovat saatavana verkossa osoitteessa www.razdesigninc.com. Saadaksesi selventäviä tietoja mistä tahansa tämän ohjeen osasta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajaan.

Raz-suihku- ja wc-tuolien sekä niiden lisävarusteiden luvaton muokkaaminen/muuttaminen tai väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty. Tällaiset toimet mitätöivät välittömästi kaikki sovellettavat takuut ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja, laitteen toimintahäiriöitä tai säännösten noudattamatta jättämistä. Raz Design ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat luvattoman, muokatun tai muutetun laitteen käytöstä. Käyttäjä ottaa kaiken vastuun siitä, että laitetta käytetään tarkoitetulla sekä virallisessa dokumentaatiossa määritellyllä tavalla.



VALMISTAJA

Raz Design Inc.
135 Railside Rd. Toronto, ON, Canada, M3A 1B7
877.720.5678 / +1.416.751.5678
info@razdesigninc.com



JALLEENMYYJAASI

Suomi
90240 Oulu, Finland
040 705 5886
info@rehaco.fi

TUOLIN LUOKITUS SUURIMMAN KÄYTTÄJÄN PAINON MUKAAN

CAT	136 kg (300 lbs)
-----	------------------

TURVALLISUUSVAROITUKSIA HUOMIOITAVAKSI JÄLLEENMYYNITARKOITUKSESSA

LAITE ON SOPIVA TYYPIN A SUUREEN KÄYTTÖKUORMITUKSEEN (esim. LAITOKSIIN), EIKÄ SITÄ KOSKAAN SAA KÄYTTÄÄ MIHINKÄÄN MUUHUN TARKOITUKSEEN, KUIN ALUN PERIN TARKOITETTUUN

Vakaus

Kaikkien mallien pyörät on varustettu kaksoislukoilla. Jalkavipu aktivoi sekä rullauslukon että kääntymislukon. **Parhaan etu-, taka- ja sivusuuntaisen vakauden saavuttamiseksi eteenpäin ja sivusuuntaan on tärkeää, että kaikki suihkutuolin pyörät ovat ulospäin ennen kuin lukot kiinnitetään.** Avaa valinnainen pyörien suunnan lukko, jos se kuuluu tuolin varusteisiin, ennen kuin kierrät takapyöriä sisään päin ja kytket pyörien kaksoislukot.



KÄYTTÄJÄ EI SAA nojata eteenpäin istuessaan siirrettävässä suihku-alusastiatuolissa, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen eteenpäin.

KÄYTTÄJÄ EI SAA ajaa ramppia alaspäin ilman hoitajaa, joka voi pidätellä tuolia laskeutumisen aikana.

PYÖRIEN LUKOT EIVÄT OLE JARRU! Älä koskaan käytä pyörien lukkoja suihkutuolin hidastamiseen, kun laskeudutaan kaltevia pintoja, koska tästä voi aiheutua tuolin kaatuminen liikkeen suuntaan.



Vakaus sivusuunnassa

KÄYTTÄJÄ EI SAA nojata siirrettävän Raz-suihku-alusastiatuolin reunan yli, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.

KÄYTTÄJÄ EI SAA yrittää poimia esineitä lattialta nojaamalla ja kurottamalla – käytä tartuntapihtejä tai pyydä apua.

KÄYTTÄJÄ EI SAA asettaa siirrettävää Raz-suihku-alusastiatuolia kaltevalle pinnalle, koska se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.




Rampit ja muut kaltevat pinnat

Rampit ja muut pinnat, jotka eivät ole suoria (kuten kallistukset pyörätuolisuihkuissa) on hoitajan testattava sen varmistamiseksi, etteivät ne vaaranna tuolin vakautta. Tähän prosessiin on pyydettyä pätevän terveydenhuollon ammattilaisen apua.

ÄLÄ vedä tai työnnä Raz-CAT:ia ylös tai alas kaltevaa pintaa tai ramppia, joka on jyrkempi kuin 1:12 suhde (5° kallistus).

ÄLÄ salli käyttäjää liikuteltavan (työnnettävän tai vedettävän) Raz-CAT-suihku-astiatuolissa muuten kuin hoitajan toimesta.

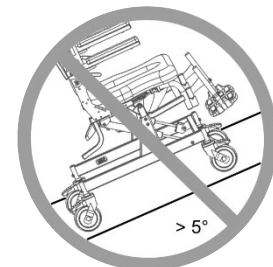

TARKISTA AINA ENNEN KENENKÄÄN KÄYTTÄJÄN SIIRTÄMISTÄ TUOLIIN, ETTÄ RAZ-CAT-SUIHKUTUOLI ON VAKAA.

Upottaminen

Siirrettävää Raz-suihku-alusastiatuolia ei ole tarkoitettu käytettäväksi allastuolina. Älä upota suihkutuolia veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen kokonaan tai osittain. Upottaminen voi aiheuttaa suihkutuolin vaurioitumisen.




Kloorille altistuminen

Sopii käytettäväksi märillä alueilla, mutta ei uima-altaissa ja vastaavasti syövyttävissä ympäristöissä.

ÄLÄ säilytä laitetta uima-altaiden läheisyydessä, koska ilmassa oleva kloori voi aiheuttaa ruosteen muodostumista joihinkin tuolin ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin osiin.

Siirtymiset

Vaarallisin vaihe minkä tahansa suihkutuolin käytössä on siirtyminen. Koska jokaisella tuolilla on erilaiset vakausominaisuudet, on tärkeää käydä läpi ja testata siirtymistekniikat huolellisesti, jotta varmistetaan menettelyn turvallisuus. Testisiirrot on suoritettava sellaisen hoitajan toimesta, joka voi estää tuolin kaatumisen tai liikkumisen siirtymisen aikana. Jos tunnet, että siirtymisiä ei voida toistuvasti tehdä turvallisesti, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, joka tuntee siirtymistekniikat ja vaihtoehdot. Henkilöiden, jotka eivät osaa asianmukaisia siirtymistaitoja, on haettava apua siirtymisien aikana, ja käytettävä mahdollisesti mekaanista nostolaitetta.

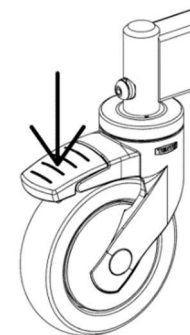

Siirtyminen Raz-CAT-suihkutuoliin


Lukitse **AINA** kaikki neljä pyörää ulospäin (etupyörät eteenpäin) parhaan tuolin vakauden saavuttamiseksi.



Siirtymistä ei saa koskaan yrittää, jos suihkutuoli on liukkaalla pinnalla. Suositellaan, että siirrot tehdään puhtailla, kuivilla ja luistamattomilla pinnoilla. Kovat lattiapinnat, kuten laatat, puu tai betoni eivät ehkä tarjoa riittävää pitoa estämään lukittujen etu- ja/tai takapyörien liukuminen. Kokonaan matolla peitetty pinta on ihanteellinen. Huomaa, että rätti- ja suihkumatot voivat liukua lattioilla ja muodostaa näin vaarallisen pinnan.

ÄLÄ seiso millään Raz-CAT:n rungon osalla.

ÄLÄ KOSKAAN käytä jalkalevyjä apuna siirtymisissä. Se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen. Jalkatuet on käännettävä sivulle tai poistettava kokonaan siirtymisen aikana, jotta suihkutuoliin on esteetön pääsy.

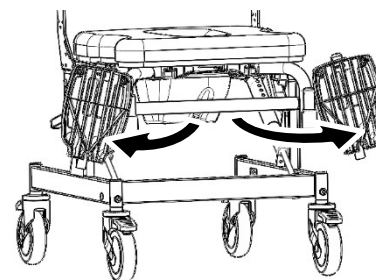

Kallistustoiminto

AINA tarkista kallistustoiminto ja varmista, että molemmat lukituskaasujouset ja vapautuskaapelirakenteet ovat täysin toimintakunnossa **ENNEN** kuin käyttäjä tulee tuoliin.

Lantiovyö voi toimia käyttäjän lisäturvatoimena. Raz-CAT:iin voidaan tilata lisävarusteena lantiotukihihna.

ÄLÄ yritä kallistaa tuolissa istujaa, jos hoitaja ei fyysisesti pysty suorittamaan kallistusta sujuvasti ja turvallisesti.

ÄLÄ KOSKAAN jätä käyttäjää Raz-CAT-tuoliin ilman valvontaa.

Raz-CAT **Ei ole** tarkoitettu kuljetuslaitteeksi tai pitkäaikaiseksi istuinjärjestelmäksi.

TÄRKEÄÄ!

KÄYTTÄJÄÄ EI SAA KOSKAAN JÄTTÄÄ RAZ-SUIHKUTUOLIIN ILMAN VALVONTAA.

TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ NOSTA RAZ-ALUSASTIASUIHKUTUOLIA JA SEN KÄYTTÄJÄÄ KÄSINOJISTA TAI JALKATUISTA!

KÄYTTÖTARKOITUSILMOITUS

YKSILÖLLISESTI KONFIGUROITAVA, LIIKKUVA JA KIINTEÄ WC-TUOLI KÄYTETTÄVÄKSI SUIHKUSSA JA WC:SSÄ.


TÄRKEÄÄ!

KONSULTOI TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTA, JOS KÄYTTÄJÄNÄ KOKEET EPÄMUKAVUUTTA, LIIKKUVUUDEN MUUTOKSIA TAI VAIKEUKSIA LAITTEEN KÄYTÖSSÄ.

TÄRKEÄÄ!

VARMISTA AINA, ETTÄ ISTUIN ON OIKEIN ASENNETTU JA KIINNITETTY ENNEN KUIN KÄYTTÄJÄ SIIRRETÄÄN TUOLIIN. ISTUIMEN TAKAKANNATTIMET ON KIINNITETTÄVÄ KOKONAAN ISTUIMEN TAKATUKIPUTKIEN ALLE. ISTUIMEN ETUKANNATTIMET ON LUKITTAVA TIUKASTI ISTUIMEN ETUTUKIPUTKIEN YMPÄRILLE. SEKÄ ISTUIMEN ETU- ETTÄ TAKAKANNATTIMET ON KIINNITETTÄVÄ PAIKALLEEN KIRISTÄMÄLLÄ ISTUIMEN ALLA SIJAITSEVAT 8 RUUVIA.

KÄYTTÄJÄLLE JA/TAI HOITAJILLE ON ANNETTAVA OHJEET ISTUIMEN ASIANMUKAISESTA IRROTTAMISESTA JA ASENTAMISESTA PUHDISTUSTA VARTEN.

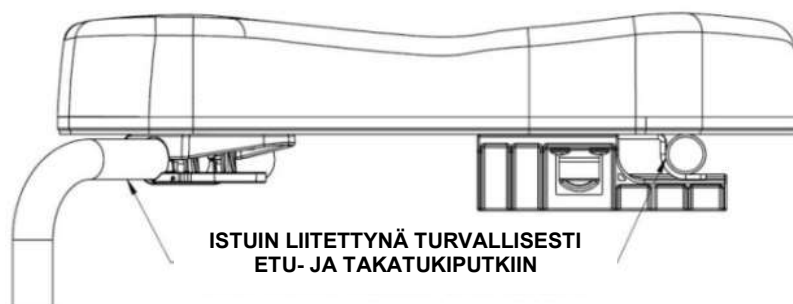

TÄRKEÄÄ!

RAZ-CAT ON TARKOITETTU SEURAAVAAN KÄYTTÖÖN:

- SUIHKUSSA KÄYMISEN/KYLPEMISEN, WC:SSÄ KÄYMISEN JA MUIDEN HENKILÖKOHTAISEN HYGIENIAN HOITOON LIITTYVIEN TOIMINTOJEN APUVÄLINEENÄ;
- KÄYTTÄJÄN KEHON TUKEMISEEN ISTUVASSA TAI KALLISTETUSSA ASENNOSSA;
- HOITAJAN AVUSTAMANA TAI ILMAN;
- WC-KÄYNTIIN TAVALLISEN WC-ISTUIMEN YLÄPUOLELLA TAI ALUSASTIAISTUIMEN ALUSASTIAN KERA;
- AINOASTAAN SISÄKÄYTTÖÖN;
- SEKÄ TYYPIN A KORKEAN KÄYTTÖASTEEN (esim. LAITOKSESSA) YMPÄRISTÖISSÄ ETTÄ KOTIYMPÄRISTÖISSÄ

RAZ-CAT EI SUORITA HOIDOLLISIA TAI DIAGNOSTISIA TOIMINTOJA, EIKÄ SE OLE TARKOITETTU MIHINKÄÄN HOIDOLLISIIN TAI DIAGNOSTISIIN TARKOITUKSIIN. KAIKKI RAZ-PERHEEN VALMISTAMAT TUOTTEET OVAT EI-STERIILEJÄ, UUDELLEENKÄYTETTÄVIÄ, EI-INVASIIVISIA JA EI-IMPLANTOITAVIA.

RAZ-CAT TARKOITETTU HENKILÖIDEN KÄYTTÖÖN, JOILLA ON LIIKKUMISRAJOITTEITA, JOILLA VOI OLLA VAIKEUKSIA SEISOA TAI SÄILYTTÄÄ TASAPAINO SUORITTAESSAAN TOIMINTOJA, KUTEN SUIHKUSSA KÄYNTI, WC:SSÄ KÄYNTI TAI HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA. TYYPILLISILLÄ KÄYTTÄJILLÄ ON RAJALLINEN KESTÄVYYS JA ASENNONHALLINTA, JA HE SAATTAVAT TARVITA APUA HOITAJALTA TOIMINNOISSA, KUTEN SUIHKUSSA KÄYNTI, WC:SSÄ KÄYNTI TAI HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA. TUOTTEISSA, JOISSA ON KALLISTUSTOIMINTO, KALLISTUSTOIMINNON KÄYTTÖ SAATTAA OLLA VASTA-AIHEINEN, JOS KÄYTTÄJÄ ON HERKKÄ LEIKKAUSVOIMILLE ISTUINPINNOILLA AVATTAESSA ISTUIN TAAKSEPÄIN.


TUOTTEEN MERKINNÄT JA TAI SYMBOLIT

TUOTTEEN NIMIKKEET	RAZ-CAT
VALMISTAJAN OSOITE	 Raz Design Inc. 135 Railside Road Toronto, ON Canada M3A 1B7
VALTUUTETUN EDUSTAJAN TIETOJA	EC REP UKRP CH REP
TUOTTEEN KUVAUS	SN CAT-XXXXXX
UDI-DI	UDI 628758003038
LÄÄKINNÄLLINEN LAITE	MD
EUROOPPALAINEN VAATIMUSTENMUKAISUUS	CE
VALMISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ	
KÄYTTÄJÄN ENIMMÄISPAINO	
LUE KÄYTTÖOPAS	

ISTUIMEN ETUKANNAKKEEN ASENNUS (JOS KÄYTÖSSÄ)



TORONTO, KANADA

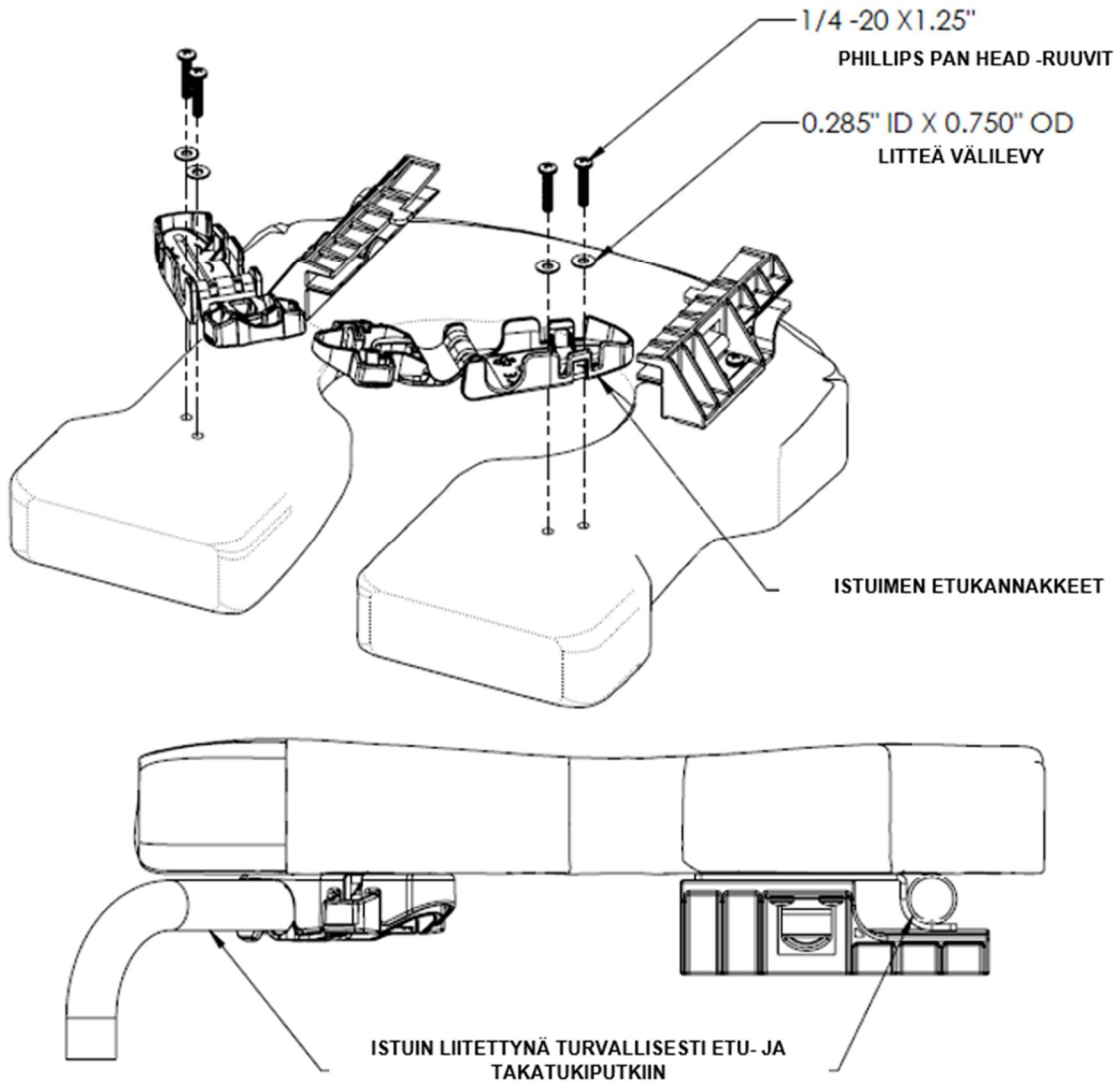

Katso yllä olevasta kuvasta asennusohjeet.

Huom.: Asenna Phillips Pan Head -ruuvit käsin. Sähkötyökalujen käyttö voi aiheuttaa kannakkeiden muodonmuutoksen.

Varmista asennuksen jälkeen, että kannakkeet on kunnolla kiinnitetty istuimeen. Avaa ja sulje kannakkeet tarkistaaksesi niiden toimivuuden.


Varmista aina, että istuin on oikein asennettu ja kiinnitetty. Takakoukkujen on oltava täysin kytkettyjä ja etukannattimien on oltava salvattuja ja lukittuja istuimen etutukiputkien ympärille.

KÄYTTÄJÄN JA JÄLLEENMYYJÄN OHJE SISÄLLYSLUETTELO

1.0 YLEISIÄ TIETOJA	10
1.1 Siirrettävän Raz-CAT-suihku-alusastiatuolin yleiskuvaus	10
1.2 Siirrettävän Raz-CAT-suihku-alusastiatuolin tekniset tiedot.....	10
2.0 KOKOONPANO (VAIN JÄLLEENMYYJÄLLE/JAKELIJALLE).....	11
2.1 Selkänojan	11
2.1.1 Selkänojan asennus	11
2.1.2 Selkänojan kulman säätö.....	11
2.1.3 Selkänojan syvyys säätö.....	11
2.1.4 Säädettävän selkäpehmusteen säätö	12
2.2 Pyörien asennus	12
2.3 Käsinojen säätö – Vain Adjusta-Back-vaihtoehto.....	12
2.3.1 Käsinojan korkeuden säätö.....	12
2.3.2 Käsinojan kulman säätö.....	12
2.4 Raz Istuimen	13
2.4.1 Raz Istuimen asennus	13
2.4.2 Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) – Säättäminen	13
2.5 Istuimen korkeuden säätö lattiasta	13
2.6 Jalkatukien	15
2.6.1 Vakiomallin, MFX8- ja MFX12-jalkatukien asennus	15
2.6.2 Vakiomallisten ja MFX12-jalkatukien säätö	15
2.6.3 MFX 8 -jalkatuen säätö	15
2.7 Muotoillun pääntuen säätö	15
2.8 Kiinnitysten asennus	15
3.0 KÄYTTÖ JA TOIMINTA	16
3.1 Kallistustoiminto	16
3.1 Tilt-Assist-poljin	16
3.3 Käännettävä käsinoja	16
3.4 Säädettävä selkäpehmuste	17
3.5 Raz istuin	17
3.6 Vakiomalliset MFX12-jalkatuet	18
3.7 Muotoiltu pääntuki	18
3.8 Alusastia	18
3.9 Pyörät	18
4.0 PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO	19
4.1 Puhdistus jokaisen käytön jälkeen.....	19
4.1.1 Alusastia	19
4.1.2 Istuin.....	19
4.2 Puhdistus tarvittaessa	19
4.2.1 Säädettävä selkäpehmuste.....	19
4.2.2 Runko, käsinojat, säädettävät jalkatuet ja muut osat.....	19
4.3 Suositellut puhdistustuotteet	19
5.0 VAARATILANTEIDEN ILMOITTAMINEN.....	20
6.0 RAJOITETTU TAKUU	20
7.0 YHTEYSTIEDOT	21

1.0 YLEISIÄ TIETOJA

1.1 Siirrettävän Raz-CAT-suihku-alusastiatuolin yleiskuvaus

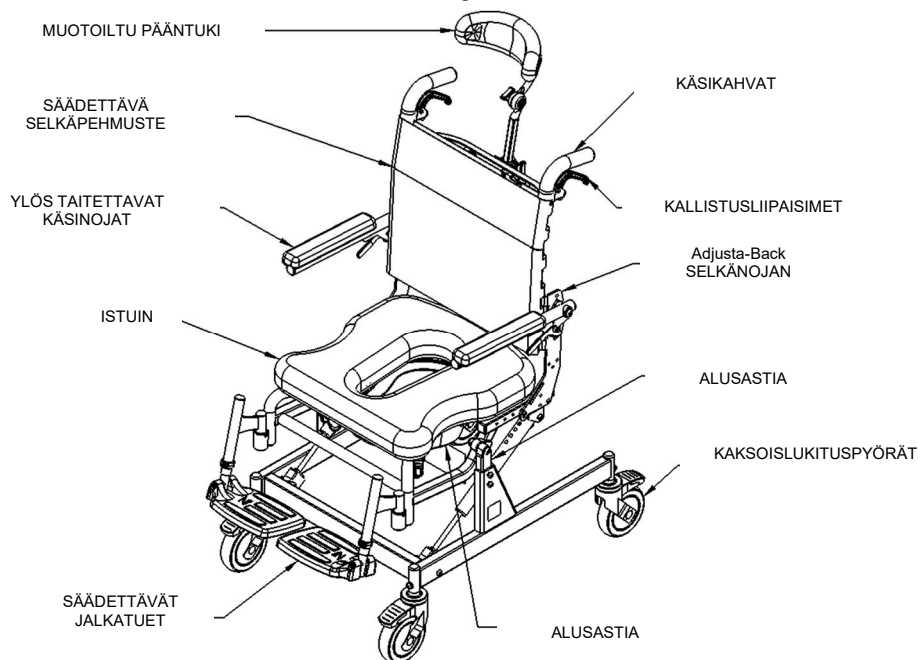

1.2 Siirrettävän Raz-CAT-suihku-alusastiatuolin tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT	Raz-CAT
PAINOKAPASITEETTI	136 kg (300 lbs)
RUNGON LEVEYS (istuimen runko)	46 cm (18")
TAKARUNGON PAINO	35 cm (14"), 40 cm (16") tai 46 cm (18")
KOKONAISSLEVEYS	58 cm (23") jossa 46 cm (18") takarunko 55 cm (21,75") jossa kapeampi takarunko
KOKONAISPITUUS (0° kallistuksessa, sis. jalkatuot)	86 cm (34")
KOKONAISPITUUS (40° kallistuksessa, sis. jalkatuot)	126 cm (49,5")
ISTUIMEN LEVEYS (alusastia-istuin)	46 cm (18")
ISTUIMEN SYVYYS (takatolpan edestä istuimen etureunaan)	28-41 cm (11"-16")
VAPAA LEVEYS	40 cm (15,75")
VAPAA KORKEUS alusastiakannattimilla: ilman alusastiakannattimia:	43-53 cm (17"-21") 45-55 cm (17,75"-21,75")
KÄSINOJAN KORKEUS ISTUIMEN YLÄPUOLELLA	38cm (15") Korkea selkä:14-20 cm (5.5"-8") 46 cm (18") Korkea selkä:16.5-23 cm (6.5"-9") 2,5 cm (1") välein
KORKEUS LATTIASTA ISTUIMELLE	55-65 cm (21,5"-25,5") 2,5 cm (1") välein
TUOTTEEN PAINO (sis. jalkatuot)	25 kg (55 lbs)
KEHYKSEN JA RUNKO-OSIEN MATERIAALI	Ruostumaton teräs (Elinikäinen takuu ruostumista vastaan)
PIENIN KÄÄNTÖYMPYRÄ	97 cm (38")

2.0 KOKOONPANO (VAIN JÄLLEENMYYJÄLLE/JAKELIJALLE)

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Jos kierteet eivät ole voideltuja, voi tapahtua kiinnittimien kylmähitsausta.

- Levitä voiteluainetta (nestemäinen pesuaine, saippua, huulirasva, vaha jne.) kierteisiin ennen kiinnittimien kiristämistä sitovuuden vähentämiseksi.
- Älä ylikiristä kiinnittimiä.

TÄRKEÄÄ!

SÄÄTÖJÄ EI SAA KOSKAAN TEHDÄ, KUN KÄYTTÄJÄ ISTUU TUOLISSA.

2.1 Selkänojan

2.1.1 Selkänojan asennus

Tarvittavat työkalut: 5/32" kuusioavain, 7/16" kiintoavain

1. Poista suihkutuoli kuljetuspakkauksesta.
2. Nosta selkänoja pystysuoraan asentoon.
3. Aseta mukana toimitettu kuusiokantaruuvi ① Selkänojalevyn reiän läpi, ja työnnä ruuvi istuimen runkoputken läpi.
4. Aseta toinen kuusiokantainen nuppipääruuvi ② selkänojalevyn etureikään, ja työnnä ruuvi istuimen runkoputken läpi.

HUOM.: Valitse ylempi reikä 90° selkänojakulmalle, tai alempi reikä 97° kulmalle.

5. Kiinnitä litteä lukkomutteri ③.
6. Kiristä kokoonpano.
7. Toista vaiheet 3–5 toiselle jalkalevyille.

HUOM.: Istuimen syvyyttä voidaan säätää 28-40 cm (11"-16"), riippuen selkänojan asennuspaikasta

2.1.2 Selkänojan kulman säätö

Tarvittavat työkalut: 5/32" kuusioavain, 7/16" kiintoavain

1. Löysää ja poista lukkomutterit istuimen runkoputkien sisemmältä puolelta.
2. Poista etummaisat ruuvit selkänojan kielekkeistä molemmilta puolilta.
3. Kierrä selkänoja toiseen kielekkeiden kahdesta asennosta.




HUOM.: Valitse yläreikä 90° selkänojakulmalle tai alareikä 97° selkänojakulmalle.

4. Selkänojan ollessa paikoillaan aseta ruuvit takaisin valittujen selkänojan asennuslevyn kielekkeiden läpi, ja työnnä ne kehysputkien läpi.
5. Kiinnitä ruuvien toinen pää litteillä aluslevyillä ja nailonlukkomuttereilla.
6. Kiristä rakenne kuusioavaimella ja kiintoavaimella, kunnes ruuvien pää ulottuu 1–2 kierrettä nailonlukkomutterin ohi.

2.1.3 Selkänojan syvyyssäätö

Tarvittavat työkalut: 5/32" kuusioavain, 7/16" kiintoavain


1. Löysää ja poista lukkomutterit istuimen molempien runkoputkien sisemmältä puolelta.
2. Poista molemmat ruuvit selkänojan kielekkeistä.
3. Uudelleenkohdista selkänojan kielekkeiden reiät selkänojan rungon reikiin halutulle istuimen syvyydelle.
4. Selkänojan ollessa paikoillaan aseta ruuvit selkänojan kielekkeiden reikiin ja paina ne läpi.
5. Kiinnitä ruuvien toinen pää aluslevyillä ja nailonlukkomuttereilla.
6. Kiristä kokoonpano.

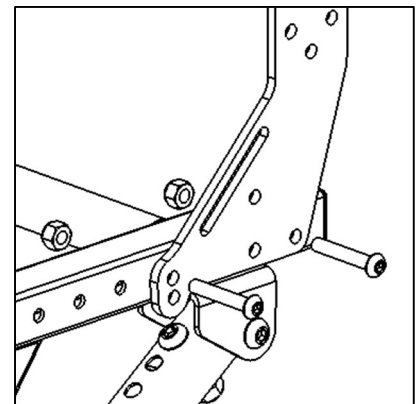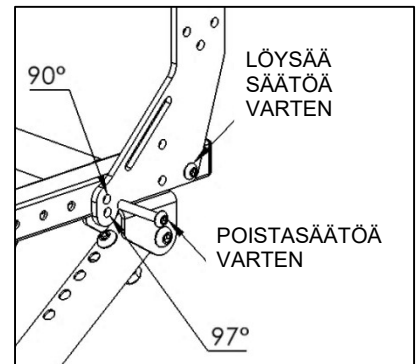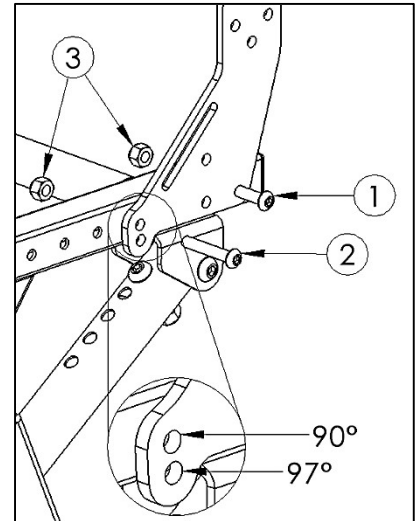

2.1.4 Säädetävän selkäpehmusteen säätö

Selän verhoilun säätämiseksi jokaista hihnaa voidaan kiristää tai löysätä soljista, mikä mahdollistaa monet eri asennot.

Esimerkiksi alhaalta lukien toinen ja kolmas hihna voidaan kiristää, jotta syntyy parempi tuki lantion alueelle.

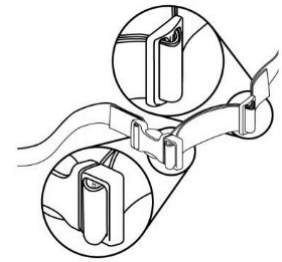

2.2 Pyörien asennus

Raz-CAT-tuolit toimitetaan ilman, että pyörät on asennettu paikoilleen.



Tee pyörien asennus noudattamalla seuraavia ohjeita.

Tarvittava työkalu: 5mm kuusioavain

1. Asenna pyörän varsi pohjarungon pyöräkoteloon.
2. Kohdista pyörävarren kierrereikä reikään, joka on pyöräkotelossa.
3. Aseta M8 nuppipääruuvi pyöräkotelon reikään.

HUOM.: Varmista, että jokaisella M8-ruuvilla on keskivahvaa kierrelukitusnestettä kierteissä ennen niiden käyttöä.

4. Kierrä M8-ruuvi pyöräkotelon läpi ja pyörän varteeseen.
5. Jatka M8-ruuvien kiertämistä, kunnes se on tiukka.
6. Toista vaiheita 1–5, kunnes kaikki neljä pyörää ovat tiukasti paikoillaan.

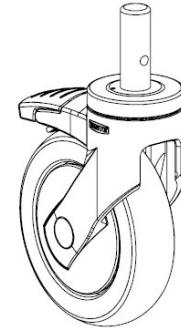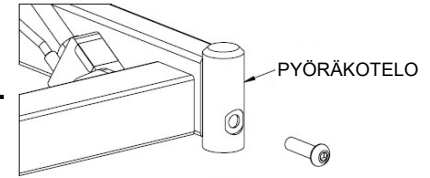

2.3 Käsinojen säätö – Vain Adjusta-Back-vaihtoehto



Tarvittavat työkalut vaihtelevat laitteiston mukaan, varmista, että oikeat työkalut on valittu turvallista asennusta varten. Kehys, jossa on tunnistereikä, on metrinen.

- Keisarillinen-laitteistolle: 7/32" kuusioavain, 9/16" kiintoavain;
- Metrinen-laitteistolle: 5 mm kuusioavain, 13 mm kiintoavain

2.3.1 Käsinojan korkeuden säätö

Käsinojat ovat säädettävissä 7,5cm (3") alueella ½" välein **vain** Adjusta-Back-vaihtoehdossa.


1. Löysää ja irrota alempi lukkomutteri.
2. Löysää ja irrota ylempi lukkomutteri.
3. Pitäen käsinoja ja käsinojen kääntölevyrakennetta yhdessä, siirrä yksikköä ylöspäin tai alaspäin käsinojan tukikiinnityksessä riippuen käyttäjän tarpeista.
4. Aseta yläruuvien lukkomutteri paikoilleen.
5. Aseta alaruuvien lukkomutteri paikoilleen.
6. Kiristä ruuvit ja lukkomutterit ylhäältä ja alhaalta.
7. Toista vaiheet 1–6 toiselle käsinojalle.

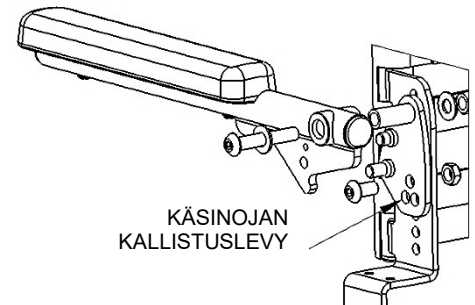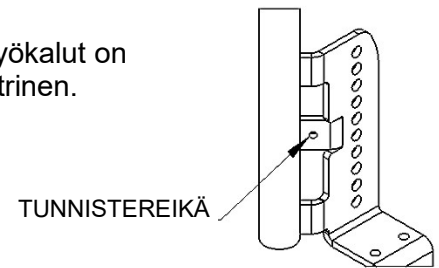

2.3.2 Käsinojan kulman säätö

Käsinojen kulmaa voidaan säätää 5° ylöspäin tai 5° alaspäin, jos selkänojan kulmaa säädetään 90° tehdasasetuksesta.


1. Löysää ja poista ruuvit, välilevyt ja lukkomutterit käsinojan kääntölevyn alaosasta.
2. Pitäen yläruuvia paikoillaan, kierrä käsinojarakennetta kunnes haluttu asento savutetaan, kohdistuen yksi kolmesta (kolmion muotoon järjestetystä) käsivarren taittolevyn reiästä kohdistettuna käsinojan tukikiinnityksen reikiin.
3. Aseta ruuvi haluttuun käsinojan taittolevyn kohtaan, ja kiinnitä lukkomutteri.
4. Kiristä ruuvi ja lukkomutteri.
5. Toista vaiheet 1–4 toiselle käsinojalle.

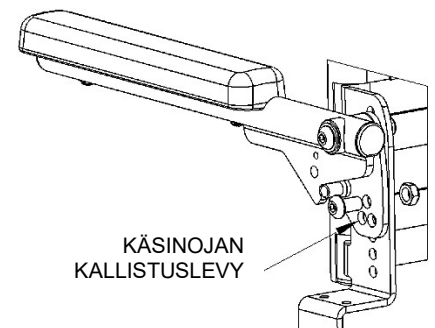

2.4 Raz Istuimen

2.4.1 Raz Istuimen asennus

1. Varmista, että etukannattimet ovat auki-asennossa. Avaa etukannattimet puristamalla kielekkeitä kannattimen saranoidussa osassa.
2. Liu'uta istuimen takaosa yli takaosan ristiputkien samalla kun istuimen etuosa lasketaan kehykselle. Tarkista varmistaaksesi, että istuimen takaosan kannattimet tarttuvat ristiputkien alapuolelle.
3. Jatka istuimen etuosan laskua, kunnes istuimen etukannattimet asettuvat istuimen etupuolen tukiputkiin.
4. Varmista istuimen kiinnitys sulkemalla istuimen etukannattimet. Sulkeaksesi istuimen etukannattimen napsauta kiinnike sen toiseen puolikkaaseen etupuolen tukiputkien ympärillä.
5. Tee vaiheet 1–4 käänteisessä järjestyksessä irrottaaksesi istuimen rungosta.

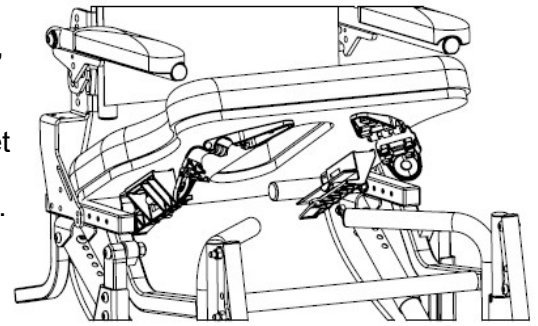


2.4.2 Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) – Säättäminen

Istuimessa on noin 5 cm (2") etu-/takasuuntainen säätövara, joka mahdollistaa istuimen aukon optimaalisen sijoittamisen käyttäjän istuinluiden ympärille.

Tarvittava työkalu: #2 Phillips-ruuvitaltta

1. Vapauta istuin avaamalla istuimen etuosan kannattimet.
2. Nosta istuimen etuosaa, vedä ylöspäin ja sitten eteenpäin irrottaaksesi istuimen tuolista.
3. Löysää (mutta älä irrota) kahdeksan ruuvia, jotka liittävät istuimen etu- ja takakannattimet istuimen alapuoleen. *Huom.: Istuimen takakannattimet on esitetty alla ilman alusastian kannattimia selkeyden vuoksi.*

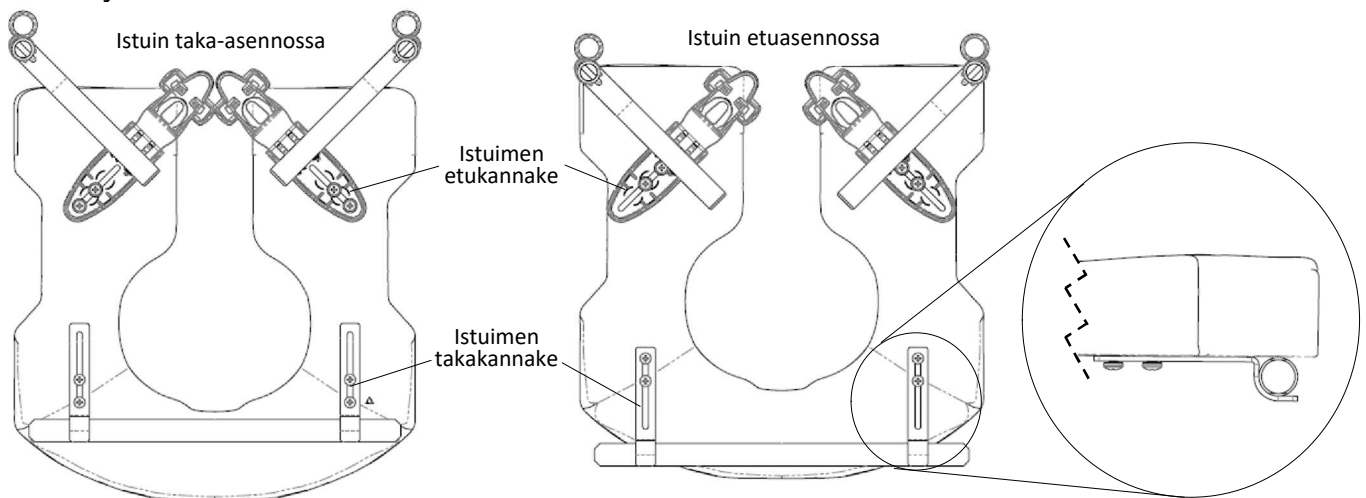



4. Aseta istuin takaisin paikoilleen runkoon ja sulje istuimen etukannattimet etutukiputkien ympärille.
5. Liu'uta/kääntelee istuin haluttuun asentoon.
6. Tarkista, että istuimen takakannattimet ovat tiukasti sijoitettu takatukiputkea vasten.
7. Kiristä kaikki kahdeksan ruuvia, jotka kiinnittävät istuimen etu- ja takakannattimet istuimeen estääksesi istuimen liikkumisen. *Huom.: Varmista, että istuimen etu- ja takakannattimet on tiukasti lukittu istuimen etu- ja takatukiputkien ympärille ennen käyttäjän siirtymistä tuoliin.*

2.5 Istuimen korkeuden säätö lattiasta

Muuta muuttaa istuimen korkeutta lattiasta Raz-CAT-mallissa säätämällä kallistustolppien korkeuksia tuolin molemmilla puolilla.

Tarvittavat työkalut: 5 mm kuusioavain, 13 mm kiintoavain

1. Varmista, ettei tuoli ole kallistettuna painamalla molempia kallistuslaukaisimia.
2. Irrota jalkatuet, jos ne on asennettu.
3. Kallista tuoli eteenpäin varovasti pehmeälle ja puhtaalle alustalle (esim. matolle tai tasaiselle pakkauslaatikolle) alla olevan piirroksen mukaisesti.

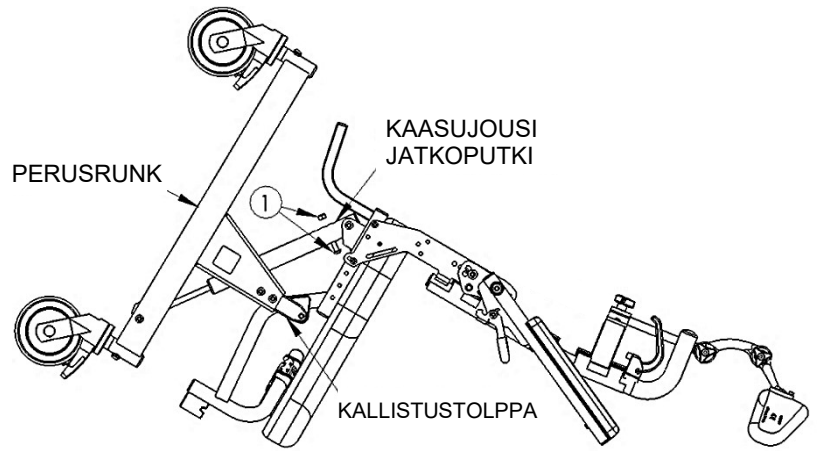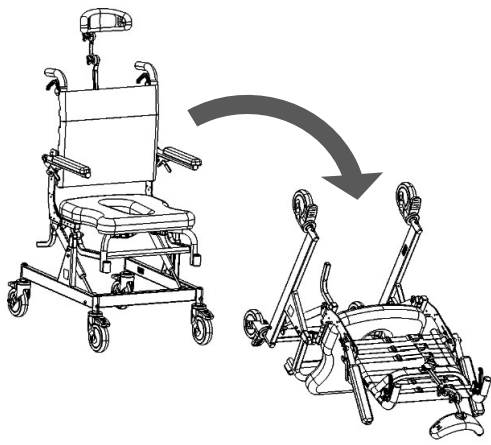




4. Poista ruuvit molemmista ① kaasujousien jatkoputkista.
5. Irrota lukkomutterit ja aluslevyt ② molemmista kallistustolpista.
6. Poista ruuvit ③ molemmilta puolilta.

HUOM: Käytä kuusioavainta ruuvien irrottamiseen. Ruuvit on kierteitetty kallistustolppiin.

7. Siirrä perusrunkoa kallistustolppia pitkin haluttuun istuimen ja lattian väliseen korkeuteen.
8. Kohdista kallistustolppien reiät perusrungon reikiin.
9. Aseta ruuvit ③ kohdistettuihin reikiin molemmilla puolilla.

Vihje: Aseta yksi ruuvi kummallekin puolelle ensin sen sijaan, että asetat molemmat ruuvit toiselle puolelle ennen toista puolta.

10. Kiinnitä lukkomutterit ②.

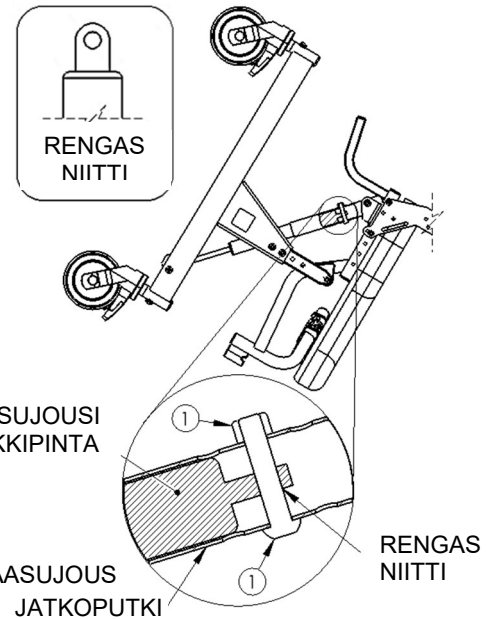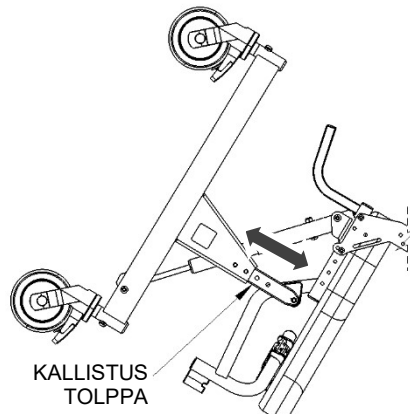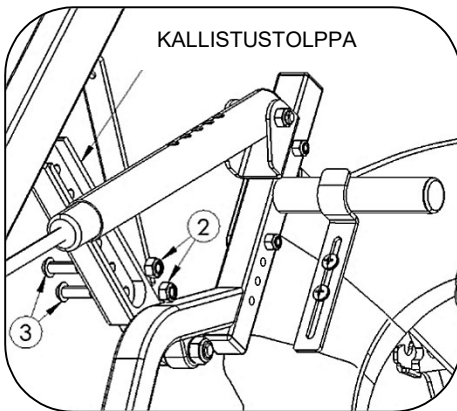

11. Tasaa istuinrunko yhdensuuntaiseksi perusrungon kanssa ja kohdista kunkin kaasujousen rengasniiti kaasujousen jatkoputken lähimpään reikään.
12. Asenna ruuvit kohdakkain olevien reikien läpi ja kiinnitä lukkomutterit ①. Ruuvit on työnnettävä kaasujousen jatkoputken ja kaasujousen rengasniitin läpi kuvan mukaisesti.
13. Varmista, että kaikki osat on asennettu tukevasti, ennen kuin nostat tuolin pystyasentoon.

TÄRKEÄÄ!

SELKÄNOJAN KULMAN SUURENTAMINEN HEIKENTÄÄ VAKAUTTA TAAKSEPÄIN. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VAKAUSTARKISTUS SUORITETAAN, KUN JOKIN NÄISTÄ SÄÄDÖISTÄ ON TEHTY.

2.6 Jalkatukien

2.6.1 Vakiomallin, MFX8- ja MFX12-jalkatukien asennus

1. Poista jalkatuet pakkauksen sisällä olevasta varustelaatikosta.
2. Aseta jalkatuen ripustusputket vastakappaleisiin, jotka on hitsattu tuolin rungon etuosaan. *Jos tukiputket on suunnattu eteenpäin, putkien tapit osuvat vastakappaleiden uriin ja lukittuvat paikoilleen.*

2.6.2 Vakiomallisten ja MFX12-jalkatukien säätö

1. Poista muovinen napsautusnasta yhdestä jalkatuen ripustusputkesta.
2. Sääda jalkalevyn laajennusputki pystysuoraan sopivaan korkeuteen jalkatuen ripustusputken sisällä.
3. Aseta napsautusnasta jalkatuen ripustusputken ja jatkoputken läpi. Varmista, että napsautusnastat ovat kokonaan putken läpi, ja että vihreä muovikliipsi napsahtaa tiukasti ripustusputkien ulkopuolelle.
4. Toista vaiheet 1–3 toiselle jalkalevylle.

2.6.3 MFX 8 -jalkatuen säätö

Tarvittavat työkalut: 5mm kuusioavain

1. Poista M6 kantainen ruuvi jalkatukilevystä.
2. Sijoita jalkatukilevy uudelleen sopivalle korkeudelle jalkatuen ripustusputkea pitkin.
3. Aseta ruuvi ja nailonlukkomutteri takaisin paikoilleen ja kiristä.

2.7 Muotoillun pääntuen säätö






Kaikkiin Raz-CAT-tuoleihin kuuluu muotoiltu pääntuki. Muotoiltu pääntuki on muotoiltu suojaamaan päätä mukavasti ja se on helppo puhdistaa. Muotoiltua pääntukea voidaan säätää portaattomasti eteen- ja taaksepäin 125mm (5") alueella, ja pystysuunnassa 140 mm (5½") alueella.

Tarvittava työkalu: 4mm kuusioavain:

1. Löysää muotoillun pääntuen kolmiokantanupit ja sääda kulma ja korkeus käyttäjän mieltymysten mukaan. Kiristä kolmiokantanupit täysin kiinni, jotta muotoillun niskatuen kulma ja korkeus saadaan kiinnitettyä.
2. Muuttaaksesi pääntuen tyynyn kulmaa, löysää (älä irrota) muotoillun pääntuen takana olevat kolme ruuvia. Kierrä pääntukea pääntuen kiinnitystangon ympäri käyttäjälle sopivaksi, ja kiristä ruuvit kiinnittääksesi sen.
3. Varmista, että kaikki nupit ja ruuvit on kiristetty tiukalle, jotta varmistetaan käyttäjän turvallisuus.

2.8 Kiinnitysten asennus

Kaikki kiinnitykset on asennettava tiukasti. Lukkomutterit, jotka poistetaan jostain syystä, saattaa olla tarpeen vaihtaa uudelleen käytön sijaan. Tarkista nailonlukkomutterien toiminta, kun kiinnität ruuvia takaisin paikoilleen. Kiristettäessä on oltava havaittavissa huomattava vastus. Jos sitä ei ole, vaihda nailonlukkomutteri uuteen. Suositellaan tarkistamaan kaikkien kiinnitysten tiukkuus vuosittain.

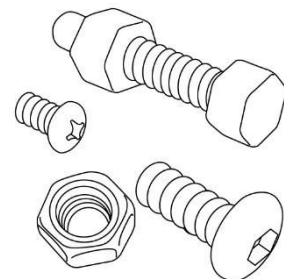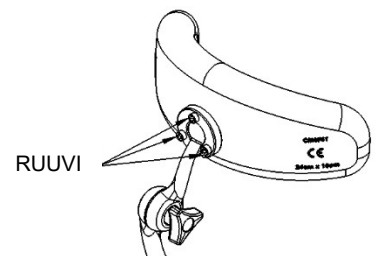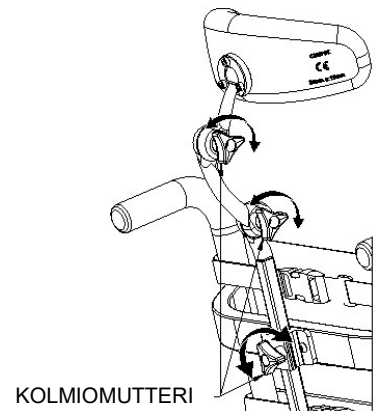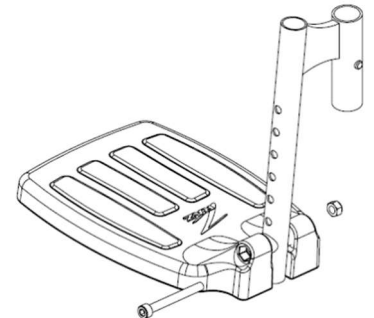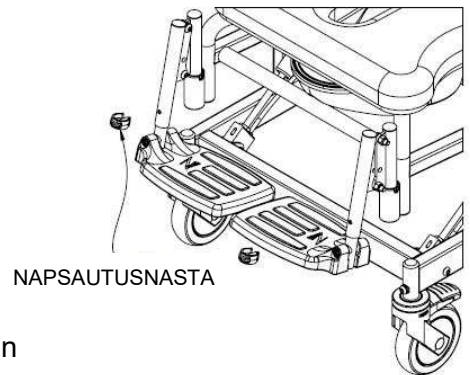


3.0 KÄYTTÖ JA TOIMINTA

3.1 Kallistustoiminto

Raz-CAT-suihku-alusastiatuoli kallistuu enintään 40° ollakseen mukavampi ja helpottaakseen käyttäjän painetta. Kaksi kaasujousta helpottaa tätä toimenpidettä ja tekee kallistuksesta tasaisen käyttäjän kannalta, sekä helpottaa kallistusta hoitajalle. Kallistaakseen tuolia, hoitajan on puristettava molempia kallistusliipaisimia ja siirrettävä tuoli haluttuun kulmaan. Lukitaksesi tuolin paikalleen, vapauta vain liipaisimet. Uudessa tuotteessa liipaisimet ja jouset saattavat vaikuttaa jäykiltä. Jäykkyys on normaalia ja poistuu käytön mittaan. Tilt-Assist-polkimen käyttäminen auttaa kallistamaan tuolin runkoa taaksepäin. Kallistustoimintoa saa käyttää vain, kun pyörät ovat lukittuja.

HUOM.: Kun tuoli on asennettu matalimmalle korkeusasetukselle, niin suurin mahdollinen kallistuskulma on 40°. Mitä korkeammalle tuoli asetetaan, sitä pienemmän kulman sitä voi kallistaa taakse. (Kun korkeus lattiasta on 63,5cm (25”), tuolia voidaan kallistaa 36°)

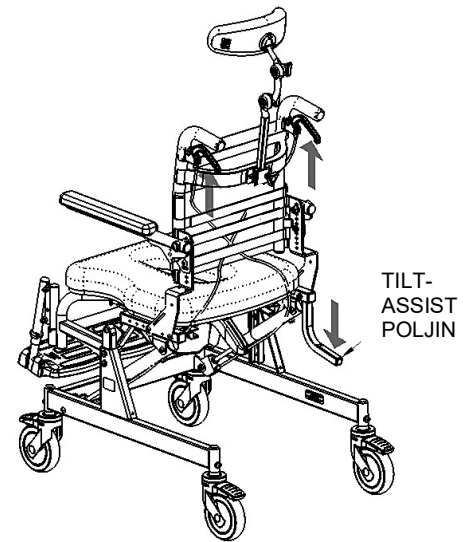


TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ YRITÄ KALLISTAA SIIRRETTÄVÄSSÄ RAZ-SUIHKU-ALUSASTIATUOLISSA ISTUJAA, JOS HOITAJA EI FYYSISESTI PYSTY KÄYTTÄMÄÄN KALLISTUSMEKANISMIA SUJUVASTI JA TURVALLISESTI KÄYTTÄJÄN OLLESSA TUOLISSA. KAIKKIEN HOITAJIEN ON TUNNETTAVA OIKEAT KALLISTUSTEKNIIKAT ENNEN KUIN HE AUTTAVAT KÄYTTÄJÄÄ SUIHKUALUSASTIAN KANSSA. LAINTIOVYÖTÄ SUOSITELLAAN KAIKILLE KÄYTTÄJILLE LISÄTURVATOIMENA.


3.1 Tilt-Assist-poljin

Tilt-Assist-poljin on vakiona Raz-CAT-tuolissa tuolin kallistamisen helpottamiseksi hoitajalle.

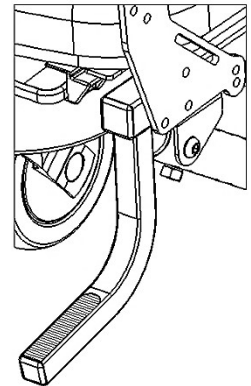

3.3 Käännettävä käsinoja

Käsinojat voivat kääntyä ylös siirron helpottamiseksi ja lukittua automaattisesti (jos valinnainen lukko on mukana), kun ne käännetään alas.

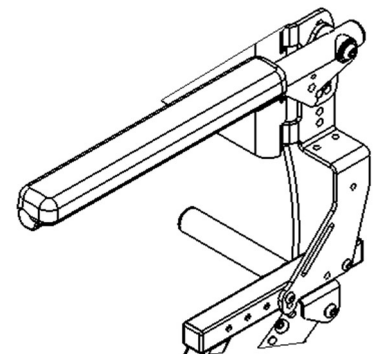


3.4 Säädetty selkäpehmuste

Moniasentoisissa selkänojoissa on säädettävä selkäpehmuste, joka tukee vartaloa parhaassa asennossa ja mukavimmalla mahdollisella tavalla. Selkäpehmuste on irrotettava konepesua varten, ja se on saatavana 43cm (14”), 51 cm (16”) ja 61 cm (18”) pituisina tuolille valitun selkänojan pituuden mukaisesti.

Asentaaksesi säädettävän selkäpehmusteen


Moniasentoiseen selkänojaan:

1. Aseta kangas selkätuen tankojen etupuolta vasten varmistaen, että kun se kiedotaan ympäri, hihnojen kiinnikkeet osoittavat kankaasta pois päin ja silmukat osoittavat alaspäin.
2. Ylin hihna (1) on poikkituen yläpuolella.
3. Toinen (2) ja kolmas (3) hihna sijaitsevat poikkituen ja selkätuen kiinnityslevyjen välissä.
4. Neljäs (4) ja viides (5) hihna asetetaan käsinojen asennuslevyjen aukkojen läpi.
5. 61cm (18”) Pitkässä selkätuessa on kuudes hihna, joka sijaitsee ristitankojen ja käsinojen asennuslevyjen välissä.
6. Sääda kaikki hihnät käyttäjän tarpeen mukaisesti.

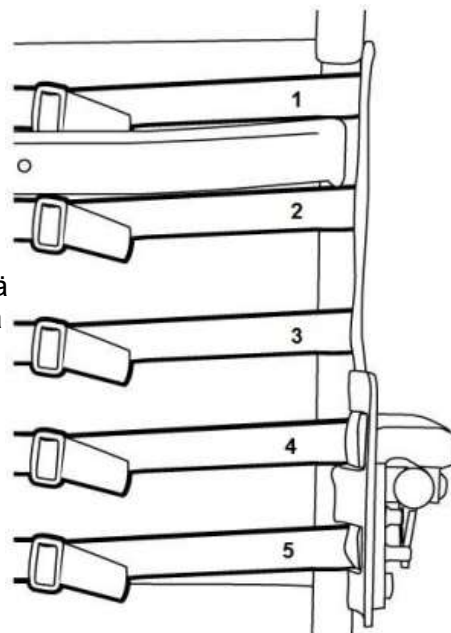

Selkätuen verhoilun säätämiseksi jokaista hihnaa voidaan kiristää tai löysätä, mikä mahdollistaa monet eri asennot. Esimerkiksi alhaalta lukien toinen ja kolmas hihna voidaan kiristää, jotta syntyy parempi tuki lantion alueelle.


Säädettävän selkäpehmusteen irrottamiseksi avaa hihnojen soljet.

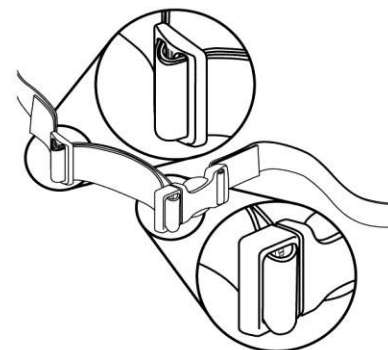

3.5 Raz istuin

Asentaaksesi Raz-istuimen:

1. Varmista, että etukannattimet ovat auki-asennossa. Avataksesi etukannattimet, purista ne auki.
2. Liu'uta istuimen takaosa yli takaosan ristiputkien samalla kun istuimen etuosa lasketaan kehykselle. Tarkista varmistaaksesi, että istuimen takaosan kannattimet tarttuvat ristiputkien alapuolelle.
3. Jatka istuimen etuosan laskua, kunnes istuimen etukannattimet asettuvat istuimen etupuolen tukiputkiin.
4. Varmista istuimen kiinnitys sulkemalla istuimen etukannattimet. Sulkeaksesi istuimen etukannattimen napsauta kiinnike sen toiseen puolikkaaseen etupuolen tukiputkien ympärillä.
5. Tee vaiheet 1–4 käänteisessä järjestyksessä irrottaaksesi istuimen rungosta.

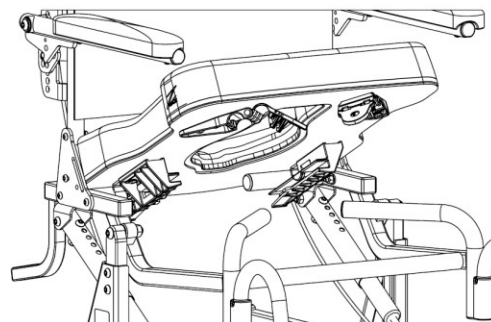

TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ MUUTTA ISTUIMEN KORKEUTTA ILMAN VALTUUTETUN JÄLLEENMYYJÄN APUA. KORKEAMMAT ISTUIMEN ASENNOT HEIKENTÄVÄT TUOLIN VAKAUTTA, JA VOIVAT JOHTAA KAAUTUMISEEN JA LOUKKAANTUMISEEN.

3.6 Vakiomalliset MFX12-jalkatuet

MFX12-jalkatuet ovat vakiovaruste kaikissa Raz-CAT-tuoleissa. Kuljetusta varten jalkatuet voidaan taittaa ylös, kiertää sivulle tai poistaa kokonaan. MFX12-jalkatukia voidaan laajentaa pitempikäisille käyttäjille lisävarusteena saatavilla jalkatuen laajennusputkilla, 5cm (2") pitemmillä putkilla, joita voidaan tilata kaikkiin siirrettäviin Raz-suihku-alusastiatuoleihin.


Asettaaksesi jalkatuet paikoilleen:

1. Aseta jalkatukien ripustusputket jalkatukien vastakappaleisiin.
2. Jos ripustusputket on kohdistettu eteenpäin, putkien tapit osuvat vastakappaleiden uriin ja lukittuvat paikoilleen.

Säätääksesi jalkatukien pituutta:

1. Poista napsautusnasta yhdestä jalkatuen ripustusputkesta.
2. Sijoita jalkalevy uudelleen käyttäjälle sopivaan pituuteen.
3. Aseta napsautusnasta jalkatuen ripustusputken ja sisäputken läpi.

NAPSAUTUSNASTA

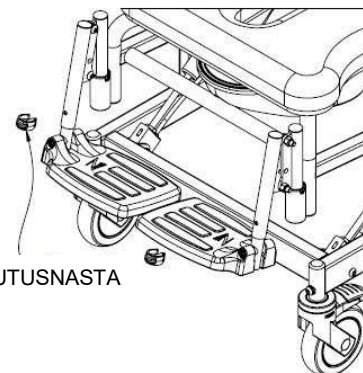

Kiirtääksesi jalkatukia:

1. Nosta jalkatukien ripustusputkia irrottaaksesi tapit.
2. Kierrä jalkatukia ulospäin tai sisään.

Poistaaksesi jalkatuet, nosta ne pois rungon vastaholkeista.


3.7 Muotoiltu päätuki

Kaikkiin Raz-CAT-tuoleihin kuuluu muotoiltu päätuki. Muotoiltu päätuki on muotoiltu suojaamaan päätä mukavasti ja se on helppo puhdistaa. Muotoiltua päätukea voidaan säätää portaattomasti eteen- ja taaksepäin 125mm (5") alueella, ja pystysuunnassa 140 mm (5½") alueella.

Säätääksesi muotoiltua päätukea:

1. Löysää muotoillun päntuen kolmiokantanupit ja säädä kulma ja korkeus käyttäjän mieltymysten mukaan. Kiristä kolmiokantanupit täysin kiinni, jotta muotoillun niskatuen kulma ja korkeus saadaan kiinnitettyä.
2. Muuttaaksesi päntuen tyynyn kulmaa, löysää (älä irrota) muotoillun päntuen takana olevat kolme ruuvia. Kierrä päntukea päntuen kiinnitystangon ympäri käyttäjälle sopivaksi, ja kiristä ruuvit kiinnittääksesi sen.
3. Varmista, että kaikki nupit ja ruuvit on kiristetty tiukalle, jotta varmistetaan käyttäjän turvallisuus.


KOLMIO
MUTTERI

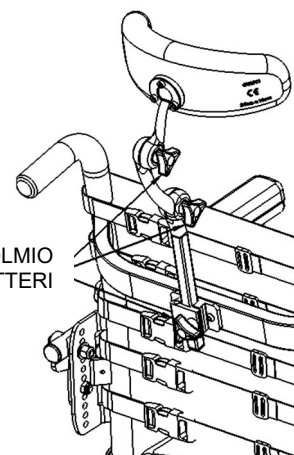

3.8 Alusastia


Raz-alusastia on suunniteltu taaksepäin roiskeita vähentävään, pitkänomaiseen muotoon, joka sopii suoraan istuimen alle. Astian keskellä on uniikki, loiskumista vähentävä harjanne. Kiiltävä pinta helpottaa puhdistusta ja huuhtelua, ja kaatonokka ja kahva helpottavat tyhjennystä. Alusastia poistetaan liu'uttamalla sitä taaksepäin.

HUOM.: Asettaessasi astiaa takaisin varmista, että astia ohjautuu vihreisiin muovikiinnikkeisiin, ja työnnä sitä eteenpäin, kunnes se osuu pysäyttimiin.

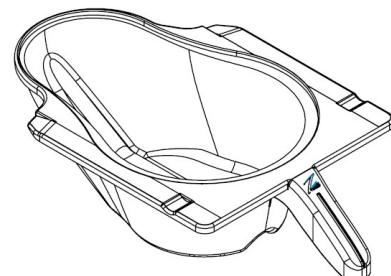

3.9 Pyörät

Jokainen siirrettävän Raz-suihku-alusastiatuolin pyörä on varustettu kaksoislukitusominaisuudella, joka samanaikaisesti estää pyörää kääntymästä ja pyörimästä. Kytkeäksesi kaksoislukon, paina jalalla kaksoislukon vivun päätä, kunnes se asettuu "päällä"-asentoon. Avataksesi kaksoislukon, paina jalalla vivun koholla olevaa päätä, kunnes se vapautuu.

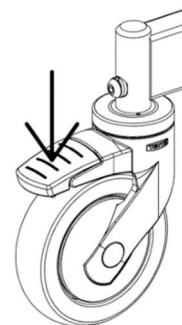

AINA ennen käyttäjän siirtämistä tai kallistamista, vapauta suuntalukko (jos käytössä) ja käännä kaikki neljä kääntyvää pyörää ulospäin parhaan vakauden saavuttamiseksi

TÄRKEÄÄ!

VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA ON OTETTAVA YHTEYTTÄ VALTUUTETTUUN RAZ-JÄLLEENMYYJÄÄN KAIKKIEN KIINNITYSTEN, PYÖRIEN JA PYÖRÄLUKKOJEN, LAITTEISTON JA KAIKKIEN MUIDEN LIIKKUVIEN OSIEN TARKASTAMISTA VARTEN.

4.0 PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

4.1 Puhdistus jokaisen käytön jälkeen

4.1.1 Alusastia

1. Poista alusastia ja tyhjennä sen sisältö.
2. Pese astia monikäyttöisellä, desinfioivalla puhdistusnesteellä. Käytä tarvittaessa pehmeää harjaa.
3. Huuhtelee hyvin ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä.

HUOM.: Kuuma saippuavesi ja sen jälkeen desinfiointiainesuihke voivat korvata monikäyttöisen desinfiointiaine-puhdistusliuoksen.

4.1.2 Istuin

1. Suihkuta monikäyttöisellä desinfiointiaineella ja hankaa pehmeällä harjalla tarpeen mukaan.
2. Huuhtelee vesisuihkulla ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä.
ÄLÄ UPOTA istuinta veteen tai puhdistusnesteeseen.
3. Perusteellisempaa puhdistusta varten poista istuin suihkutuolista, jotta sen alapuoleen ja istuimen aukon ympärykseen pääsee käsiksi paremmin.

4.2 Puhdistus tarvittaessa

4.2.1 Säädetty selkäpehmuste

1. Poista muovisalvat ja kolmiliu'ut selkäpehmusteen hihnoista, kiinnittäen poiston aikana huomiota siihen, miten hihnat kulkevat kunkin osan läpi.
2. Poista selkäpehmuste selkänojan rungosta ja konepese se miedolla pesuaineella lämpimässä vedessä, normaalilla tai hellävaraisella ohjelmalla. Asenna myös muut hihnojen tarvikkeet, kuten H-hihna sekä lantio- ja rintatukihihnat.
3. Asenna selkäpehmuste ja muut kohdistustarvikkeet tuoliin ja anna niiden kuivua.
ÄLÄ kuivaa selkäpehmustetta vaatteiden kuivauslaitteessa, tai se voi vaurioitua.
4. Kokoa kaikki muovisoljet ja kolmiliu'ut hihnoin.
5. Sääda hihnat haluttuun kireyteen.

4.2.2 Runko, käsinojat, säädettävät jalkatuet ja muut osat

1. Suihkuta runko monikäyttöisellä, desinfioivalla puhdistusaineella, hankaa pehmeällä harjalla, ja huuhtelee vedellä.
2. Tarvittaessa suihkuta runko ja osat laimennetulla (10 osaa vettä 1 osaan liuosta) kalkin/kattilakiven poistoaineella (kuten CLR), harjaa pehmeällä harjalla, ja huuhtelee perusteellisesti vedellä.

ÄLÄ sekoita kalkin/kattilakiven poistoliuosta mihinkään muuhun nesteeseen, tai voi muodostua myrkyllisiä höyryjä.

ÄLÄ käytä klooria sisältäviä tuotteita millekään Raz-osille.

Käyttäjälle suositellaan yhteydenottoa valtuutettuun Raz-jälleenmyyjään kaikkien kiinnitysten ja alirakenteiden tarkastamista varten, tai jos suihkutuolin toimintaan liittyen havaitaan mahdollisia ongelmia.

Suihkutuoli ja sen osat on useita kertoja vuodessa pyyhittävä laimennetulla kalkin/kattilakiven poistoliuoksella, jotta vähennetään kuumavesihuuhtelun aiheuttamia kerrostumia.

Homeen muodostumisen riskin vähentämiseksi koko tuoli on pyyhittävä kuivalla, pehmeällä liinalla viimeisen huuhtelun jälkeen ja ennen varastointia tai käyttöä.

4.3 Suositellut puhdistustuotteet

Tehtävä	Suosittelut tuotteet
Yleispuhdistus	Antibakteerinen puhdistusaine
Tuberkuloottinen pintapuhdistusaine	Oxiver TB (Virox Technologies Inc.)
Keskitalon desinfiointiaine	SepteFX 7D-11 (Titan Worldwide Inc.)
Kalkki- ja kattilakivisuojaus	CLR

TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ KÄYTÄ HANKAAVIA JAUHEITA TAI HANKAUSTYÖNYJÄ SIIRRETTÄVÄN RAZ-SUIHKU-ALUSASTIATUOLIN PUHDISTUKSESSA.

ÄLÄ UPOTA SIIRRETTÄVÄÄ RAZ-SUIHKU-ALUSASTIATUOLIA VETEEN.

HUUHTELE HUOLELLISESTI PUHDISTUKSEN JÄLKEEN, JOTTA VARMISTETAAN, ETTÄ KAIKKI SAIPPUA- TAI PUHDISTUSAINELAJÄÄMÄT POISTUVAT.

ÄLÄ KÄYTÄ PUHDISTUSTUOTTEITA TUTUSTUMATTA TUOTTEIDEN KÄYTTÖOHJEISIIN JA RYHTYMÄTTÄ ASIANMUKAISIIIN VAROTOIMENPITEISIIN IHMISTEN KEMIKAALEILLE ALTISTUMISEN SUHTEEN.

5.0 VAARATILANTEIDEN ILMOITTAMINEN

TÄRKEÄÄ!

Jos tähän laitteeseen liittyen tapahtuu vakava tapahtuma, joka on johtanut tai voi johtaa kuolemaan, vakavaan loukkaantumiseen tai vakavaan terveydentilan heikkenemiseen, siitä on ilmoitettava viipymättä:

- valmistajalle (yhteystiedot on annettu tässä käyttöohjeessa) ja
- käyttäjän tai potilaan asuinmaan toimivaltaiselle viranomaiselle tai asianmukaiselle sääntelyviranomaiselle.

6.0 RAJOITETTU TAKUU

Tämä takuu on voimassa vain alkuperäiselle siirrettävälle Raz-suihku-alusastiatuolin ostajalle/käyttäjälle, joka on ostanut sen valtuutetulta Raz-jälleenmyyjältä.

Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä, lainmukaisia oikeuksia, mutta alueestasi ja maastasi riippuen sinulla saattaa olla myös muita lainmukaisia oikeuksia.

Tätä takuuta laajennetaan noudattamaan valtion/alueen lakeja ja vaatimuksia.

Liittyen vain alkuperäiseen ostajaan/käyttäjään, Raz Design takaa kahden (2) vuoden ajan valmistuspäivästä lukien tuotteen jalustan ja selkärungon osien olevan vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä. Kaikilla muilla siirrettävä Raz-suihku-alusastiatuolin osilla on yhden (1) vuoden takuu huomioiden normaalin kulumisen poissulkemisen. Jos tämän takuuajan kuluessa minkään näistä tuotteista havaitaan olevan viallinen, osa korjataan tai vaihdetaan Raz Designin harkinnan mukaisesti. Tämä takuu ei kata mitään työ- tai toimituskustannuksia, jotka liittyvät osien vaihtoon, asennukseen tai korjaukseen missään sellaisessa tuotteessa.

Takuuhuoltoa varten ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit siirrettävän Raz-suihku-alusastiatuolisi. Jos et saa tyydyttävää takuupalvelua, ota yhteyttä suoraan Raz Designiin käyttäen tämän ohjeen joko alussa tai lopussa annettuja yhteystietoja. Anna yhteydenotossasi jälleenmyyjäsi nimi ja osoite, tuotteen tyyppi, ostopäivä, tuolin sarjanumero (harmaassa merkinnässä tuolin rungossa) sekä kuvaus tuoteongelman luonteesta. Älä palauta tuotteita valmistajalle ilman ennakkoon saatua lupaa.

Rajoituksia ja poissulkemisä:

Tämä takuu ei ole voimassa sarjanumeroiduille tuotteille, joista sarjanumero on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi, eikä tuotteille, joita on käsitelty väärin tai jotka ovat joutuneet onnettomuuteen. Virheellinen käyttö, huolto tai varastointi voi mitätöidä siirrettävän Raz-suihku-alusastiatuolin takuun.

Takuu ei kata tuotteita, joita on muutettu ilman Raz Designin erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Näihin sisältyvät rajoittumatta valtuuttamattomien osien tai lisälaitteiden käyttö, tuotteet, joiden vaurioituminen johtuu mihinkään osaan tehdyistä korjauksista, jotka on tehnyt henkilö tai henkilöt, jotka eivät ole valtuutetun Raz-jälleenmyyjän palveluksessa, tai jos tuote on vaurioitunut olosuhteissa, jotka eivät ole Raz Designin kontrolloitavissa. Vain Raz Designilla on valtuus määritellä, oikeuttavatko olosuhteet takuun voimassaoloon. Takuu ei koske ongelmia, jotka johtuvat tavallisesta kulumisesta tai tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Edellä mainittu takuu on yksinomainen ja sitä sovelletaan kaikkien muiden takuiden sijaan, joko ilmaistujen tai epäsuorien, mukaan lukien epäsuorat takuut, jotka kuvaavat myyntikelpoisuutta tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikkien takuuta koskevien rikkomusten korjaaminen rajoitetaan vain viallisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tämän asiakirjan ehtojen mukaisesti.

Minkä tahansa epäsuoran takuun soveltaminen ei saa laajentua tässä annetun nimenomaisen takuun kestoa pitemmäksi. Raz Design ei ole vastuussa mistään välillisistä tai satunnaisista vahingoista, jotka liittyvät osin tai kokonaan siirrettävään Raz-suihku-alusastiatuoliin.

Raz Design Inc. runko- ja rakennemateriaalit ovat ruostumatonta terästä, jolle annamme elinikäisen ruostumattomuustakuun. Huomaa, että tämä elinikäinen takuu on voimassa vain alkuperäiselle Raz-suihkuuolin ostajalle/käyttäjälle, joka on ostanut sen valtuutetulta Raz-jälleenmyyjältä.

Asianmukaisten puhdistusohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa rungon ruostumista ja mitätöidä tämän takuun. Lisäksi kaikki ruostumista koskevat vaatimukset katselmoidaan ja niihin voi liittyä pyyntö palauttaa tuote tarkempaan tutkimukseen ennen kuin vaihtotuotteen tilaus voidaan käsitellä.

7.0 YHTEYSTIEDOT

On tärkeää, että siirrettävä Raz-suihku-alusastiatuoli kootaan oikein ja kaikki säädöt tehdään huolellisesti. Uusimmat käyttöohjeet voidaan ladata osoitteesta www.razdesigninc.com. Saadaksesi selventäviä tietoja mistä tahansa tämän ohjeen osasta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajaan.



VALMISTAJA

Raz Design Inc.
135 Railside Rd. Toronto, ON, Canada, M3A 1B7
877.720.5678 / +1.416.751.5678
info@razdesigninc.com



JÄLLEENMYYJÄASI

Suomi
90240 Oulu, Finland
040 705 5886
info@rehaco.fi

TÄRKEÄÄ!

TUOTTEET, JOITA EI ENÄÄ VOIDA KÄYTTÄÄ, ON HÄVITETTÄVÄ ERILLÄÄN KOTITALOUSJÄTTEESTÄ. SE ON TEHTÄVÄ PAIKALLISTEN JA KANSALLISTEN YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAAKA-AINEIDEN KIERRÄTYSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. KATSO LISÄTIETOJA PAIKALLISTEN VIRANOMAISTEN VERKKOSIVUILTA LIITTYEN OIKEAAN HÄVITTÄMISEEN.

OTA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI, JOS JOSKUS TUNTUU, ETTÄ JOKIN SIIRRETTÄVÄN RAZ-SUIHKU-ALUSASTIATUOLIN OSA TARVITSEE HUOLTOA. KAIKKI ONGELMAT, JOTKA VOIVAT VAIKUTTA TUOLIN TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN, ON RATKAISTAVA VÄLITTÖMÄSTI. ON OTETTAVA YHTEYTTÄ SIIRRETTÄVÄN SUIHKU-ALUSASTIATUOLIN TOIMITTANEESSEN JÄLLEENMYYJÄÄN, JOTTA KORJAUKSET VOIDAAN SUORITTA ENNEN TUOLIN KÄYTTÖÄ. JÄLLEENMYYJÄLLE ON ILMOITETTAVA SELKEÄSTI, ETTÄ SIIRRETTÄVÄ SUIHKU-ALUSASTIATUOLI ON KORJAUKSEN TARPEESSA, EIKÄ SITÄ VOIDA KÄYTTÄÄ ENNEN KUIN KORJAUKSET ON SUORITETTU JA KAIKKI ONGELMAT RATKAISTU.

JOS JÄLLEENMYYJÄSI EI JOSTAIN SYYSTÄ VASTAA TYYDYTTÄVÄLLÄ TAVALLA, OLE HYVÄ JA OTA YHTEYTTÄ RAZ DESIGNIIN:

SÄHKÖPOSTITSE info@razdesigninc.com
PUHELIMITSE: 877.720.5678 (Pohjois-Amerikka)
+1.416.751.5678 (Muu maailma)