





Mobila dusch- och hygienstolar

Raz-AP600(Z160)

Raz-SP600(Z260)

Bruksanvisning för användare och återförsäljare

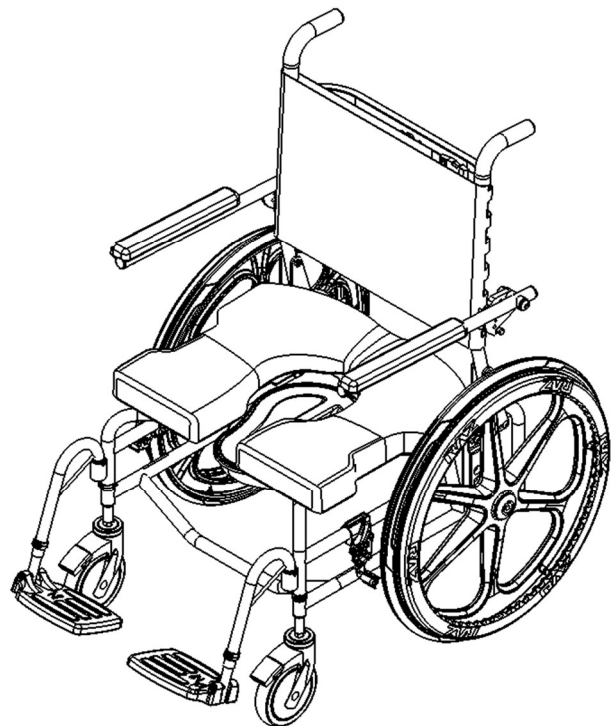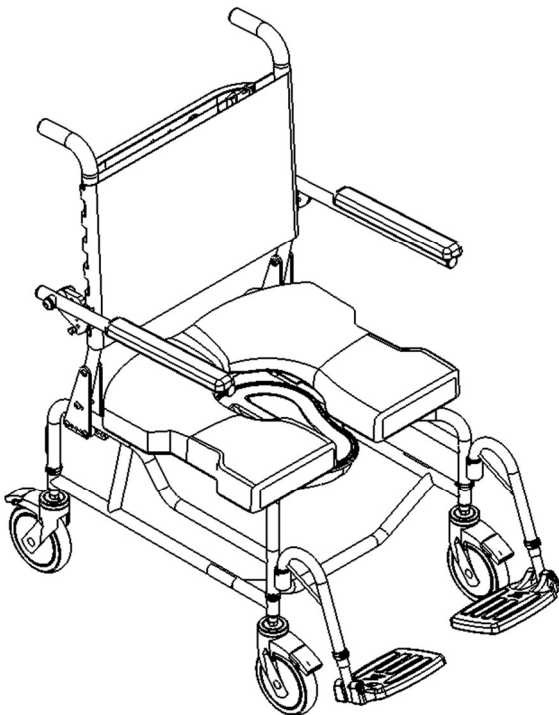

EC REP

Advena Ltd. Tower Business Center
2nd Flr, Tower Street
Swatar, BKR 4013 Malta

UKRP

Advena Ltd. Pure Offices, Plato Close
Warwick, CV34 6WE UK

CH REP

Senectovia Medizinaltechnik AG
In der Luberzen 1,
8902 Urdorf, Switzerland



BASIC UDI-DI: 628758RAZDESIGNINC2004V9

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Bristande efterlevnad kan medföra person- eller saksador!

Det är viktigt att den mobila Raz-hygienstolen monteras korrekt och att alla justeringar görs noggrant. Se till att användare, återförsäljare och skötare har läst denna bruksanvisning och förstår hur Raz-hygienstolen används på ett säkert sätt. Uppdaterade bruksanvisningar finns på webbplatsen www.razdesigninc.com. Kontakta distributören eller tillverkaren om det är något avsnitt i bruksanvisningen du är oklar över.

All obehörig modifiering, ändring eller felaktig användning av Raz dusch- och toalettstolar samt tillbehör är strikt förbjuden. Denna typ av åtgärder medför att garantin omedelbart upphör att gälla och kan orsaka allvarliga personskador, funktionsfel hos produkten eller bristande regelefterlevnad. Raz Design fransäger sig allt ansvar för skador, förluster eller kostnader som uppstår till följd av användning av en obehörig eller modifierad/ändrad produkt. Användaren bär fullt ansvar för att säkerställa att produkten används korrekt och enligt anvisningarna i den officiella dokumentationen.



TILLVERKARE

Raz Design Inc.
135 Railside Rd. Toronto, ON, Canada, M3A 1B7
877.720.5678 / +1.416.751.5678
info@razdesigninc.com



DISTRIBUTÖREN

Sverige / Sweden
Wolturnus AB
Box 8010
163 08 Spånga
559171 2764
info@wolturnus.se

KLASSIFICERINGEN AV HYGIENSTOLEN BASERAS PÅ MAXIMAL ANVÄNDARVIKT

AP600/SP600

275 kg (605 lbs)

SÄKERHETSVARNINGAR ATT BEAKTA FÖR ANVÄNDARÄNDAMÅL

DENNA ANORDNING ÄR LÄMPLIG FÖR TYP A: HÖG ANVÄNDNINGSBELASTNING (T.EX. INSTITUTIONER), OCH FÅR ALDRIG ANVÄNDAS FÖR NÅGOT ANNAT ÄNDAMÅL ÄN DEN URSPRUNGLIGEN ÄR AVSEDD FÖR

Stabilitet

Länkhjulen på alla modeller är utrustade med dubbelverkande lås. Trampspaken aktiverar både rulllåset och svänglåset. **Det är viktigt att alla länkhjulen på hygienstolen är i ett utåtriktat läge innan låsen kopplas in för optimal framåt-, bakåt- och sidostabilitet.** Om hygienstolen är försedd med den valfria riktningsspärren ska denna frigöras innan du roterar det bakre länkhjulet bakåt och aktiverar hjulets dubbelverkande lås.



ANVÄNDAREN FÅR INTE luta sig framåt när han/hon sitter i den mobila Raz-hygienstolen eftersom detta kan få stolen att tippa framåt.




ANVÄNDAREN FÅR INTE rulla nedför en ramp utan att en vårdare håller tag i hygienstolen under redrullningen.

RIKTNINGSSPÄRRARNA ÄR INTE BROMSAR! Använd aldrig riktningsspärrarna för att sakta ner hygienstolen när du åker nedför lutningar eftersom hygienstolen annars kan välta i färdriktningen.

Sidostabilitet

ANVÄNDAREN FÅR INTE luta sig över kanten på den mobila Raz-hygienstolen eftersom stolen då kan tippa framåt.

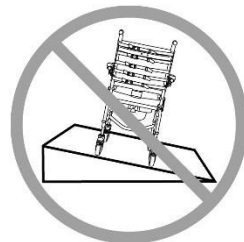

ANVÄNDAREN FÅR INTE försöka att plocka upp föremål från golvet genom att luta sig framåt och sträcka sig efter föremålet – använd en griptång eller ta hjälp av en vårdare.


ANVÄNDAREN FÅR INTE placera Raz-ART i en sluttning eftersom den då kan tippa framåt.

Bakåstabilitet

ANVÄNDAREN FÅR INTE rulla uppför en lutning på en SP600 utan att de bakre tippskydden (tillval) monterats. Tippskydden måste beställas ihop med Raz-SP600-modellen och monteras innan hygienstolen rullas på ojämna ytor.

Tippskydd – SP600

Tippskydd är tillval för Raz-SP600. De rekommenderas när hygienstolen ska användas på ojämna ytor som ramper eller sluttande golv, när den ska användas av patienter med benamputation, när bakhjulen flyttas framåt från det fabriksinställda läget eller för situationer när bakåstabiliteten äventyras.

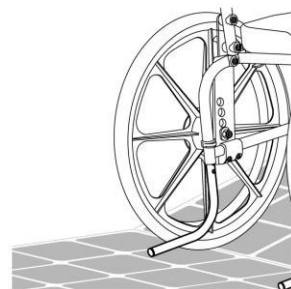

Ramper och andra lutningar

Ramper och andra ytor som inte är i plan med marken (t.ex. sluttande golv in till inbyggda duschar) måste testas ihop med en skötare för att säkerställa att inte hygienstolens stabilitet äventyras. Medicinskt kvalificerad personal behöver hjälpa till med den här proceduren.

Det är INTE TILLÅTET att skjuta på eller dra Raz-AP600-hygienstolen uppför eller nedför en lutning eller ramp med en lutningsgrad som överstiger 1:12 (5 graders lutning).



Patienten får **INTE** skjutas på eller dras i en Raz-AP600-hygienstol på något annat sätt än av en skötare.

VIKTIGT!

RAZ-SP600-STOLENS BAKÅSTABILITET PÅVERKAS AV BAKHJULENS MONTERINGSLÄGE, PATIENTENS FYSISKA OCH KLINISKA EGENSKAPER, OCH VINKELN PÅ RYGGSTÖDET. DÄRFÖR ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT FASTSTÄLLA EVENTUELLT BEHOV AV TIPPSKYDD NÄR RAZ-SP600-STOLEN FÖRSKRIVS MED HÄNSYN TAGEN TILL PATIENTENS FYSISKA ATTRIBUT OCH MILJÖ. HYGIENSTOLEN SKA ANVÄNDAS I TIPPSKYDD KAN NÄR SOM HELST BESTÄLLAS FÖR EFTERMONTERING OM DET SENARE FASTSTÄLLS ATT DE BEHÖVS.


Nedsänkning i vätska

Den mobila Raz-hygienstolen är inte konstruerad för användning som bassängstol. Sänk inte ner hygienstolen helt eller delvis i vatten eller annan vätska. Nedsänkning kan leda till skador på hygienstolen.

Exponering för klor

Lämplig för användning i våta utrymmen, men inte i pooler och liknande korrosiva miljöer.

Förvara **INTE** anordningen i närheten av pooler eftersom klor i luften kan orsaka rostbildning på vissa av stolens komponenter av rostfritt stål.

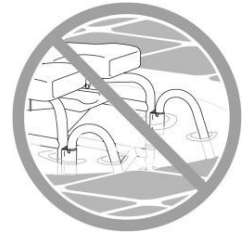

Att tänka på vid förflyttningar


Det mest riskfyllda momentet vid användning av hygienstolar är förflyttningen till/från hygienstolen. Eftersom alla hygienstolar har olika stabilitetsegenskaper är det viktigt att noggrant granska och testa förflyttningstekniken för att säkerställa att förfarandet är säkert. Testförflyttningar ska göras med en skötare som kan förhindra att hygienstolen välter eller rör sig under förflyttningen. Om du känner att förflyttningen inte kan göras på ett säkert sätt – trots upprepade försök – kontaktar du en legitimerad vårdgivare som är välbekant med olika förflyttningstekniker. Skötare som inte har lärt sig att utföra förflyttningen på ett säkert sätt måste få hjälp med det. Det kan även vara nödvändigt att använda en mekanisk lyft.

Förflyttning till en Raz-AP600

Lås **ALLTID** alla fyra länkhjulen i utåtriktat läge (främre länkhjulen i framåtriktat läge) för maximal stolstabilitet.

Förflyttning till en Raz-SP600

Lås **ALLTID** bägge framhjulen i utåtriktat läge (riktade framåt) och koppla in hjullåsen så att bakhjulen låses säkert.

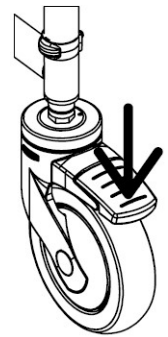

Hjullåsen är konstruerade att förhindra att drivhjulen roterar. De dubbelverkande låsen på länkhjulen är konstruerade för att förhindra att hjulen roterar och hjulgafflarna svänger. Låsen **HINDRAR INTE** hygienstolen från att glida/förflytta sig om golvet är halt. Ett halt golv kan orsakas av damm, vatten, tvål eller något ämne som inte tillåter fram-/bakhjulen att få säkert grepp på underlaget.


Försök aldrig utföra en förflyttning av patienten när hygienstolen står på halt underlag. Vi rekommenderar att förflyttningar görs på rena, torra och halkfria underlag. Hårda ytor som klinker, trä eller betong ger inte tillräckligt med grepp för att förhindra att fram-/bakhjulen glider. En heltäckningsmatta är det optimala underlaget. Var medveten om att lösa mattor och duschmattor kan glida på golv och därigenom utgöra ett farligt underlag.



STÅ **INTE** på någon del av ramen på den mobila Raz-hygienstolen.

Använd ALDRIG fotplattorna som hjälp vid förflyttning. Detta kan få hygienstolen att välta. Sväng fotstöden åt sidan eller ta av dem helt vid förflyttningar för att ge fri tillgång till hygienstolen.

Den mobila Raz-hygienstolen **är INTE** avsedd att användas som transportanordning eller ersätta en rullstol.

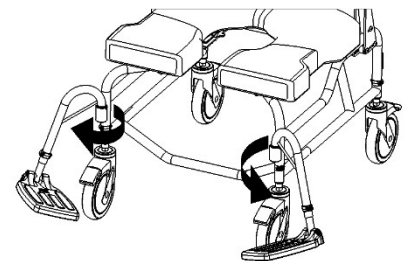

VIKTIGT!

LÄMNA ALDRIG ANVÄNDAREN UTAN UPSIKT I EN MOBIL RAZ-HYGIENSTOL.

VIKTIGT!

LYFT ALDRIG EN RAZ-HYGIENSTOL I ARM- ELLER FOTSTÖDEN NÄR ANVÄNDAREN SITTER I STOLEN!


VIKTIGT!

RÅDGÖR MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL OM DU SOM ANVÄNDARE UPPLEVER OBEHAG, FÖRÄNDRINGAR I RÖRLIGHET ELLER SVÄRIGHETER ATT ANVÄNDA ENHETEN.

VIKTIGT!

KONTROLLERA ALLTID ATT SITSEN ÄR KORREKT MONTERAD OCH LÅST INNAN EN ANVÄNDARE FLYTTAS TILL STOLEN. DE BAKRE SITSFÄSTENA MÅSTE VARA HELT ANSLUTNA UNDER DE BAKRE STÖDRÖREN. DE FRÄMRE SITSFÄSTENA MÅSTE VARA ORDENTLIGT LÅSTA RUNT DE FRÄMRE STÖDRÖREN. BÅDE DE FRÄMRE OCH BAKRE SITSFÄSTENA SKA SÄTTAS PÅ PLATS GENOM ATT DRA ÅT DE 8 SKRUVARNA PÅ SITSENS UNDERSIDA.

INSTRUKTIONER FÖR KORREKT AVLÄGSNANDE OCH MONTERING AV SITSEN FÖR RENGÖRING SKA TILLHANDAHÅLLAS ANVÄNDAREN OCH/ELLER VÅRDARE.

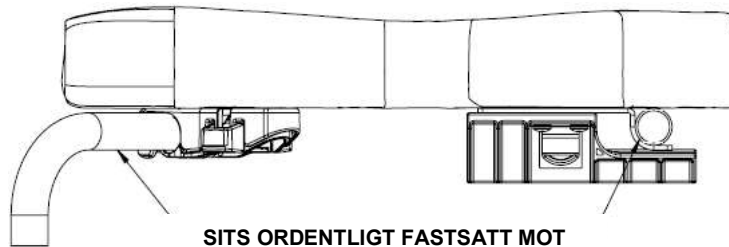

**SITS ORDENTLIGT FASTSATT MOT
FRÄMRE OCH BAKRE STÖDRÖR**

AVSEDD ANVÄNDNING

INDIVIDUELLT KONFIGURERAD, MOBIL OCH STATIONÄR TOALETSTOL FÖR ANVÄNDNING VID DUSCH OCH TOALETTBESÖK.

VIKTIGT!

RAZ-AP600 OCH RAZ-SP600 ÄR AVSEDDA FÖR FÖLJANDE ANVÄNDNING:

- SOM ETT HJÄLPMEDEL FÖR ATT DUSCHA/BADA, GÅ PÅ TOALETTEN OCH FÖR ANDRA AKTIVITETER I SAMBAND MED PERSONLIG VÅRD OCH PERSONLIG HYGIEN;
- SOM STÖD FÖR ANVÄNDARENS KROPP I SITTANDE LIGGANDE STÄLLNING;
- MED ELLER UTAN HJÄLP AV EN SKÖTARE;
- ÖVER EN VANLIG TOALET ELLER SOM EN KLOSETT MED KLOSETTURTAG;
- ENDAST I INOMHUSMILJÖER;
- I BÅDE TYP A, MILJÖER MED STOR ANVÄNDNING (t.ex. INSTITUTIONER) OCH I HEMMILJÖER

RAZ-AP600 OCH RAZ-SP600 HAR INGA TERAPEUTISKA ELLER DIAGNOSTISKA FUNKTIONER OCH ÄR INTE AVSEDDA ATT ANVÄNDAS FÖR TERAPEUTISKA ELLER DIAGNOSTISKA ÄNDAMÅL. ALLA PRODUKTER INOM RAZ-SORTIMENTET ÄR ICKE-STERILA, ÅTERANVÄNDBARA, ICKE-INVASIVA OCH ICKE-IMPLANTERBARA.

RAZ-AP600 OCH RAZ-SP600 ÄR AVSEDDA ATT ANVÄNDAS AV PERSONER MED NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA SOM KAN HA SVÅRT ATT STÅ ELLER HÅLLA BALANSEN NÄR DE UTFÖR AKTIVITETER SOM DUSCHNING, TOALETTBESÖK ELLER PERSONLIG HYGIEN. TYPISKA ANVÄNDARE HAR BEGRÄNSAD UTHÅLLIGHET OCH KONTROLL ÖVER HÅLLNINGEN OCH KAN BEHÖVA HJÄLP AV EN VÅRDARE FÖR AKTIVITETER SOM DUSCHNING, TOALETTBESÖK OCH PERSONLIG HYGIEN. FÖR PRODUKTER MED LUTNINGSFUNKTION KAN ANVÄNDNINGEN AV LUTNINGSFUNKTIONEN VARA KONTRAINDICERAD OM ANVÄNDAREN ÄR KÄNSLIG FÖR SKJUVKRAFTER PÅ SITTYTOR NÄR SITSEN ÖPPNAS I EN BAKÅTRIKAD VINKEL.

ETIKETTER ELLER SYMBOLER PÅ PRODUKTEN


PRODUKT BETECKNING	RAZ-AP600 / RAZ-SP600
TILLVERKARENS ADRESS	 Raz Design Inc. 135 Railside Road Toronto, ON Canada M3A 1B7
AUKTORISERAD REPRESENTATIV DETALJ	EC REP UKRP CH REP
PRODUKTIDENTIFIERARE (PI)	SN SC-XXXXXX
UDI-DI	UDI AP600: 628758001607 SP600: 628758002604
MEDICINTEKNISK PRODUKT	MD
ÖVERENSSTÄMMELSE MED EUROPEISKA BESTÄMMELSER	
TILLVERKNINGSDATUM	
MAXIMAL ANVÄNDARVIKT	
LÄS BRUKSANVISNINGEN	

INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR BRUKSANVISNING FÖR ANVÄNDARE OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

1.0 ALLMÄN INFORMATION	9
1.1 Mobila hygienstolar av modellen Raz-AP600/SP600 – översikt.....	9
1.2 Mobila hygienstolar av modellen Raz-AP600/SP600 – specifikationer	9
2.0 MONTERING: ENDAST AVSEDD FÖR ANVÄNDNING AV ÅTERFÖRSÄLJARE.....	10
2.1 Ryggstödet.....	10
2.1.1 Montera ryggstödet.....	10
2.1.2 Justera ryggstödsvinkeln	10
2.1.3 Justera ryggstödet djup.....	11
2.1.4 Justera den spänningsbara ryggklädseln.....	11
2.2 Länkhjulen.....	12
2.2.1 Montera länkhjulen	12
2.2.2 Justera sitthöjden – länkhjulen.....	12
2.3 Bakhjulen – SP600-modellen	13
2.3.1 Montera bakhjulen med standardaxelskruv – SP600-modellen.....	13
2.3.2 Justera sitthöjden – bakhjulen på SP600-modellen.....	13
2.3.3 Balansera bakhjulen – SP600-modellen	13
2.4 Inställning av hjullås – SP600-modellen	14
2.5 Raz Sitsen.....	14
2.5.1 Montera Raz sitsen.....	14
2.5.2 Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) – Justering.....	14
2.6 Justerbart Fotstöd	15
2.6.1 Montering av justerbart fotstöd	15
2.6.2 Justera det justerbara fotstödet	15
2.7 ENDAST FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE – Montera fästelement	15
3.0 ANVÄNDNING OCH DRIFT	16
3.1 Uppvikbara Armstöd.....	16
3.2 Spänningsjusterbar ryggklädsel	16
3.3 Raz Sitsen.....	16
3.4 Justerbara fotstöd	17
3.5 Hjullås – SP600-modellen	17
3.6 Klosetturtag.....	17
3.7 Länkhjul	17
4.0 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	18
4.1 Rengöring efter varje användning	18
4.1.1 Klosetturtag	18
4.1.2 Sits	18
4.2 Rengöring vid behov	18
4.2.1 Spänningsjusterbar ryggklädsel.....	18
4.2.2 Ram, armstöd, justerbara fotstöd och andra komponenter.....	18
4.3 Rekommenderade rengöringsprodukter	18
5.0 INCIDENTRAPPORTERING	19
6.0 BEGRÄNSAD GARANTI	19
7.0 KONTAKTUPPGIFTER	20

1.0 ALLMÄN INFORMATION

1.1 Mobila hygienstolar av modellen Raz-AP600/SP600 – översikt

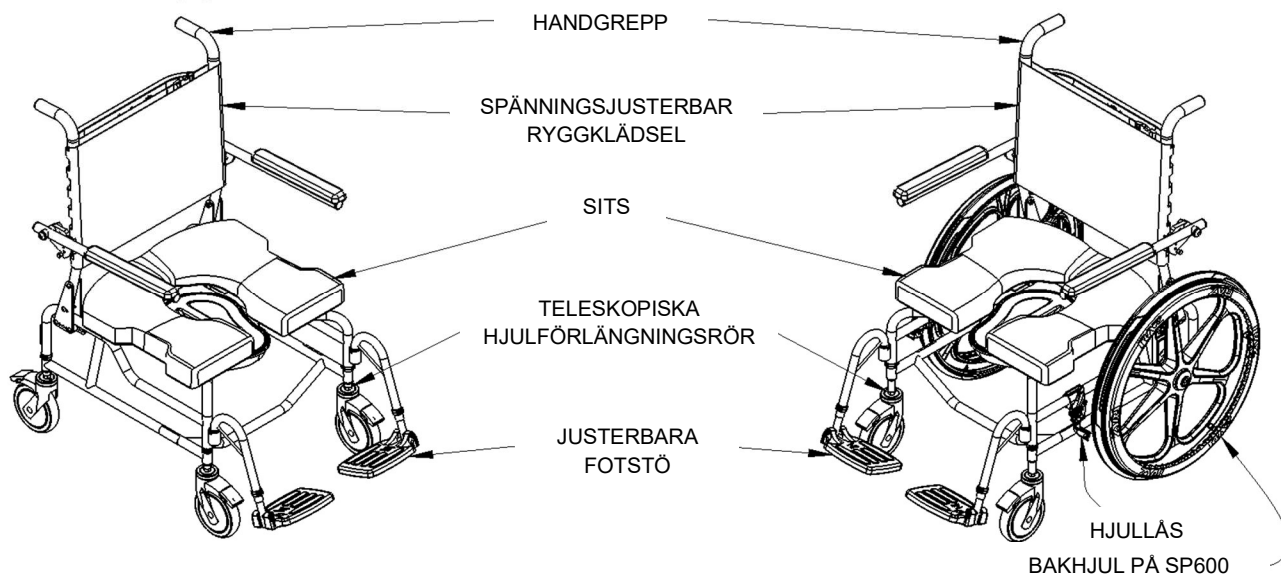

1.2 Mobila hygienstolar av modellen Raz-AP600/SP600 – specifikationer

SPECIFIKATIONER	Raz-AP600	Raz-SP600
VIKTKAPACITET	275 kg (605 lbs)	275 kg (605 lbs)
RAMBREDD (sits- och ryggram)	56 cm (22")	56 cm (22")
TOTAL BREDD	68 cm (26.75")	75 cm (29.5")
TOTAL LÄNGD (med fotstöd)	95 cm (37.25")	109 cm (43")
SITTBREDD (hygiensits med klosetturtag)	58 cm (23")	58 cm (23")
SITTDJUP (från framsidan av ryggrör till sitsens framkant)	43-48 cm (17"-19")	43-48 cm (17"-19")
FRIGÅNGS BREDD	41 cm (16")	41 cm (16")
FRIGÅNGSHÖJD med klosetturtagsfästen:	5" länkhjul: 37-47 cm (14.5"-18.5") 6" länkhjul: 39-49 cm (15.5"-19.5")	5" länkhjul: 37-42 cm (14.5"-16.5") 6" länkhjul: 39-42 cm, 49 cm (15.5"-16.5", 19.5")
FRIGÅNGSHÖJD utan klosetturtagsfästen:	5" länkhjul: 39-49 cm (15.25"-19.25") 6" länkhjul: 41-51 cm (16.25"-20.25")	5" länkhjul: 39-44 cm (15.25"-17.25") 6" länkhjul: 41-44 cm, 51 cm (16.25"-17.25", 20.25")
ARMSTÖDSHÖJD ÖVER SITS	24cm (9.5")	24cm (9.5")
SITTHÖJD	5" länkhjul: 48-58 cm (19"-23") 6" länkhjul: 51-61 cm (20"-24") i steg om 2.5 cm (1")	5" länkhjul: 48-53 cm (19"-21") 6" länkhjul: 51-53 cm, 61 cm (20"-21", 24") i steg om 2.5 cm (1")
PRODUKTVIKT (med fotstöd)	5" länkhjul: 25 kg (54.5 lbs) 6" länkhjul: 26.7 kg (56.5 lbs)	5" länkhjul: 30.9 kg (68 lbs) 6" länkhjul: 31.3kg (69 lbs)
MATERIAL I RAM OCH FÄSTELEMENT	Rostfritt stål (livstidsgaranti mot korrosion)	
MINSTA VÄNDCIRKEL	105 cm (41.5")	163 cm (64")

2.0 MONTERING: ENDAST AVSEDD FÖR ANVÄNDNING AV ÅTERFÖRSÄLJARE

VIKTIGT: Användning av skruvdragare rekommenderas inte för att förhindra kallsvetsning av fästelement

- Applicera ett smörjmedel (flytande rengöringsmedel, tvål, läppbalsam, vax etc.) på gängorna innan fästanordningarna dras åt för att minska bindningen.
- Dra inte åt fästelementen för hårt.

VIKTIGT!

PATIENTEN FÅR ALDRIG SITTA I HYGIENSTOLEN NÄR DEN JUSTERAS.

2.1 Ryggstödet

2.1.1 Montera ryggstödet

Verktyg som krävs: 3/16-delstums insexnyckel, 1/2-delstums fastnyckel


1. Ta fram hygienstolen ur emballaget.
2. Lyft upp ryggstödet i upprätt läge.
3. Sätt i en sexkantskruv med insexhuvud i ett av de två hålen i mitten av den yttre av ryggstöds fästplattor.

OBSERVERA: För en ryggstödsvinkel på 93 grader väljer du det bakre hålet, och för en ryggstödsvinkel på 100 grader det främre hålet.


TIPS: Du kan sätta i en krysspårsskruvmejsel genom en fästplatta och ram för att ryggstödet tillfälligt ska hållas kvar i upprätt läge.

4. Sätt fast en nylockmutter på den andra änden av skruven.
5. Dra åt med insexnyckel och fastnyckel tills änden av skruven sticker ut en eller två gånger utanför nylonlåsmuttern.
6. Upprepa steg 3 till 5 för det andra ryggstödsröret.

OBSERVERA: Smörj fästelementen igen innan de dras åt.

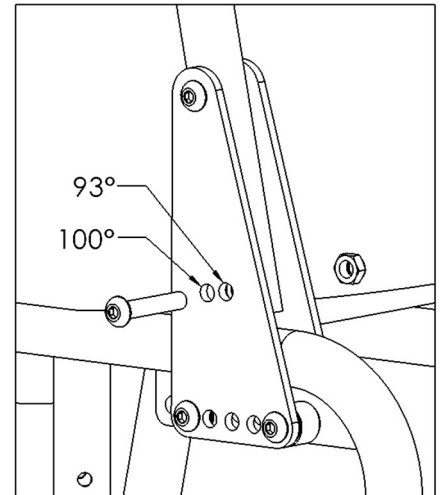


VY OVANIFRÅN AV RYGGSTÖDSMONTERING

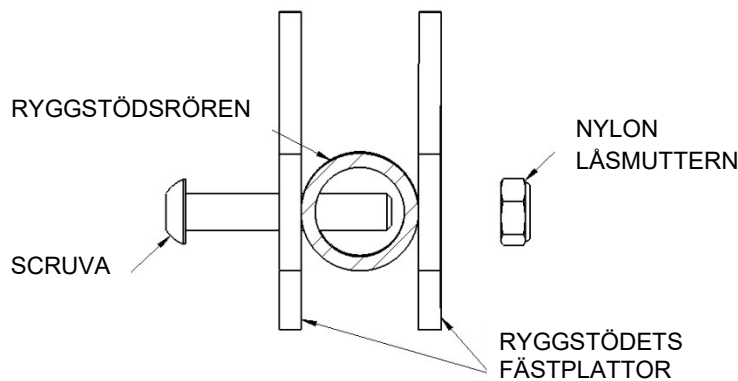

2.1.2 Justera ryggstödsvinkeln

Verktyg som krävs: 3/16-delstums insexnyckel, 1/2-delstums fastnyckel


1. Lossa på och ta bort låsmuttrarna på de båda ryggstödsrören.
 2. Ta bort skruvarna från båda ryggstödsrören.
 3. Vrid ryggstödet till något av de två lägena på ryggstöds fästplattor.
- OBSERVERA:** För en ryggstödsvinkel på 100 grader väljer du det främre hålet, och för en ryggstödsvinkel på 93 grader det bakre hålet.
4. När ryggstödet är på plats sätter du tillbaka skruvarna i hålen i ryggstöds fästplattor.
 5. Fäst skruvarna med låsmuttrar.
 6. Dra åt med insexnyckel och fastnyckel.

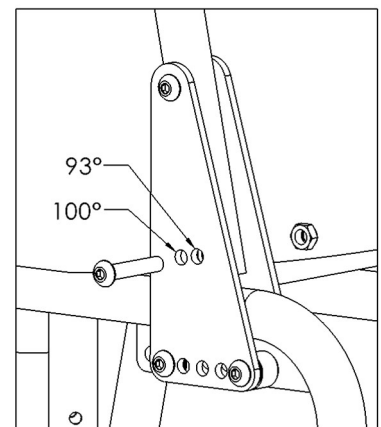


2.1.3 Justera ryggstödet djup

Verktyg som krävs: 3/16-delstums insexnyckel, 1/2-delstums fastnyckel

1. Lossa på och ta bort låsmuttrarna på båda insidorna av sitsramen.
2. Ta bort båda av de skruvarna med gänga från ryggstödet ribbor.
3. Ställ in önskat sittdjup genom att positionera om hålen i ryggstödet ribbor över hålen i sitsramen.
4. När ryggstödet är på plats sätter du i skruvarna i hålen i ryggstödet ribbor, och skjuter dem sedan helt igenom.
5. Sätt fast låsmuttrar på den andra änden av skruvarna.
6. Dra åt monteringen.

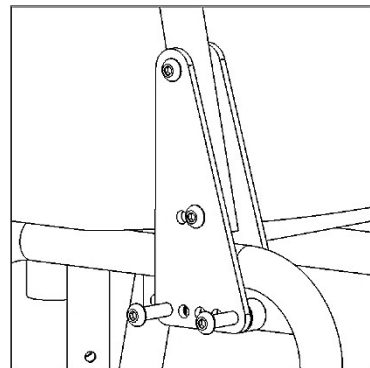


VY UNDERIFRÅN AV RYGGSTÖDSMONTERING

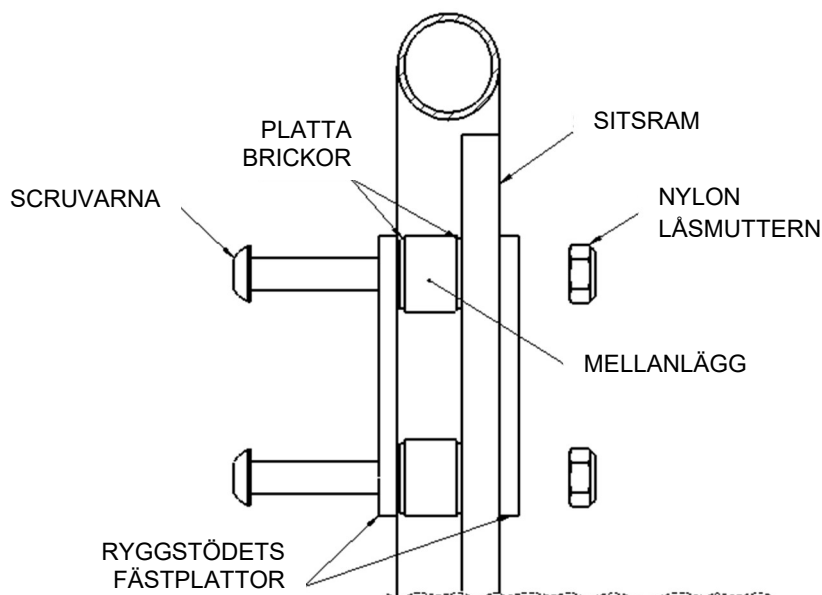

2.1.4 Justera den spänningsbara ryggklädseln

Ryggstödet klädsel kan anpassas genom att man drar åt eller lossar på remmarna. Till exempel kan den andra och tredje remmen nedifrån spännas för att skapa mer uttalat stöd för ländryggen.

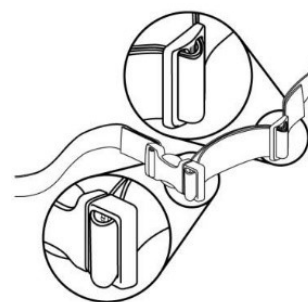

VIKTIGT!

OM SITTHÖJDEN ÖKAS, BAKHJULEN FLYTTAS FRAMÅT ELLER RYGGSTÖDSVINKELN ÖKAS FÖRSÄMRAS BAKÅTSTABILITETEN AVSEVÄRT. OM NÅGON AV DESSA JUSTERINGAR HAR GJORTS ÄR DET VIKTIGT ATT EN STABILITETSKONTROLL GÖRS. EN STABILITETSKONTROLL UTFÖRS MED EN SKÖTARE BAKOM HYGIENSTOLEN SAMT MED TIPPSKYDDEN MONTERADE OCH KORREKT JUSTERADE.

2.2 Länkhjulen

VIKTIGT!

SAMTLIGA HJULSTOLPAR MÅSTE JUSTERAS TILL SAMMA HÖJD. FÖRSÖK ALDRIG ÄNDRA RAMVINKELN GENOM ATT ÄNDRA HJULENS POSITION. HJULPOSITIONER SOM SKILJER SIG ÅT INVERKAR MENLIGT PÅ HYGIENSTOLENS STABILITET OCH KAN GÖRA ATT HYGIENSTOLEN VÄLTER.

2.2.1 Montera länkhjulen

För SP600: Hjulet måste monteras i hål som motsvarar önskad sitt- och länkhjulhöjd så att hygienstolens ram är i plan med marken.

Fabriksinställning – hjulförlängning för SP600-modellen	
24 tums bakhjul	Näst lägsta hålet på hjulförlängningsröret


1. Ta upp länkhjulen ur tillbehörslådan.
2. Skjut in hjulförlängningsröret underifrån, genom ryggstödsröret, till önskat läge.
3. Rikta in hålet på ramen mot hjulförlängningsröret. Det kan vara nödvändigt att rotera hjulförlängningsröret för att rikta in hålen.

TIPS: Det kan vara enklare att först låsa hjulet.

4. Tryck snäppstiftet genom ram- och hjulförlängningsröret. Se till att stiftet förs in helt genom röret, och att den gröna plastklämman sitter fast ordentligt runtom utsidan av ryggstödsröret.

5. Upprepa steg 2 till 4 för alla länkhjulen i monteringen.

OBSERVERA: Om riktnings spärr beställdes med AP600-hygienstolen kommer ett hjul att ha låset monterat på hjulstängan. Hjulet med riktnings spärr måste monteras riktat framåt i en av de bakre hjulpositionerna.

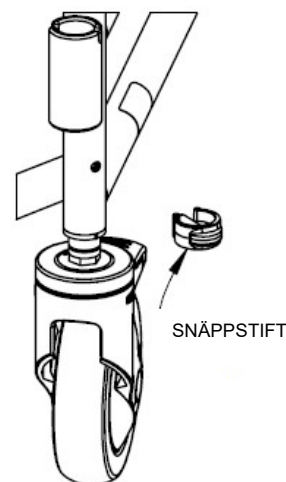

2.2.2 Justera sitthöjden – länkhjulen

AP600-modellen har fyra teleskopiska hjulförlängningar med ett höjjusteringsintervall på ca 10 cm. SP600-modellen har två hjulförlängningsrör framtill som ger ett höjjusteringsintervall på ca 10 cm vid användning av 24 tums bakhjul och 6 tums länkhjul.

1. Ta bort snäppstiftet som håller hjulförlängningsröret på plats från stolsramen.
2. Ställ hjulen i önskad position.
3. Passa in hålen i hjulförlängningsröret mot ramhålen och sätt i snäppstiften.

TIPS: Det kan vara enklare att först låsa hjulet.

4. Se till att stiften förs in helt genom ryggstödsröret, och att de gröna plastklämmorna sitter fast ordentligt runtom ryggstödsrören.
5. Upprepa steg 1 till 4 för resten av länkhjulen på hygienstolen.

VIKTIGT!

DESTO HÖGRE SOM HYGIENSTOLEN JUSTERAS, DESTO LÄTTARE KOMMER DEN EMELLERTID ATT VÄLTA. LÄNKHJULEN FÅR ALDRIG JUSTERAS TILL OLIKA HÖJDER. EN HYGIENSTOL SOM INTE ÄR I PLAN MED MARKEN UTGÖR EN EXTREM FARA FÖR PATIENTEN.


LÄNKHJULEN SKA ALLTID STÄLLAS IN PÅ SÅ LÅG HÖJD SOM MÖJLIGT MEDAN PATIENTENS BEHOV FORTFARANDE TILLGODOSES. OM DE STÄLLS IN I ETT FÖR HÖGT LÅGE MEDFÖR DETTA ATT TYNGDPUNKTEN FÖRFLYTTAS, VILKET KAN ORSAKA PERSONSKADOR ELLER SKADOR PÅ PRODUKTEN. VI REKOMMENDERAR STARKT ATT MEDICINSKT KVALIFICERAD PERSONAL HJÄLPER TILL MED ATT KONTROLLERA HYGIENSTOLENS STABILITET NÄR HÖJDINSTÄLLNINGEN ÄNDRATS.

2.3 Bakhjulen – SP600-modellen

2.3.1 Montera bakhjulen med standardaxelskruv – SP600-modellen

Verktyg som krävs: 3/4-delstums fastnyckel, 3/4-delstums hylsnyckel

1. Ta fram båda hjulen ur emballaget.
2. Ta fram axelbultarna och nylockmutterarna ur kartongen.
3. Avlägsna navkapseln från det ena hjulet.
4. För in axelbulten genom hjulnavet, axelbulthållaren drivhjulsplattan.
5. Gänga på nylockmuttern på axelbulten och dra åt tills hjulsatsen sitter säkert. *Dra inte åt för hårt eftersom hjulet måste snurra fritt.*
6. Sätt tillbaka navkapseln genom att trycka på den tills den klickar.
7. Upprepa steg 3 till 6 för det andra hjulet.

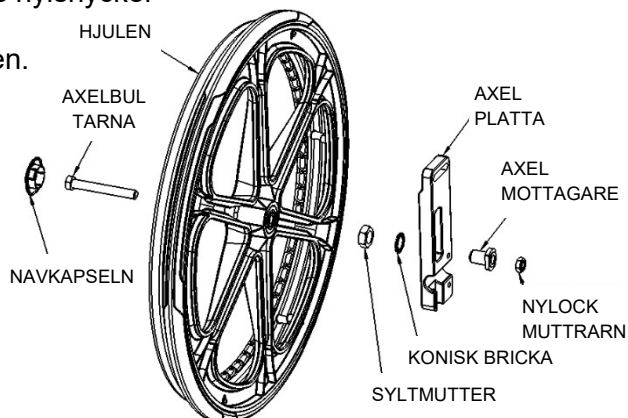


2.3.2 Justera sitthöjden – bakhjulen på SP600-modellen

Verktyg som krävs: 3/4-delstums hylsnyckel, 3/4-delstums fastnyckel,
1 1/8-delstums skiftnyckel

1. Avlägsna navkapseln från det ena hjulet.
2. Ta bort axelbulten, axelbulthållaren och hjulsatsen från drivhjulsplattan.
3. För in axelbulten genom hjulsatsen och axelbulthållaren, och sedan vidare in i önskat håll.

OBSERVERA: Se bilden till höger för att hitta rätt håll.

4. Dra åt nylockmuttern tills hjulsatsen sitter ordentligt fast. *Dra inte åt för hårt eftersom hjulet måste snurra fritt.*
5. Sätt tillbaka navkapseln genom att trycka på den tills den klickar.
6. Justera hjullåsen.
7. Upprepa steg 1 till 6 för det andra hjulet. Dra i båda hjulen för att kontrollera att de sitter ordentligt.

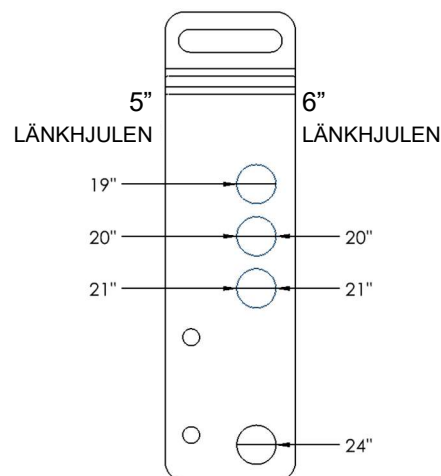


2.3.3 Balansera bakhjulen – SP600-modellen

Verktyg som krävs: 3/16-delstums insexnyckel, (x2) 1/2-tums fastnycklar,
3/4-delstums hylsnyckel, 3/4-delstums fastnyckel

1. Lossa på hjullåsen.
2. Avlägsna navkapseln från det ena hjulet. Lossa på och ta bort axelbulten och låsmuttern, och lägg hjulsatsen åt sidan.

TIPS: Underlätta hela proceduren genom att lägga hygienstolen på ena sidan.

3. När hjulet är av lossar du på (ta inte bort) den nedre sexkantskruven med insexhuvud på ryggstödet fästplatta.
4. Lossa (ta inte bort) skruvarna på klämmorna på den nedre drivhjulsplattan.
5. Justera drivhjulsplattan och notera det exakta läge som överensstämmer med motsvarande läge för det andra hjulets drivhjulsplatta.
6. Dra åt skruvarna på klämmorna nedtill på drivhjulsplattan och sexkantskruvarna med insexhuvud på ryggstödet fästplatta.
7. Byt ut hjulet, axelbulten och låsmuttern.
8. Dra åt axelbulten och låsmuttern tills de är ordentligt åtdragna.
9. Sätt tillbaka navkapseln genom att trycka på den tills den klickar.
10. Upprepa steg 1 till 9 för det andra hjulet. Var noga med att rikta in hjulen ordentligt mot varandra.
11. Justera om hjullåsen.

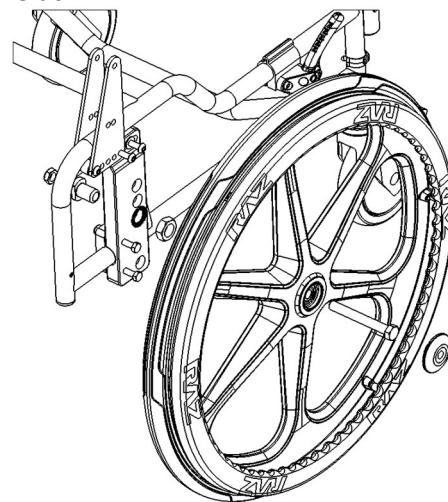

2.4 Inställning av hjullås – SP600-modellen


Raz hjullås har en unik svängbar bromssko som tränger in i däckets alltmär när hjulets rotationskraft ökar. Detta gör att låset kan låsas med mindre kraft än konventionella hjullås.

Verktyg som krävs: 5 millimeters insexnyckel

1. Lossa (ta inte bort) de två klämskruvarna.
2. Aktivera hjullåset genom att trycka handtaget bort från hjulet.
3. Skjut det mot hjulet tills skon kommer i kontakt med däckets.
4. Koppla ur hjullåset och skjut det 10 mm mot hjulet.
5. Dra åt klämskruvarna och testa hjullåset. Justera vid behov hjullåset ytterligare för att finjustera dess position.

*För att testa hjullåset, rotera hjulet för att bekräfta att skon roterar och tränger ner i däckets med tillräcklig kraft för att förhindra rotation av hjulet. Justera **INTE** så att skon tränger ner i däckets med den kraft som krävs med konventionella hjullås.*


6. Upprepa steg 1–5 för den andra sidan.

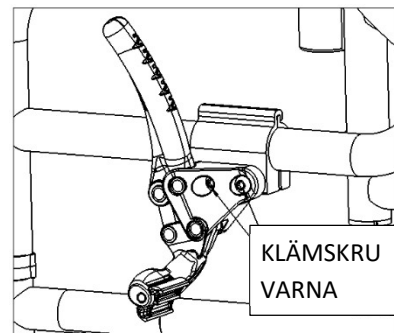

2.5 Raz Sitsen

2.5.1 Montera Raz sitsen

1. Se till att de främre fästena är i det öppna läget. För att öppna de främre fästena trycker du på flikarna på den gångjärnsförsedda delen av fästet.
2. Skjut sitsens baksida över de bakre tvärgående rören samtidigt som du sänker sitsens framsida ner mot ramen. Kontrollera att sitsens bakre fästen hakar fast nedanför de tvärgående rören.
3. Fortsätt sänka sitsens framsida tills sitsens främre fästen går i ingrepp mot sitsens främre stödrör.
4. Säkra sitsen på plats genom att stänga dess främre fästen (detta gör du genom att pressa klämman inåt och stänga respektive fäste runt det främre stödröret).
5. Utför steg 1 till 4 ovan i omvänd ordningsföljd för att ta av sitsen från ramen.

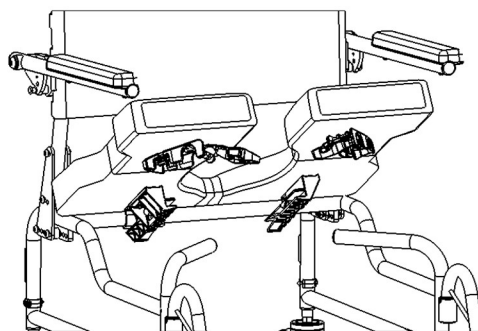


2.5.2 Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) – Justering

Sitsen har cirka 5 cm (2") för justering i fram- och bakåtriktning, vilket gör det möjligt att placera öppningen på sitsen optimalt runt användarens Ischial Tuberosities.

Verktyg som krävs: Krysspårsskruvmejsel nr 2

1. Lösgör sitsen genom att öppna de främre fästena.
2. Lyft framsidan av sitsen och dra uppåt och sedan framåt för att ta bort sitsen från stolen.
3. Lossa på (utan att ta bort) de åtta skruvarna som håller fast de främre och bakre sitsfästena mot sitsens undersida. *Observera: De bakre sitsfästena visas nedan utan klossfästefästet för tydlighetens skull.*

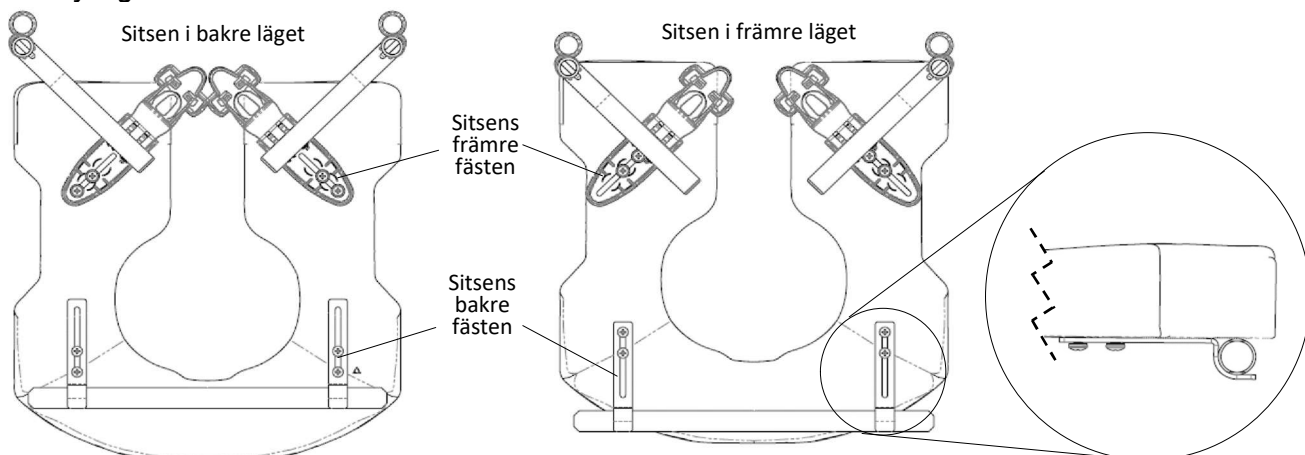


4. Placera sitsryggen på plats på ramen och stäng de främre sitsfästena runt sitsens främre stödrör.
5. Skjut/vrid sitsen till önskat läge.
6. Se till att de bakre sitsfästena är stadigt placerade mot sitsens bakre stödrör.
7. Dra åt alla åtta skruvar som fäster de främre och bakre sitsfästena för att förhindra ytterligare rörelse av sitsen. *Observera: Se till att de främre och bakre sitsfästena är ordentligt fastsatta runt de främre och bakre stödrören innan du låter en användare sätta sig i stolen.*

2.6 Justerbart Fotstöd


2.6.1 Montering av justerbart fotstöd

1. Ta ut fotstöden ur tillbehörsådan.
2. Placera fotstödens upphängningsrör i hållarna som är fastsvetsade framtill på stolsramen. *Om stödrören är riktade framåt kommer stiften på rören att gå i ingrepp i spåren på hållarna och låsas på plats.*

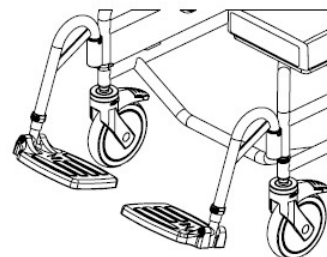


2.6.2 Justera det justerbara fotstödet

1. Avlägsna snäppstiftet i plast från det ena av fotstödetts upphängningsrör.
2. Justera fotplattans förlängningsrör vertikalt till önskad höjd för fotstödetts upphängningsrör.
3. Tryck snäppstiftet genom fotstödetts upphängningsrör och hjulförlängningsröret. Se till att snäppstiftet förs in helt genom röret, och att den gröna plastklämman sitter fast ordentligt runtom utsidan av upphängningsröret.
4. Upprepa steg 1 till 3 för den andra fotplattan.

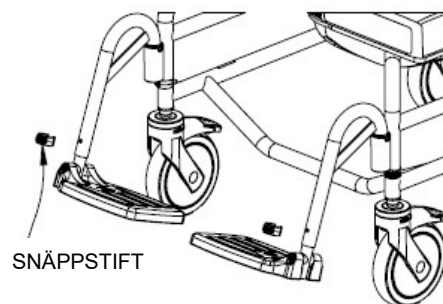

2.7 ENDAST FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE – Montera fästelement


Alla fästen ska monteras så att de sitter ordentligt fast. Låsmuttrar som av någon anledning tas bort kan behöva bytas ut istället för att sättas tillbaka. Kontrollera funktionen hos nylockmuttrarna innan du skruvar på dem på respektive skruv igen. Det ska vara ett tydligt motstånd vid åtdragning. Om så inte är fallet med någon av nylockmuttrarna ersätter du den med en ny. Det är tillrådligt att årligen kontrollera att alla fästelement sitter fast ordentligt.

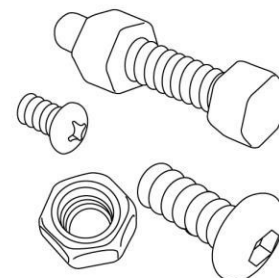

3.0 ANVÄNDNING OCH DRIFT

3.1 Uppvikbara Armstöd

Armstöden kan fällas upp för att underlätta förflyttning av användaren till/från hygienstolen, och låses automatiskt (om låset som finns som tillval används) när de fälls ned.

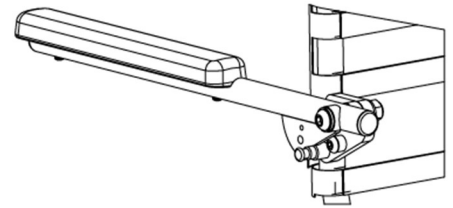


3.2 Spänningsjusterbar ryggklädsel

Multipositionsryggstödet levereras med en spänningsjusterbar ryggklädsel som ger stöd åt bålen för optimal positionering och komfort. Klädseln kan tas av och tvättas i maskin


Så här monterar du den spänningsjusterbara ryggklädseln:

1. Placera tyget mot ryggstödsrörens framsida, och se till att klämmorna på remmarna är vända bort från tyget och att öglorna pekar nedåt medan du lindar tyget runtom.
2. Den första (1) och andra (2) remmen placeras ovanför tvärstaget.
3. Den tredje (3), fjärde (4) och femte (5) remmen placeras mellan tvärstaget och armstödet fästplattor.
4. Den sjätte (6) remmen placeras nedanför armstödet fästplattor.
5. Justera alla remmarna efter användarens behov.

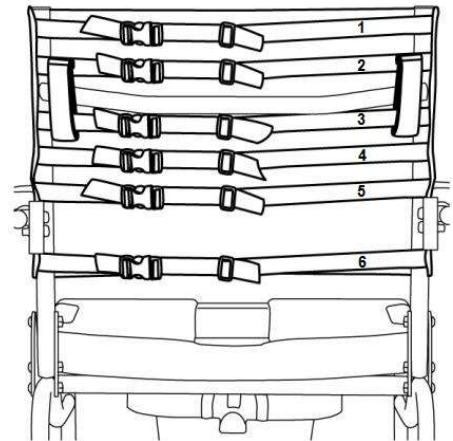

Klädseln kan anpassas genom att man drar åt eller lossar på remmarna med hjälp av spännena. Till exempel kan den andra och tredje remmen nedifrån spännas för att skapa mer uttalat stöd för ländryggen.


Ta av den spänningsjusterbara ryggklädseln genom att lossa spännena på remmarna.

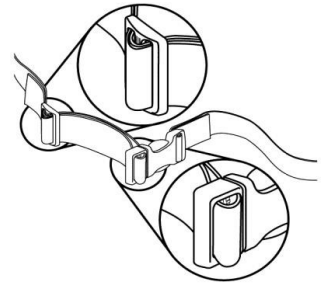

3.3 Raz Sitsen

Så här monterar du en Raz-sits:

1. Se till att de främre fästena är i det öppna läget. Du öppnar fästena genom att pressa inåt tills de öppnas.
2. Skjut sitsens baksida över de bakre tvärgående rören samtidigt som du sänker sitsens framsida ner mot ramen. Kontrollera att sitsens bakre fästen hakar fast nedanför de tvärgående rören.
3. Fortsätt sänka sitsens framsida tills sitsens främre fästen går i ingrepp mot sitsens främre stödrör.
4. Säkra sitsen på plats genom att stänga dess främre fästen (detta gör du genom att pressa klämman inåt och stänga respektive fäste runtom det främre stödröret).
5. Utför steg 1 till 4 ovan i omvänd ordningsföljd för att ta av sitsen från ramen.

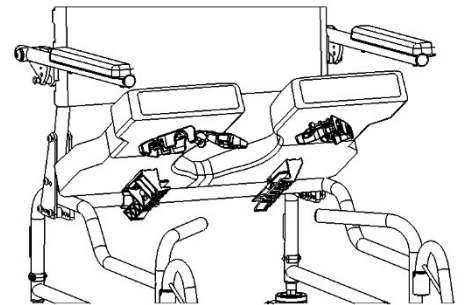

VIKTIGT!

FÖRSÖK ALDRIG ATT ÄNDRA SITSHÖJDEN UTAN HJÄLP AV EN KVALIFICERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. HÖGRE SITSLÄGE INVERKAR MENLIGT PÅ HYGIENSTOLENS STABILITET OCH KAN GÖRA ATT HYGIENSTOLEN VÄLTER MED PERSONSKADOR SOM FÖLJD.

VIKTIGT!

JUSTERINGAR AV RAM OCH SITS FÅR ENDAST UTFÖRAS AV TEKNIKER FRÅN EN KVALIFICERAD RAZ-ÅTERFÖRSÄLJARE. FÖRSÖK ALDRIG ÄNDRA RAMVINKELN GENOM ATT ÄNDRA HJULENS POSITION. RAMEN SKA ALLTID VARA I PLAN MED MARKEN. OLÄMPLIGA HJULPOSITIONER KAN INVERKA MENLIGT PÅ HYGIENSTOLENS STABILITET OCH GÖRA ATT HYGIENSTOLEN VÄLTER. DET FÖRELIGGER DÅ RISK FÖR ALLVARLIGA PERSONSKADOR PÅ PATIENTEN OCH/ELLER SKADOR PÅ HYGIENSTOLEN.

3.4 Justerbara fotstöd


Justerbara fotstöd är standard på alla mobila Raz--hygienstolar. Vid förflyttning kan fotstöden vikas upp, svängas undan eller tas av helt. Justerbara fotstöd kan förlängas för användare med längre ben genom det valfria fotstödsförlängningsröret – ett 5 centimeter (2") längre rör som kan beställas för alla mobila Raz-hygienstolar.

Så här sätter du på de justerbara fotstöden:

1. Placera fotstödens upphängningsrör i fotstödshållarna.
2. Om upphängningsrören är inriktade framåt kommer stiften på rören att gå i ingrepp i spåren på hållarna och låsas på plats.

Så här justerar du längden på de justerbara fotstöden:

1. Avlägsna snäppstiftet från det ena av fotstödetts upphängningsrör.
2. Ändra fotplattans position till en längd som är lämplig för patienten.
3. Tryck snäppstiftet genom fotstödetts upphängningsrör och genom innerröret.

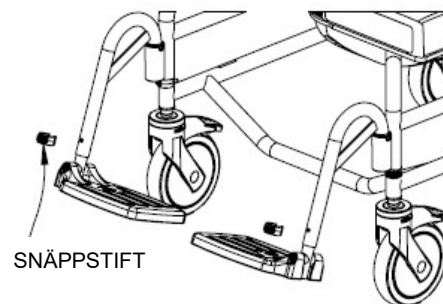


Så här svänger du undan de justerbara fotstöden:

1. Lyft fotstödens upphängningsrör uppåt tills stiften går ur spåren.
2. Sväng fotstöden utåt eller inåt.

Ta av de justerbara fotstöden genom att lyfta upp dem ur hållarhylsorna på ramen.

3.5 Hjullås – SP600-modellen


Hjullåsen på en Raz-SP600 kan aktiveras genom att skjuta handtagen framåt. Bakhjulen slutar då att rotera. **För maximal stabilitet MÅSTE BÅDA hjullåsen vara i funktion.** För att sätta hjullåsen ur funktion drar du handtagen bakåt.

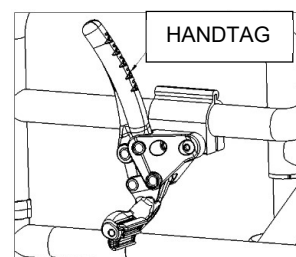

3.6 Klosetturtag

Raz-klosetturtaget har en avlång utformning som passas in rätt under sitsen för att minimera stänk. En unik stänkreducerande upphöjd kant finns mitt i klosetturtaget. Den högglossiga ytan underlättar rengöring och urspolning medan hållpipen och handtaget gör det lättare att tömma klosetturtaget. Klosetturtaget avlägsnas genom att skjuta det bakåt.

OBSERVERA: När klosetturtaget sätts tillbaka igen är du noga med att det går i spår i de gröna fästena, och sedan skjuts framåt tills det tar stopp.

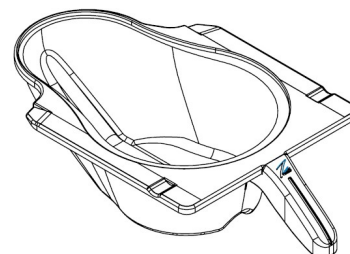

3.7 Länkhjul

Varje mobil Raz-hygienstol är utrustad med en dubbelverkande låsfunktion som stoppar länkhjulen från att snurra och rulla samtidigt. Aktivera de dubbelverkande låsen genom att trycka med foten på änden av länkhjulets bromsspak tills spaken hakar i i läget "On" (på). Du inaktiverar de dubbelverkande låsen genom att trycka med foten på den upphöjda änden av de dubbelverkande låsen tills den släpper.



VIKTIGT!

EN KVALIFICERAD RAZ-ÅTERFÖRSÄLJARE BÖR KONTROLLERA ALLA FÄSTELEMENT, LÄNKHJUL OCH HJULLÅS, JÄRN- OCH METALLBESLAG SAMT ALLA ÖVRIGA RÖRLIGA KOMPONENTER MINST EN GÅNG OM ÅRET.

4.0 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

4.1 Rengöring efter varje användning

4.1.1 Klosetturtag

1. Ta bort klosetturtaget och töm innehållet.
2. Tvätta klosetturtaget med ett desinficerande rengöringsmedel. Använd en mjuk borste vid behov.
3. Skölj ur ordentligt före förvaring eller återanvändning.

OBSERVERA: Det går lika bra att tvätta av med hett tvålatten följt av en påsprutning med en desinfektionsspray istället för att använda ett desinficerande rengöringsmedel.

4.1.2 Sits

1. Spraya med desinficerande rengöringsmedel och skrubba med en mjuk borste efter behov.
2. Skölj av med vattenspray före förvaring eller återanvändning.
SÄNK INTE NED sitsen i vatten eller i rengöringsmedel.
3. För noggrannare rengöring tar du av sitsen från den mobila hygienstolen så att du får bättre åtkomst till undersidan av sitsen och runt dess öppning.

4.2 Rengöring vid behov

4.2.1 Spänningsjusterbar ryggklädsel

1. Ta av plastspännena och trigliden från ryggklädselns remmar medan du är uppmärksam på hur remmarna är lindade genom varje komponent när de tas av.
2. Ta av ryggklädseln från ryggstödet ram och maskintvätta med ett mildt tvättmedel i varmt vatten med normalt tvättprogram eller skontvättprogram. Tvätta övriga remtillbehör på samma gång, till exempel H-remmen samt bäcken- och bröstpositioneringsremmarna.
3. Sätt på ryggklädseln och andra positioneringstillbehör på hygienstolen igen och låt torka. Ryggklädseln får **INTE** torkas i torktumlare. I annat fall kan det uppstå skador på ryggklädseln.
4. Sätt fast plastspännena och trigliden på remmarna igen.
5. Justera remmarna till önskad spänning.

4.2.2 Ram, armstöd, justerbara fotstöd och andra komponenter

1. Spraya med ett desinficerande rengöringsmedel på ramen och komponenterna, skrubba med en mjuk borste och skölj med vatten.
2. Vid behov sprayar du ramen med en utspädd lösning (10 delar vatten till 1 del lösning) kalkborttagare (t.ex. CLR), skrubbar med en mjuk borste och sköljer noggrant med vatten.
Blanda **INTE** en kalkborttagningslösning med någon annan vätska. I annat fall kan giftiga gaser bildas. Använd **INTE** klorblekmedel på några Raz-komponenter.

En kvalificerad Raz-återförsäljare bör fortlöpande kontrollera alla fästelement och delkomponenter, och kan även rådgöras om du känner dig osäker på hygienstolens funktionalitet.

Några gånger per år bör hygienstolen och dess komponenter torkas av med utspädd kalkborttagningslösning för att avlägsna avlagringar. Skölj därefter med varmt vatten.

För att minska risken för mögeluppbyggnad bör hela hygienstolen torkas av med en mjuk torr trasa efter renspolningen och före förvaring eller användning.

4.3 Rekommenderade rengöringsprodukter

Åtgärd	Rekommenderade produkter
Allmän rengöring	Antibakteriellt rengöringsmedel
Desinfektionsmedel för ytlig rengöring Medelstarkt desinfektionsmedel	Oxiver TB (Virox Technologies Inc.) SepteFX 7D-11 (Titan Worldwide Inc.)
Kalkborttagning	CLR

VIKTIGT!

ANVÄND INTE SLIPANDE RENGÖRINGSPULVER ELLER SKURSVAMP PÅ RAZ-HYGIENSTOLEN. DEN MOBILA RAZ-HYGIENSTOLEN FÅR INTE SÄNKAS NED I VATTEN.

SKÖLJ NOGGRANT EFTER RENGÖRING FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT ALLA RESTER AV TVÅL ELLER RENGÖRINGSMEDEL AVLÄGSNAS.

ANVÄND INTE RENGÖRINGSPRODUKTER UTAN ATT FÖRST HA RÅDFRÅGAT PRODUKTENS BRUKSANVISNING, OCH VIDTA LÄMPLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA KEMIKALIEEXPONERING HOS MÄNNISKOR.

5.0 INCIDENTRAPPORTERING

VIKTIGT!

Om någon allvarlig incident inträffar i samband med denna enhet, det vill säga en händelse som har lett till, eller skulle kunna leda till, dödsfall, allvarlig skada eller allvarlig försämring av hälsotillståndet, ska den utan dröjsmål rapporteras till:

- **Tillverkaren (kontaktuppgifter anges i denna manual), och**
- **Den behöriga myndigheten eller relevant tillsynsmyndighet i det land där användaren eller patienten befinner sig.**

6.0 BEGRÄNSAD GARANTI

Denna garanti gäller endast den första inköparen/användaren av en mobil Raz-hygienstol som har köpts från en kvalificerad Raz-återförsäljare.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter beroende på region och land.

Denna garanti ska utsträckas till att vara i överensstämmelse med tillämpliga lagar och krav i delstaten/provinsen där programmet används.

Raz Design garanterar, inför den första inköparen/användaren, att dess bottenrams- och ryggråmskomponenter är fria från defekter i material och utförande under en period av två (2) år räknat från inköpsdatumet. Alla övriga komponenter på den mobila Raz-hygienstolen täcks av garantin under en period av ett (1) år, och är föremål för uteslutande av garanti beträffande normalt slitage. Om sådan produkt inom sådan garantiperiod visar sig vara defekt kommer delen att repareras eller bytas ut mot en ny efter Raz Designs skönsmässiga bedömning. Denna garanti omfattar inte arbets- eller fraktkostnader som uppkommer vid utbyte, delinstallation eller reparation av sådan produkt.

För garantiservice kontakter du återförsäljaren du köpte den mobila Raz-hygienstolen från. Om du inte skulle få tillfredsställande garantiservice ber vi dig kontakta Raz Design direkt med hjälp av kontaktinformationen som finns i början eller slutet av denna bruksanvisning. I din korrespondens med oss ber vi dig uppges din återförsäljares namn och adress, produkttyp, inköpsdatum, hygienstolens serienummer (anges på en grå etikett på stolsramen) samt produktproblemets karaktär. Returnera inte produkter till tillverkaren utan förhandstillstånd.

Begränsningar och undantag:

Ovan nämnda garanti gäller inte serienummerade produkter om serienumret har tagits bort eller är oläsligt, och heller inte för produkter som varit föremål för försummelse eller utsatts för en olycka. Felaktig användning, felaktigt utförd underhåll eller olämplig förvaring kan upphäva den mobila Raz-hygienstolens garanti.

Garantin gäller inte för produkter som ändringar utförts på utan Raz Designs uttryckliga skriftliga medgivande. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, modifiering med icke-auktoriserade delar eller tillbehör, produkter som skadats på grund av reparationer som gjorts på någon komponent av en individ eller personer som inte är anställda av en kvalificerad Raz-återförsäljare, eller produkt som skadats till följd av omständigheter utanför Raz Designs kontroll. Endast Raz Design har befogenhet att avgöra huruvida omständigheterna ger rätt till garantitäckning eller ej. Garantin gäller inte för problem som uppstår på grund av normalt slitage eller underlåtenhet att följa instruktionerna i denna bruksanvisning.

Ovan nämnda garanti är exklusiv och gäller istället för eventuella andra garantier, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda, inklusive underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Den enda gottgörelse vid brott mot garantivillkor är begränsad till reparation eller utbyte av den defekta produkten i enlighet med villkoren i detta dokument.

Garantiperioden för eventuell underförstådd garanti som tillämpas kan inte vara längre än garantiperioden för den uttryckliga garanti som ges i denna bruksanvisning. Raz Design ansvarar inte för eventuella följdskador eller oförutsedda skador på delar av eller hela den mobila Raz-hygienstolen.

Raz Design Inc.:s ramar och hårdvara är gjorda av rostfritt stål, för vilka vi lämnar en livstidsgaranti mot korrosion. Notera att denna livstidsgaranti endast gäller för den första inköparen/användaren av en Raz-hygienstol som har köpts från en kvalificerad Raz-återförsäljare. Underlåtenhet att följa anförda rengöringsanvisningar kan förorsaka korrosion av ramen, vilket innebär att garantin upphävs. Dessutom är alla krav gällande korrosionsskador föremål för granskning och en begäran kan göras om återsändning av den aktuella enheten, för grundlig undersökning, innan ett ersättningskrav kan behandlas.

7.0 KONTAKTUPPGIFTER

Det är viktigt att den mobila Raz-hygienstolen monteras korrekt och att alla justeringar görs noggrant. Uppdaterade bruksanvisningar kan laddas ned från www.razdesigninc.com. Kontakta den kanadensiska distributören eller tillverkaren om det är något avsnitt i bruksanvisningen du är osäker över.



TILLVERKARE

Raz Design Inc.
135 Rainside Rd. Toronto, ON, Canada, M3A 1B7
877.720.5678 / +1.416.751.5678
info@razdesigninc.com



DISTRIBUTÖREN

Sverige / Sweden
Wolturnus AB
Box 8010
163 08 Spånga
559171 2764
info@wolturnus.se

VIKTIGT!

PRODUKTER SOM INTE LÄNGRE KAN ANVÄNDAS SKA BORTSKAFFAS SEPARAT FRÅN HUSHÅLLSAVFALL. DETTA MÅSTE GÖRAS I ENLIGHET MED LOKALA OCH NATIONELLA BESTÄMMELSER FÖR MILJÖSKYDD OCH ÅTERVINNING AV RÅVAROR. BESÖK RELEVANTA KOMMUNALA OCH STATLIGA MYNDIGHETERS WEBBPLATSER FÖR INFORMATION OM KORREKT BORTSKAFFANDE.

OM DU GÖR BEDÖMNINGEN ATT NÅGON ASPEKT AV RAZ-HYGIENSTOLEN ÄR I BEHOV AV UNDERHÅLL KONTAKTA DU DIN ÅTERFÖRSÄLJARE. EVENTUELLA PROBLEM SOM KAN INVERKA MENLIGT PÅ SÄKER ANVÄNDNING AV HYGIENSTOLEN MÅSTE OMEDELBART UNDERSÖKAS NÄRMARE. ÅTERFÖRSÄLJAREN SOM DU KÖPTE HYGIENSTOLEN AV MÅSTE KONTAKTAS FÖR REPARATION INNAN HYGIENSTOLEN KAN ANVÄNDAS IGEN. DU MÅSTE TYDLIGT KLARGÖRA FÖR ÅTERFÖRSÄLJAREN ATT HYGIENSTOLEN ÄR I BEHOV AV UNDERHÅLL OCH INTE KAN ANVÄNDAS FÖRRÄN DEN REPARERATS OCH ALLA PROBLEM ÅTGÄRDATS.

OM DIN ÅTERFÖRSÄLJARE AV NÅGON ANLEDNING INTE SVARAR TILLFREDSSTÄLLANDE PÅ DIN BEGÄRAN BER VI DIG KONTAKTA RAZ DESIGN:

VIA E-POST
VIA TELEFON

info@razdesigninc.com
877.720.5678 (Nordamerika)
+1.416.751.5678 (övriga världen)